

Inteligentná váha eufy C20 – používateľská príručka (T9130)

1. Obsah balenia



Inteligentná váha eufy C20




4× AAA batérie



Návod na použitie

2. Vloženie batérií

- 1) Otočte váhu hore nohami a položte ju na rovnú plochu.
- 2) Posuňte kryt priestoru pre batérie nahor a vložte 4× AAA batérie. Uistite sa, že polarita zodpovedá označeniu v priestore pre batérie.
- 3) Posuňte kryt späť a uistite sa, že je bezpečne uzavretý. Po vložení batérií sa rozsvieti TFT displej.

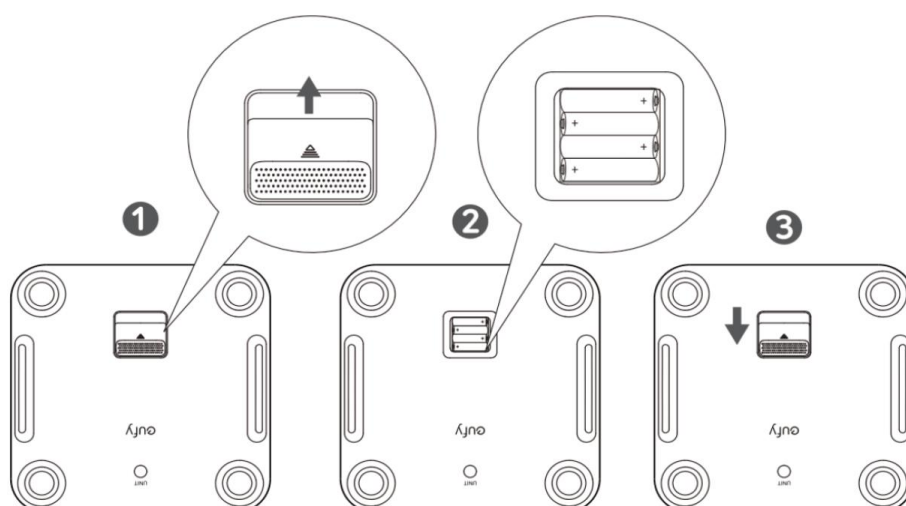


Keď sú batérie slabé, na TFT displeji sa zobrazí nápis „Low Battery“ (Slabá batéria). Všetky batérie vymeňte naraz. Nemiešajte nové a použité batérie.

Ak zariadenie nemeria, TFT displej sa po 10 sekundách nečinnosti automaticky vypne.

3. Výber jednotky merania

Stlačením tlačidla UNIT v spodnej časti váhy môžete prepínať medzi jednotkami: lb (libry) / kg (kilogramy). Mernú jednotku môžete vybrať aj priamo v aplikácii eufy.

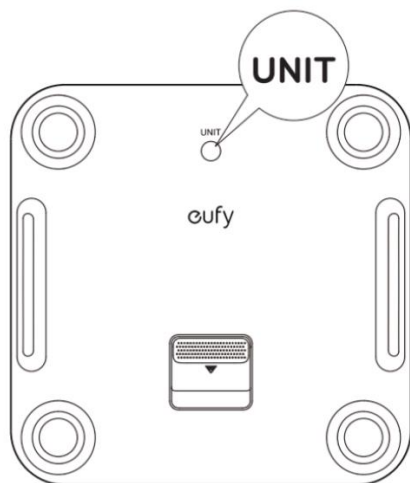


Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo UNIT po dobu 5 sekúnd, aby ste vstúpili do menu. Vyberte „Resetting“ (Obnovenie) a potom stlačte a podržte tlačidlo opäť po dobu 3 sekúnd, kým sa proces obnovenia nedokončí.



4. Inštalácia aplikácie eufy a párovanie



- 1) Stiahnite si aplikáciu **eufy** z App Store (iOS) alebo Google Play (Android).
- 2) Zapnite Bluetooth a Wi-Fi na svojom telefóne.
- 3) Otvorte aplikáciu a vytvorte používateľský účet. Presne vyplňte svoj profil.
- 4) Na stránke Me (Ja) vyberte Add Device (Pridať zariadenie) a postupujte podľa pokynov na pridanie eufy Smart Scale C20.

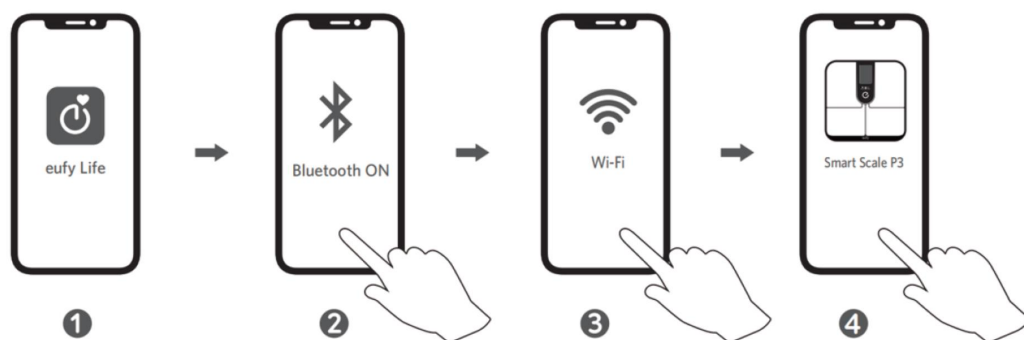

Po spárovaní sa aplikácia a váha pri ďalšom otvorení aplikácie pripoja automaticky.

	Ikona stavu	Význam
	Bliká	Párovanie
	Stále svieti	Pripojené

Kompatibilita: iOS 11.0 a novšie / Android 6.0 a novšie.

Poznámka: Nevytvárajte párovanie váhy z menu Bluetooth vášho telefónu. Vždy používajte párovanie priamo v aplikácii **eufy**.


5. Spustenie merania

1) Umiestnite váhu na tvrdú, rovnú plochu.

2) Pri prvom meraní sa uistite, že je vybraný váš používateľský profil.

3) Postavte sa bosý na váhu.

- Analýza zloženia tela sa spustí automaticky.
- Po meraní sa na TFT displeji zobrazí vaša hmotnosť a ďalšie údaje. Podrobnú analýzu zloženia tela nájdete v aplikácii **eufy**.

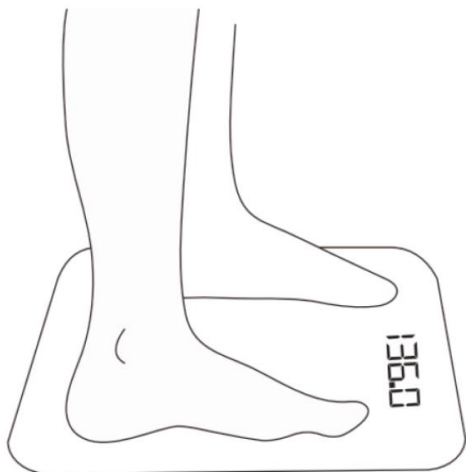

- Postavte sa bosý na váhu. Stojte nehybne, kým sa meranie nedokončí.
- Váha dokáže automaticky rozpoznať používateľov na základe ich predchádzajúcich údajov.
- Ak nie je rozpoznaný aktuálny používateľ, jednoducho poklepte nohou, aby ste prešli medzi používateľmi.


6. Podporované biometrické údaje

Hmotnosť	kg
Telesný tuk	
BMI	-
Srdcová frekvencia	bpm
Voda	%
Svalová hmota	kg
Tuková hmota	kg
Beztuková hmotnosť	kg
Základný metabolizmus	kcal
Kostná hmota	kg
Vnútorň tuk	-
Bielkoviny	%

Hmotnosť kostrového svalstva	kg
Podkožný tuk	%
Vek tela	-
Typ postavy	-

7. Meranie viacerých používateľov

Ak zdieľate váhu s iným používateľom, ktorého hmotnosť sa od vašej líši o ± 3 kg, zariadenie nemusí automaticky správne rozpoznať používateľa. V takomto prípade sa na displeji zobrazí stránka výberu používateľa. Ťuknutím jednou nohou na povrch váhy prejdete na správneho používateľa.

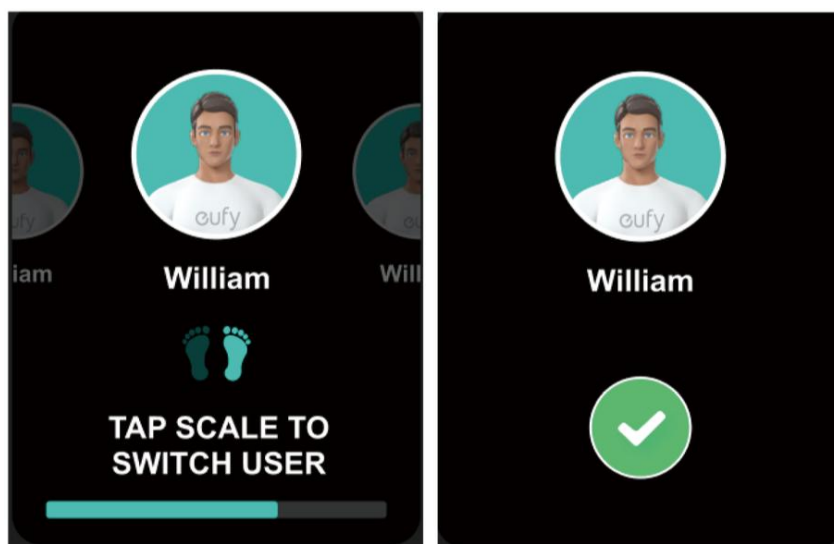


8. Výber režimov merania

Stlačte a podržte tlačidlo UNIT po dobu 5 sekúnd, aby ste vybrali rôzne režimy. Režim môžete zmeniť aj v aplikácii **eufy**.

8.1 Jednoduchý režim

Jednoduchý režim podporuje iba bežné meranie hmotnosti. Stačí stúpiť na váhu, aby sa zmerala vaša aktuálna hmotnosť.

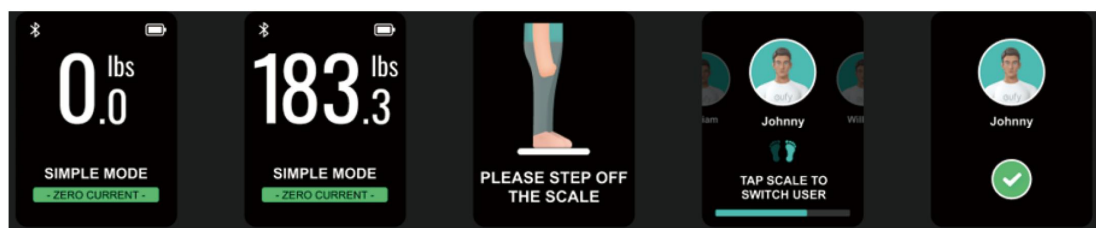

8.2 Režim hosťa

V režime hosťa môžete zmerať svoju hmotnosť bez nutnosti prihlásenia sa do používateľského účtu. V tomto prípade sa vaše údaje o hmotnosti neuložia.



8.3 Režim pre bábätká (len v aplikácii)


Inteligentná váha **eufy C20** podporuje meranie hmotnosti vášho dieťaťa. Ťuknite **na [...]** v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a potom vyberte **[Hmotnosť s dieťaťom]**. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili proces merania.




8.4 Režim domáceho maznáčika (len v aplikácii)

Inteligentná váha **eufy Smart Scale C20** môže vážiť aj vaše domáce zvieratá. Domáce zvieratá môžete nechať stáť priamo na váhe alebo môžete stáť na váhe s domácim zvieratkom v náručí. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili proces merania.

So zvieratkom:

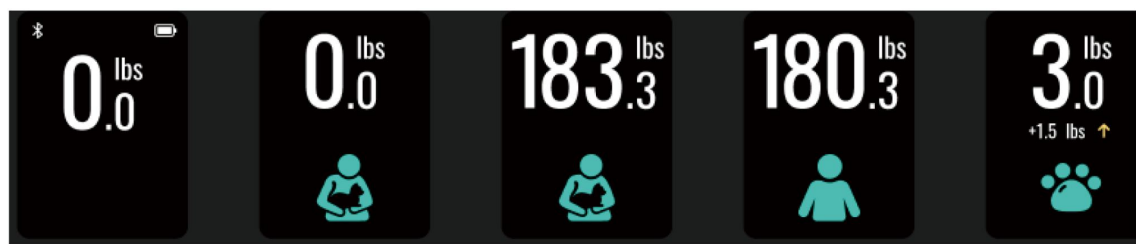

Domáce zvieratko samostatne:

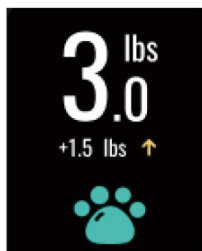

9. Dátové služby

Integrácia aplikácií tretích strán

Aplikácia **eufy** podporuje Apple Health, Google Fit a Fitbit. V aplikácii prejdite na stránku Ja, otvorte Služby tretích strán a aktivujte synchronizáciu.


Poznámka: Synchronizované budú len údaje z registrovaných účtov. Údaje členov rodiny nebudú synchronizované.

Export údajov

Kópiu svojich údajov môžete exportovať v aplikácii: Ja → Súkromie a údaje → Exportovať všetky údaje.


10. Údržba

Váhu pravidelne čistite suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou.

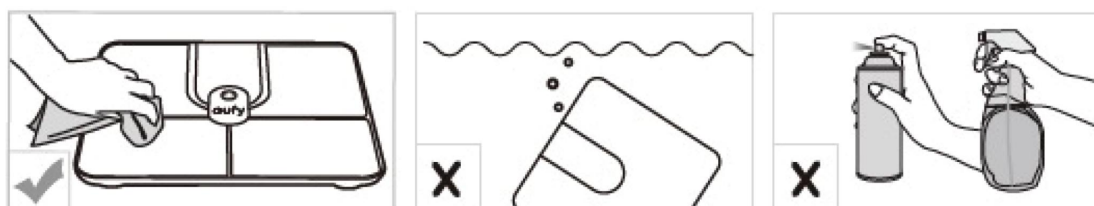

- Váhu nikdy neumývajte vodou ani ju neponárajte do vody.
- Na čistenie váhy nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo zmenu farby.

11. Riešenie problémov

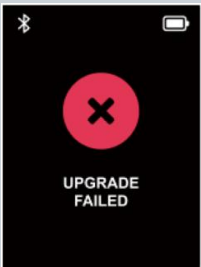Chybové správy	Popis	Riešenie
	Preťaženie Zariadenie sa vypne	Prestaňte merať a odstráňte zaťaženie
	Nízky stav batérie Zariadenie sa vypne	Vymeňte všetky 4 batérie naraz
	Aktualizácia sa nepodarila	Otvorte aplikáciu eufy , ťuknite na Nastavenia zariadenia a potom vyberte Aktualizácia firmvéru

Pri meraní

Problém	Možná príčina	Riešenie
Abnormálne výsledky - príliš vysoké - nízke - Veľký rozdiel medzi dvoma po sebe idúcimi meraniami	Nesprávne držanie tela	Stojte bosí a nehýbte sa
	Nesprávny profil používateľa	Skontrolujte profil
	Váha je na mäkkom alebo nerovnom povrchu	Umístite zariadenie na rovný, tvrdý povrch
TFT displej sa nezapne, keď naň stúpnete	Batérie nie sú vložené	Vložte 4 nové batérie typu AAA
	Batérie sú vybité	Vymeňte všetky batérie naraz
Analýza zloženia tela nefunguje	Meranie vykonávate v topánkach alebo	Postavte sa na váhu naboso

	ponožkách	
	V aplikácii eufy je aktívny jednoduchý režim	Prepnite režimy v aplikácii alebo stlačením a podržaním tlačidla UNIT po dobu 5 sekúnd.
	Nesprávne držanie tela	Stojte bosí a nehýbte sa
	Nesprávny profil používateľa	Skontrolujte svoj profil

12. Technické špecifikácie

Model produktu	Eufy Smart Scale C20
Napájanie	4× AAA batérie
Displej	TFT
Merné jednotky	lb / kg

13. Zákaznícky servis

Kontaktná podpora: support@eufy.com

Webová stránka: www.eufy.com

(USA/Kanada) +1 (800) 994 3056

(Veľká Británia) +44 (0) 1604 936 200

(Nemecko) +49 (0) 69 9579 7960

(Japonsko) +81 03 4455 7823

(CN) +86 400 0550 036

Záruka: 24-mesačná obmedzená záruka.

Ďalšie informácie, videonávody, často kladené otázky a záručné podmienky:

<https://support.eufy.com/>

Vyhlásenie o zhode PSTI (Veľká Británia): Zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnosť produktov

a telekomunikačnej infraštruktúry (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné produktov) z roku 2023. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke výrobcu.