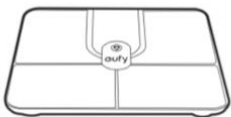
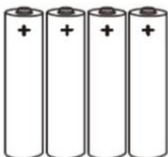



Inteligentná váha eufy P2 Pro – používateľská príručka (T9149)

1. Balenie

			
Inteligentná váha eufy	4× AAA batérie	Meracie pásmo (150 cm)	Návod na použitie

2. Vloženie batérií

- 1) Otočte váhu hore nohami a položte ju na rovnú plochu.
- 2) Posuňte kryt priestoru pre batérie nahor a vložte 4× AAA batérie. Uistite sa, že polarita je správna podľa označenia v priestore pre batérie.
- 3) Na LED displeji sa zobrazia číslice.
- 4) Stlačte kryt batériového priestoru, aby sa uzavrel. Uistite sa, že je kryt batériového priestoru bezpečne uzamknutý.

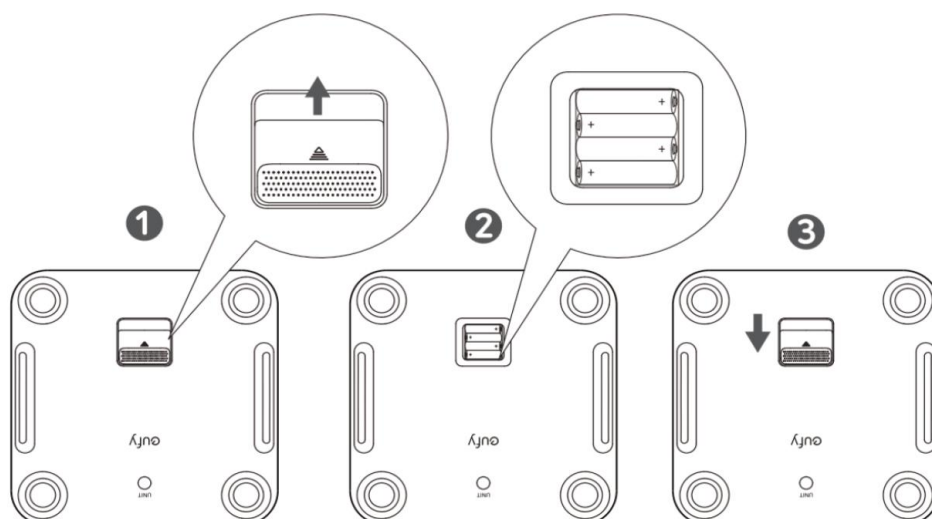


Keď sú batérie slabé, na TFT displeji sa zobrazí nápis „Low Battery“ (Slabá batéria). Všetky batérie vymeňte naraz. Nemiešajte nové a použité batérie.

Ak zariadenie nemeria, TFT displej sa po 10 sekundách nečinnosti automaticky vypne.

3. Výber jednotky merania

Stlačením tlačidla UNIT v spodnej časti váhy môžete prepínať medzi jednotkami: lb (libry) / kg (kilogramy). Mernú jednotku môžete vybrať aj priamo v aplikácii eufy.

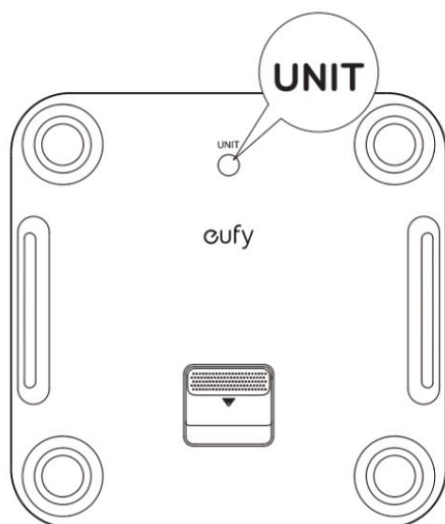


Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo UNIT po dobu 10 sekúnd.

4. Inštalácia aplikácie eufy a párovanie



- 1) Stiahnite si aplikáciu **eufy** z App Store (iOS) alebo Google Play (Android).
- 2) Zapnite Bluetooth a Wi-Fi na svojom telefóne.
- 3) Otvorte aplikáciu a vytvorte si používateľský účet. Presne vyplňte svoj profil.
- 4) Na stránke Me (Ja) vyberte Add Device (Pridať zariadenie) a postupujte podľa pokynov na pridanie eufy Smart Scale C20.

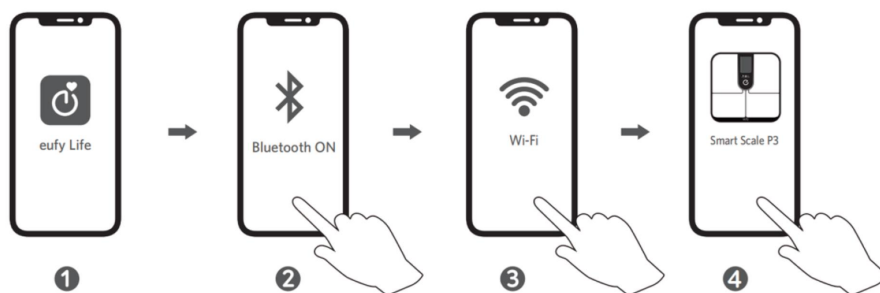

Po spárovaní sa aplikácia a váha pri ďalšom otvorení aplikácie pripoja automaticky.

 Ikona stavu Bluetooth	Ikona stavu	Význam
	Bliká	Párovanie
	Stále svietenie	Pripojené
 Ikona stavu Wi-Fi	Ikona stavu	Význam
	Vypnuté	Nie je pripojené
	Pomaly bliká	Pripravené na pripojenie
	Rýchlo bliká	Pripojenie
	Stále svieti	Pripojené

Kompatibilita:

iOS 11.0 a novšie / Android 5.0 a novšie.

Poznámka:

Na dokončenie nastavenia je potrebné zapnúť Bluetooth na smartfóne alebo tablete a povoliť aplikácii **eufy** používanie vašej polohy.

Nevykonávajte párovanie váhy z menu Bluetooth vášho telefónu. Vždy používajte párovanie priamo v aplikácii **eufy**.

5. Spustenie merania


Pred vykonaním prvého merania musíte v aplikácii **eufy** vytvoriť a nastaviť používateľské ID.

1) Položte váhu na tvrdú, rovnú plochu.

2) Otvorte aplikáciu **eufy** a na domovskej stránke vyberte možnosť „**Pridať zariadenie**“. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pridajte inteligentnú váhu.


3) Vstúpte na váhu naboso.

- Analýza zloženia tela sa spustí automaticky.
- Po meraní sa na LED displeji zobrazí vaša hmotnosť a ďalšie údaje. Podrobnú analýzu zloženia tela nájdete v aplikácii **eufy**.

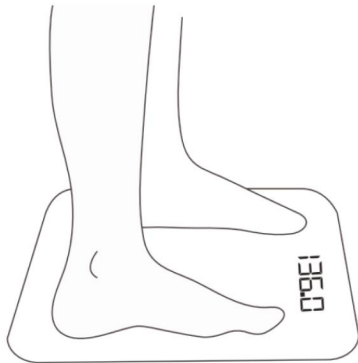


Použitie meracieho pásma

Na získanie presných meraní podľa vašich potrieb môžete použiť meracie pásmo.

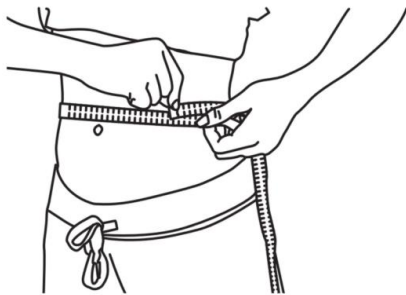

6. Údržba

Váhu pravidelne čistite suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou.

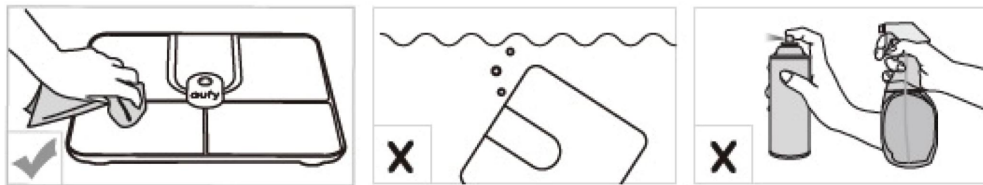

- Váhu nikdy neumývajte vodou ani ju neponárajte do vody.
- Na čistenie váhy nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie alebo zmenu farby.

11. Riešenie problémov

Chybové správy	Popis	Riešenie
	Preťaženie Zariadenie sa vypne	Prestaňte merať a odstráňte zaťaženie
	Nízky stav batérie Zariadenie sa vypne	Vymeňte všetky 4 batérie naraz
	Chyba pri nastavovaní Wi-Fi	Otvorte aplikáciu eufy a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste váhu opäť pripojili k zariadeniu. Pred nastavením Wi-Fi premiestnite váhu do blízkosti routera. Stlačte a podržte tlačidlo UNIT po dobu 10 sekúnd, aby ste obnovili továrenské nastavenia, a potom reštartujte pripojenie Wi-Fi.

Pri meraní

Problém	Možná příčina	Riešenie
Abnormálne výsledky · príliš vysoké · nízke · Veľký rozdiel medzi dvoma po sebe idúcimi meraniami	Nesprávne držanie tela	Stojte bosí a nehýbte sa
	Nesprávny profil používateľa	Skontrolujte profil
	Váha je na mäkkom alebo nerovnom povrchu	Umístite zariadenie na rovný, tvrdý povrch
TFT displej sa nezapne, keď naň stúpnete	Batérie nie sú vložené	Vložte 4 nové batérie typu AAA
	Batérie sú vybité	Vymeňte všetky batérie naraz
Analýza zloženia tela nefunguje	Meranie vykonávate v topánkach alebo ponožkách	Postavte sa na váhu naboso
	V aplikácii eupy je aktívny jednoduchý režim	Prepnite režimy v aplikácii alebo stlačením a podržaním tlačidla UNIT po dobu 5 sekúnd.
	Nesprávne držanie tela	Stojte bosí a nehýbte sa

	Nesprávny profil používateľa	Skontrolujte profil
--	---------------------------------	---------------------

12. Technické špecifikácie

Model	T9149
Napájanie	6 V (4 × AAA batérie)
LED displej	2,5 × 1,4 palca / 64 × 35 mm
Merné jednotky	Libra / Kilogram / Kameň
Kroky jednotiek	0,1 lb / 0,05 kg
Prírastok telesného tuku	0,1
Prírastok telesnej vody	0,1
Nárast svalovej hmoty	0,10
Rozsah merania	0,2 lb – 397 lb / 0,1 kg – 180 kg / 0,2 lb – 28 st: 5 lb
Aktivačná hmotnosť	3 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 °C – 40 °C, vlhkosť: ≤ 90 % RH
Skladovacie prostredie	Teplota: –10 °C – 50 °C, vlhkosť: ≤ 90 % RH
Pracovný frekvenčný rozsah	2400 MHz – 2500 MHz
Vysielací výkon	Wi-Fi: 18 dBm, Bluetooth: 4 dBm
Verzia Bluetooth	5.0
Verzia Wi-Fi	2,4 G

13. Zákaznícky servis

Kontaktná podpora: support@eufy.com

Webová stránka: www.eufy.com

(USA/Kanada) +1 (800) 994 3056

(Veľká Británia) +44 (0) 1604 936 200

(Nemecko) +49 (0) 69 9579 7960

(Japonsko) +81 03 4455 7823

(CN) +86 400 0550 036

Záruka: 24-mesačná obmedzená záruka.

Ďalšie informácie, videonávody, často kladené otázky a záručné podmienky:

<https://support.eufy.com/>

Vyhlásenie o zhode PSTI (Veľká Británia): Zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnosť produktov

a telekomunikačnej infraštruktúry (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné produktov) z roku 2023. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke výrobcu.