



نظرة عامة على شفّاط الحليب

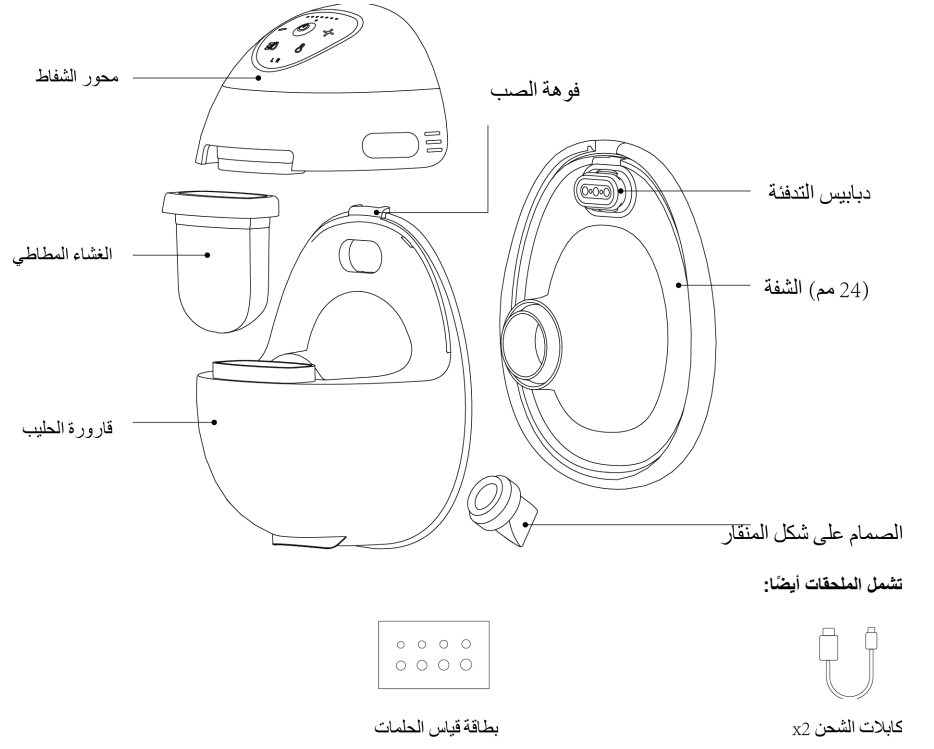

الشحن


استخدمي كابل شحن USB-C (مضمن) ومحول 5 فولت/1 أمبير أو أعلى (غير مضمن) لشحن شفّاطات الحليب.

لماذا لا يعمل محور المضخة الخاص بي؟
إذا واجهت مضخة لا تعمل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة على المضخة لمدة 12 ثانية لإعادة الضبط ومعرفة إذا كانت ستعمل.

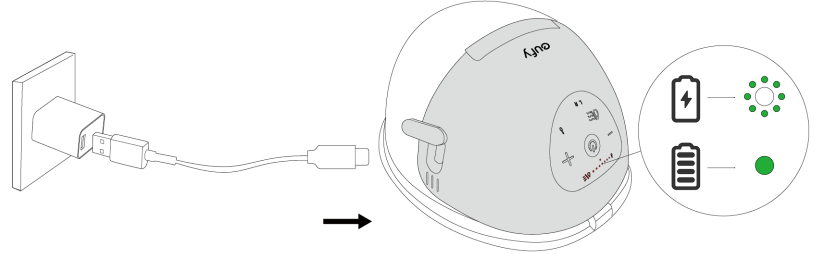


تفكيك


- الخطوة 1: امسك محور المضخة بيد واحدة واستخدم إبهام اليد الأخرى لسحب حافة الحاوية بالقرب من الفوهة للخارج لتحرير محور المضخة من الفوهة. (تجنب سحب الحافة).
- الخطوة 2: ارفع محور الشفّاط المضخة.

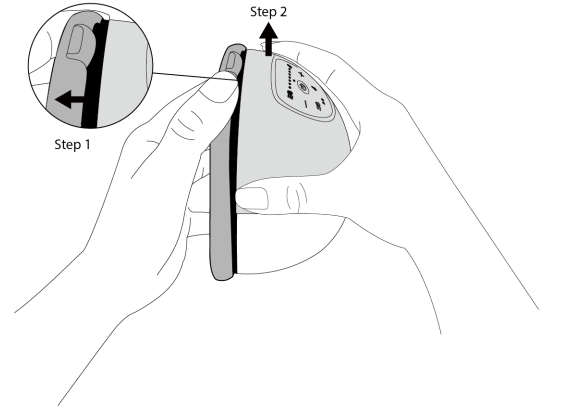


- أزل الغشاء المطاطي من التجويف.

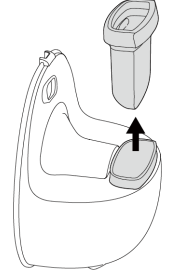

3. قم بفك الحلقة الخارجية للشفة، واسحب دبابيس التدفئة من الفتحة البيضاوية، ثم اسحب الشفة بالكامل للخارج.

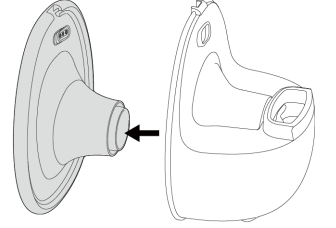

4. ادفع الصمام الذي يشبه المنقار بالإصبع لإزالته.

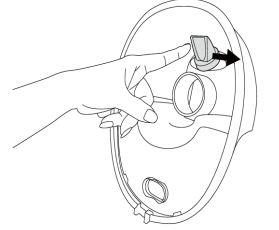

التنظيف والتعقيم

- قبل الاستخدام الأول: قم بتعقيم جميع الأجزاء القابلة للغسل عن طريق غليها لمدة تصل إلى 5 دقائق، مع التحريك باستمرار لمنع التصاق الأجزاء بالحاوية وذوبانها. بدلاً من ذلك، يمكنك تعقيمها بالبخار لمدة تصل إلى 5 دقائق.
- التنظيف اليومي: اشطفي جميع القطع القابلة للغسل بالماء الدافئ والصابون، ثم جففيها بالهواء. عقمي القطع إذا لزم الأمر باستخدام نفس الطرق المستخدمة في التنظيف الأولي.
- مدة صلاحية الأجزاء القابلة للغسل: إن العمر التقديري للأجزاء القابلة للغسل هو 1-3 أشهر، والعمر الفعلي سيختلف بناءً على الاستخدام وتكرار التعقيم. استبدليها إذا لاحظت انخفاضاً في الشفط والأداء (وخاصة صمام البطة)، أو إذا كنت قد خزنتها لفترة طويلة عند التخطيط للضح لطفلك القادم.

- لا تستخدم الميكروويف للتعقيم.



يمكن تعقيم جميع الأجزاء القابلة للغسل (باستثناء محور المضخة) كما يلي.

⚠ احرص دائماً على بقاء محور المضخة جافاً ونظيفاً بعد كل جلسة ضخ. إذا انسكب الحليب على وحدة المضخة، قم بمسحه بقطعة قماش جافة لضمان الشحن السليم.

غسالة الصحون



قدر الطهي




معقم زجاجات الرضاعة




التجميع


1. امسك أسفل القارورة لأعلى، ثم أدخل الصمام الذي يشبه المنقار في الفتحة الصغيرة داخل القارورة باستخدام الإبهام والسبابة ثم اضغط عليه بسرعة للتأكد من أنه تم تثبيته جيدًا وعدم سقوطه.

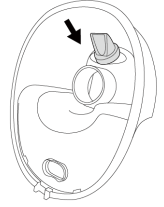


2. قم بدفع الحافة إلى الحاوية، مع التأكد من أن دبابيس التسخين مضغوطة بإحكام في الفتحة البيضاوية. قم بلف الحلقة الخارجية للتأكد من أنها محكمة الإغلاق لمنع تسرب الحليب.

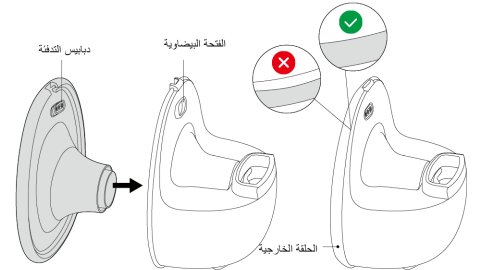


3. اضغط بقوة خلف دبابيس التسخين للحصول على الامتداد الكامل. قد يفشل التسخين إذا لم يتم الامتداد بالكامل.

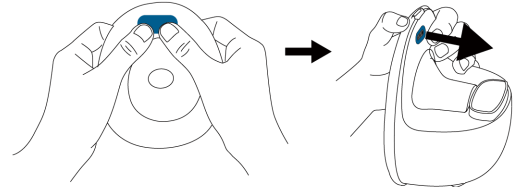

4. أدخل الحجاب الحاجز في الأخدود الموجود في الحاوية، بحيث يكون الجانب المقعر من الحجاب الحاجز مواجهًا للجانب المزود بالشفة.

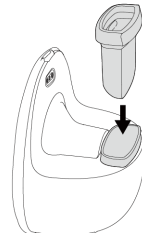


5. قم بتركيب محور الشفاط على الجزء العلوي من القارورة، واضغط بقوة لإحكام الغلق وسد الفجوة بين محور الشفاط والغشاء.

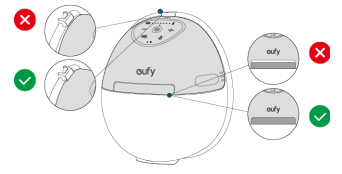

تضمن آلية القفل بين محور الشفاط وصنبور الصب شفتاً وتدفة مثاليين.

6. لضمان الحصول على القياس المناسب، استخدم بطاقة قياس الحلمة لاختيار إدراج الحجم المناسب وضع إدراج الحجم في نفق الشفة.

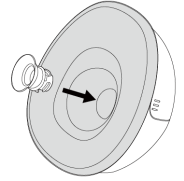

* ثباغ إدخال الحجم بشكل منفصل في على


<https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>

الارتداء


هناك معايير ستساعدك على تحديد ما إذا كان شفاط الحليب في موضعه الصحيح:

- تشعرين بشفت ملحوظ يستطيع سحب الحليب أم لا؛
 - يجب أن يكون وضع الشفاط مريحاً على الثدييك.
- إذا لم يتحقق كلا المعيارين (الشعور بالشفت الملحوظ والراحة) عند ارتداء الشفاط، فانت بحاجة إلى ضبط وضعية الشفاط. لا تقلقي إذا لم تحسلي على نتائج جيدة في البداية. فإن استغرق جسمك لبعض الوقت للتأقلم مع الشفاط الجديد أمر طبيعي.

1. انحني للأمام قليلاً للتأكد من محاذاة الحلمة لفتحة الشفة بدقة. يجب أن يكون شفاط الحليب مثبتاً بشكل جيد على الثدييك.

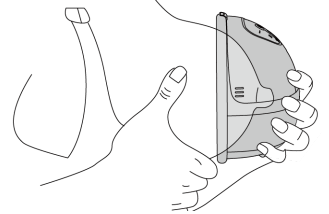

2. ارتدي حمالة صدر مزودة بغطاء قابل للإزالة وتغطي الثدي بالكامل لخلق ضغط محكم بين الثدييك والشفة.

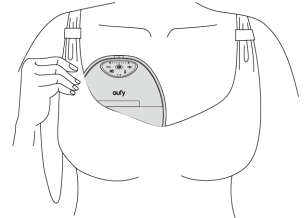

استخدام

لمنع التسرب:

- عند الانتهاء من التجميع، تحقق مرة أخرى من أن الحلقة الخارجية للشفة محكمة الغلق تمامًا.
- تأكد من أن حلمتك في وسط فتحة الشفة، واستخدمي حمالة صدر للرضاعة ذات تغطية كاملة لإنشاء إحكام بين ثدييك والشفة.
- لا تنحني للوراء أثناء عملية الشفط. بنهاية الوقت الذي تقضيه في عملية شفط الحليب، انحني إلى الأمام لإزالة الشفاط.
- هل لا يمكنك الشعور بالشفط أو ليس هناك أي إخراج أو إخراج قليل جدًا؟
- افحصي الصمام الذي يشبه المنقار والغشاء المطاطي بحثًا عن أي تلف، بما في ذلك الشقوق أو التشققات أو الفتحات أو التمزقات. في حالة تلف أي قطعة، توقف عن استخدامها واشترِ قطعة بديلة.
- تأكد من صحة التجميع وأن القطع الأربع (الصمام على شكل المنقار، وفتحة الشفة، والغشاء المطاطي، ومحور الشفاط) محكمة في مكانها تمامًا.
- اضبطي وضعية الشفاط وتأكد من أن الحلمة في منتصف فتحة الشفة، وأن الشفاط محكم الإغلاق على ثديك، ويمكنك أن تشعر بالشفط بشكل ملحوظ.
- جربي مقاسات الشفة أو الإدراج المختلفة.
- جربي مستويات وأنماط شفط مختلفة.

ضمان التدفئة المناسبة:

- اضغطي على دبابيس التدفئة بثبات في الفتحة البيضاوية للفاوورة.
- أحكمي الإغلاق بين محور الشفاط والغشاء.
- حددِ إعدادات التدفئة والمدة التي تتناسبك دون التسبب في تهيج الجلد.

التحكم بالأزرار

	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	تشغيل / إيقاف شفاط الحليب
	الضغط	إيقاف مؤقت / متابعة
	الضغط	التبديل بين وضع التحفيز ووضع الشفط
	الضغط	زيادة / تقليل مستوى الشفط / التدفئة (لضبط مستوى الحرارة، اضغط على زر التدفئة أولاً).
	الضغط	تشغيل / إيقاف تشغيل التدفئة
	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	الاقتران اليمنى/اليسرى في التطبيق


مؤشرات الضوء

..... •	ضوء أحمر ثابت	مستوى البطارية أقل من 20%
	وميض باللون الأحمر	مستوى البطارية أقل من 10%
	أبيض	في وضع التحفيز / الشفط

٨	برتقالي ثابت وميض ضوء برتقالي	في وضع التدفئة مشكلة في التدفئة (أعد تركيب شفة ومحور الشفاط مع ضمان دخول دبابيس التدفئة في مكانها بشكل صحيح).
.....	مؤشرات من 1 إلى 7 باللونين الأبيض / البرتقالي	مستوى الشفط: من 1 إلى 7 مستوى الحرارة: من 1 إلى 3
L R	مؤشر اليمينى / اليسرى أبيض	تم إقران الجانب الأيسر/الأيمن في التطبيق


نقل الحليب

1. إيقاف لشفاط الحليب مؤقتاً أو إيقاف تشغيلها. انحني قليلاً إلى الأمام عند إزالة الشفاط لتجنب التسرب.

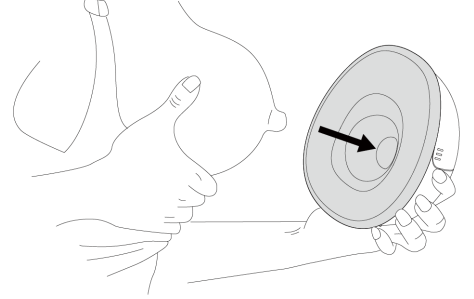


2. قم بإزالة محور المضخة من الحاوية. يرجى الرجوع إلى الخطوة 1 في "تفكيك".


⚠ تجنب تفكيك أي قطعة (بما في ذلك الغشاء المطاطي) بخلاف محور الشفاط قبل نقل الحليب إلى القارورة لمنع التسرب.

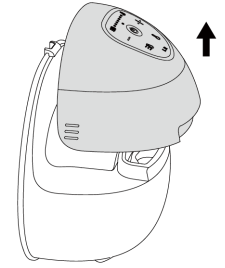

3. اتركي القارورة على الطاولة جاهزة للنقل.

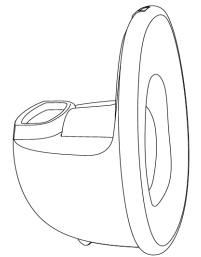

4. أميلي القارورة بحيث تكون الشفة للأعلى لسكب الحليب. عندما تكون فوهة الصب موجهة نحو الأسفل، أميلي بشكل أكبر لتفريغ القارورة بشكل كامل. وأخيراً، أزيل الغشاء المطاطي إذا لزم الأمر لجمع أي حليب محبوس تحته.

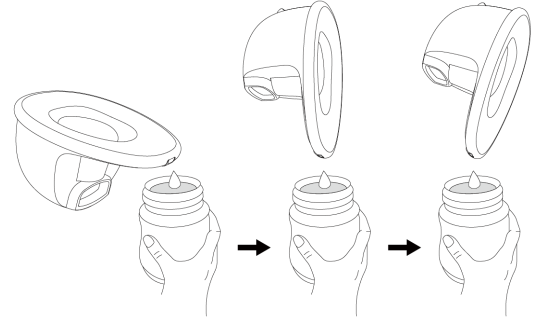

تحميل التطبيق (اختياري)

نرُلي تطبيق eufy Baby وثبتيه، ثم سجّلي الدخول أو أنشئي حسابًا. اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإضافة هذا الجهاز وإكمال الإعداد. لتحسين تجربة استخدام منتجات eufy، سيتم استبدال تطبيق eufy Baby الحالي بتطبيق eufy في عام 2025.



خدمة العملاء



ضمان محدود لمدة 12 شهرًا على محور الشفط ضمان محدود لمدة 3 أشهر على القطع القابلة للغسل



(US/CA) +1 (800) 988 7973

(UK) +44 (0) 1604 936200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(中国) +86 400 0550 036

(日本) 03 4455 7823

(AU) +61 3 8331 4800

(Egypt) +20 8000000826

(UAE) +971 8000320817

(Kuwait) +965 22069086

(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial