


Produktübersicht über die Milchpumpe




Weitere Bestandteile des Sets:

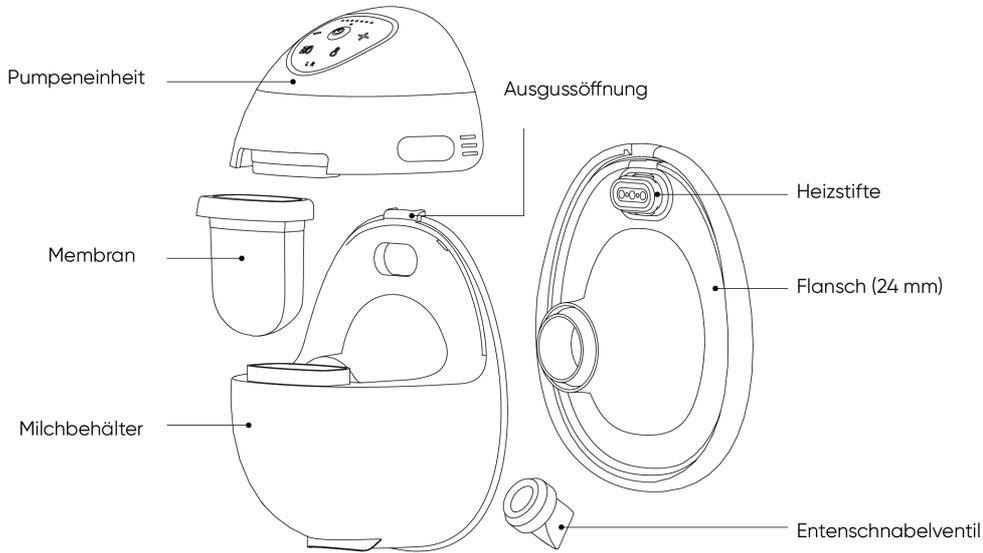

Laden

Verwende ein USB-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) und einen 5V/1A oder höheren Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), um deine Milchpumpe aufzuladen.


💡 Warum startet mein Pumpen-Hub nicht?
Falls der Pumpenhub nicht funktioniert, halten Sie die Einschalttaste am Pumpenhub 12 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen und zu sehen, ob er sich einschaltet.

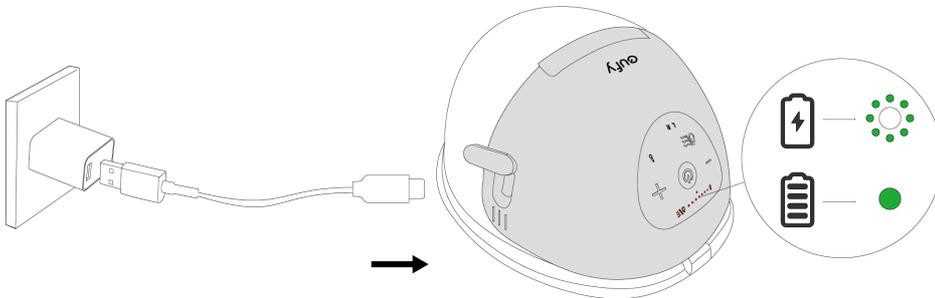


Auseinandernehmen

1. Schritt 1: Halten Sie die Pumpenhalterung mit einer Hand fest und ziehen Sie mit dem Daumen der anderen Hand den Rand des Behälters in der Nähe des Auslaufs nach außen, um die Pumpenhalterung vom Auslauf zu lösen. (Ziehen Sie nicht am Flansch.)


Schritt 2: Heben Sie die Pumpeneinheit an.

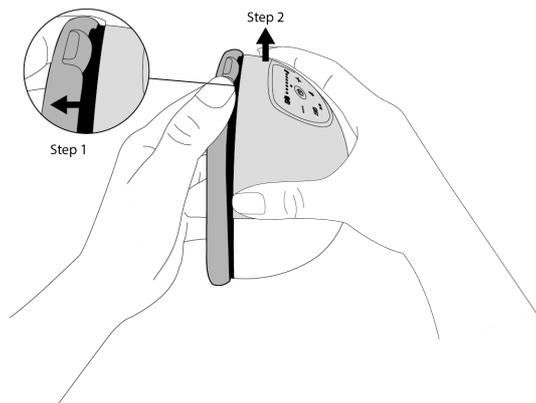


2. Nimm das Membran aus der Nut.

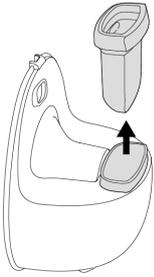

3. Entferne den äußeren Ring des Flansches und ziehe die Heizstifte aus der ovalen Aussparung. Ziehe dann den gesamten Flansch heraus.

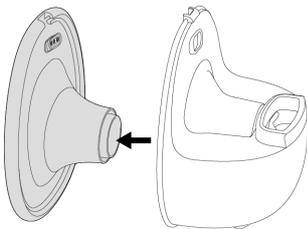

4. Entferne das Entenschnabelventil mit dem Finger.

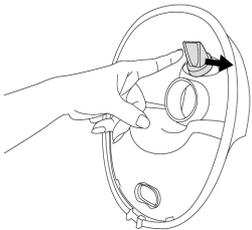

Reinigung und Sterilisation


-  Vor der ersten Verwendung: Sterilisieren Sie alle waschbaren Teile, indem Sie sie bis zu 5 Minuten lang kochen und ständig umrühren, um zu verhindern, dass die Teile am Behälter haften bleiben und schmelzen. Alternativ kannst du die Teile bis zu 5 Minuten lang mit Dampf sterilisieren.
- Tägliche Reinigung: Spüle alle waschbaren Teile mit warmem Seifenwasser ab und lass sie an der Luft trocknen. Sterilisiere gegebenenfalls mit denselben Methoden wie bei der Erstreinigung.
- Lebensdauer der waschbaren Teile: Die geschätzte Lebensdauer der waschbaren Teile beträgt 1-3 Monate, und die tatsächliche Lebensdauer variiert je nach Verwendung und Sterilisationshäufigkeit. Ersetzen Sie sie, wenn Sie eine Verringerung der Saugleistung und Leistung bemerken (insbesondere das Entenschnabelventil) oder wenn Sie sie zu lange gelagert haben, während Sie planen, für Ihr nächstes Kind zu pumpen.

Zum Sterilisieren keine Mikrowelle verwenden.




Alle abwaschbaren Teile (außer der Pumpennabe) können wie folgt sterilisiert werden.

-  **Halten Sie die Pumpennabe nach jeder Pumpensitzung stets trocken und sauber. Falls Milch auf die Pumpen-Nabe verschüttet wird, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch sauber, um ein ordnungsgemäßes Laden sicherzustellen.**

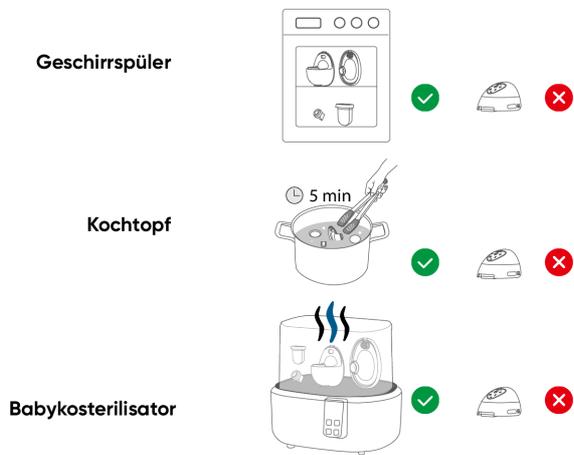


Zusammenbau


1. Halte den Behälterboden hoch, setze das Entenschnabelventil mit Daumen und Zeigefinger in das kleine Loch ein und bewege es leicht, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.

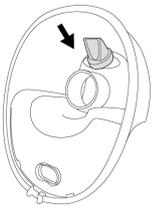


2. Schieben Sie die Flansch auf den Behälter, und achten Sie darauf, dass die Heizstifte fest in die ovale Kerbe gedrückt sind. Wickeln Sie den äußeren Ring, um sicherzustellen, dass er richtig abgedichtet ist, um Milchundichtigkeiten zu vermeiden.

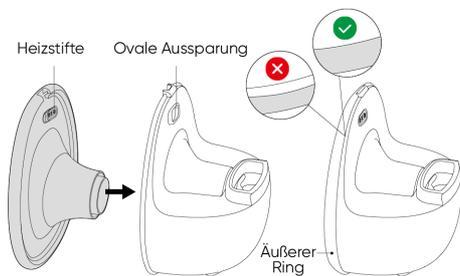


3. Drücken Sie fest hinter die Heizelemente, um eine vollständige Verlängerung zu erreichen. Heizung kann versagen, wenn sie nicht vollständig ausgezogen ist.

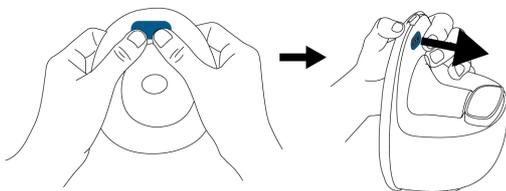

4. Setzen Sie die Membran in die Nut des Behälters ein, wobei die konkave Seite der Membran zur Flanschseite zeigt.

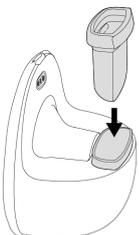


5. Installiere die Pumpeneinheit oben auf dem Behälter und drücke fest, um den Spalt zwischen Pumpeneinheit und Membran zu versiegeln.

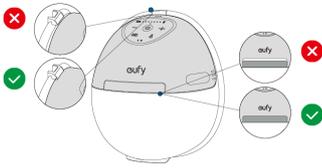

⚡ Der Verriegelungsmechanismus zwischen der Pumpeneinheit und dem Ausgießstutzen sorgt für zuverlässige Saugkraft und Erwärmung.

6. Um eine richtige Passform zu gewährleisten, verwenden Sie die Brustwarzen-Messkarte, um einen passenden Einsatz auszuwählen, und platzieren Sie den Einsatz im Flanschkanal.

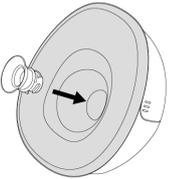

⚡ Größeneinsätze sind separat erhältlich bei <https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>

Tragen


💡 Um sicherzustellen, dass die Milchpumpe korrekt angelegt ist, sollten zwei Aspekte beachtet werden:

- Erstens ist es wichtig, dass ein deutliches Sauggefühl wahrnehmbar ist, welches die Milch effektiv extrahiert.
- Zweitens sollte die Pumpe bequem sitzen und keine Beschwerden verursachen.


Erfüllt die Trageposition keines dieser Kriterien, passe die Position der Pumpe an.

Bitte gib deinem Körper etwas Zeit, sich an die neue Pumpe zu gewöhnen. Mach dir keine Sorgen, wenn es anfangs nicht gleich perfekt klappt.

1. Lehne dich leicht nach vorne, um sicherzustellen, dass deine Brustwarze zentriert im Flanschtunnel ist. Die Milchpumpe sollte fest an deiner Brust anliegen.

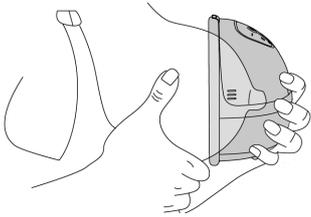

2. Verwende einen Still-BH mit vollständiger Abdeckung und einer Klappe, damit zwischen deiner Brust und dem Flansch alles dicht abschließt und keine Milch ausläuft.

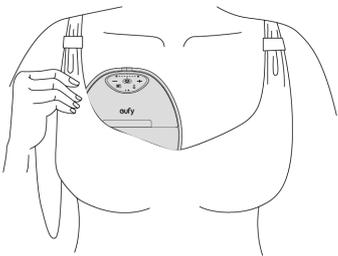

Verwendung



Um Leckagen zu verhindern:

- Überprüfe nach dem Zusammenbau erneut, ob der äußere Ring des Flansches perfekt abgedichtet ist.
- Stelle sicher, dass deine Brustwarze im Zentrum des Flanschtunnels ist und verwende einen Still-BH mit voller Abdeckung, um eine dichte Abdichtung zwischen deinen Brüsten und dem Flansch zu erzeugen.
- Vermeide es, dich beim Pumpen zurückzulehnen. Am Ende einer Sitzung lehne dich nach vorne, um die Pumpe zu entfernen.

Kein Sauggefühl oder haben keinen oder nur sehr geringen Output?

- Überprüfe das Schnabelventil und die Membran auf Beschädigungen, einschließlich Absplitterungen, Löchern oder Einrissen. Wenn ein Teil beschädigt ist, stelle die Benutzung ein und kaufe ein Ersatzteil.
- Überprüfe, ob die Montage korrekt ist und dass die vier Teile (Entenbillventil, Flanschtunnel, Membran und Pumpeneinheit) perfekt abgedichtet sind.
- Justiere die Trageposition, stelle sicher, dass die Brustwarze im Zentrum des Flanschtunnels ist, die Pumpe an deiner Brust abgedichtet ist und du einen spürbaren Sog fühlst.
- Experimentiere mit verschiedenen Flansch- oder Einsatzgrößen.
- Probiere verschiedene Saugstärken und Rhythmen aus.



Um eine ordnungsgemäße Heizung zu gewährleisten:


- Drücke die Heizstifte fest in die ovale Aussparung am Behälter.
- Versiegele den Spalt zwischen Pumpeneinheit und Membran.
- Finde die Wärmeeinstellungen und die Dauer heraus, die dir am besten passen, ohne deine Haut zu reizen.

Tastensteuerung		
	2 Sekunden gedrückt halten	Milchpumpe schaltet ein/aus <ul style="list-style-type: none"> • Die Milchpumpe schaltet sich automatisch ab, nachdem sie 30 Minuten gepumpt hat oder 10 Minuten pausiert.
	Drücken	Pause / Fortsetzen
	Drücken	Wechsel zwischen Entspannungs- und Abpumpmodus <ul style="list-style-type: none"> • Entspannungsmodus. Beginnt mit einem schnellen und kurzen Saugmuster, um den Milchfluss zu starten. • Abpumpmodus: Wechselt zu einem langsameren Saugmuster zur Milchexpression und saugt dann tiefer und langsamer.
	Drücken	Wärmefunktion ein-/ausschalten
	Drücken	Saug-/Wärmestufe erhöhen/verringern (Um die Wärmestufe anzupassen, zuerst den Wärmeknopf drücken.)
	Gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten	L/R-Kopplung in der App

Anleitung für die Beleuchtung		
	Rot leuchtend	Akku <20%
	Rot blinkend	Akku-Stand <10%
	Weiß	Im Entspannungs- und Abpumpmodus
	Dauerhaft Orange	Im Wärmemodus
	Orangene blinkend	Wärmefunktionsstörung (Setze den Flansch und die Pumpeneinheit wieder zusammen, um sicherzustellen, dass die Heizstifte richtig sitzen.)
	1 bis 7 Anzeigen Weiß/Orange	Saugstärke: 1 bis 7 Hitzegrad: 1 bis 3
L R	L/R-Anzeige leuchtet weiß.	Linke/rechte Seite ist in der App gekoppelt.


Milch umfüllen

1. Pausiere oder schalte die Milchpumpe aus. Lehne dich leicht nach vorne, wenn du die Pumpe entfernst, um ein Auslaufen zu verhindern.

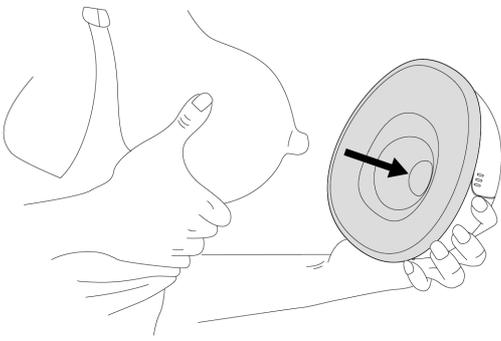


2. Entfernen Sie die Pumpennabe aus dem Behälter. Siehe "Auseinandernehmen" Schritt 1.


⚠ Vermeide es, Teile außer der Pumpeneinheit zu zerlegen, bevor du die Milch umfüllst, um ein Auslaufen zu verhindern.

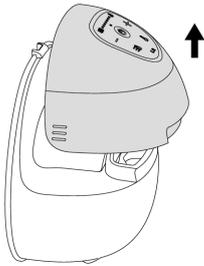

3. Stelle den Behälter auf eine stabile Oberfläche, um die Milch sicher umfüllen zu können.

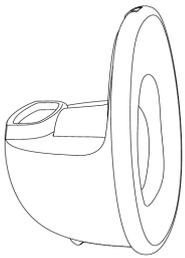

4. Kippe den Behälter vorsichtig mit dem Flansch nach oben, um die Milch auszugießen. Halte die Ausgussöffnung nach unten und kippe weiter, um die Milch vollständig zu entleeren. Entferne bei Bedarf die Membran, um darunter gefangene Milch zu sammeln.

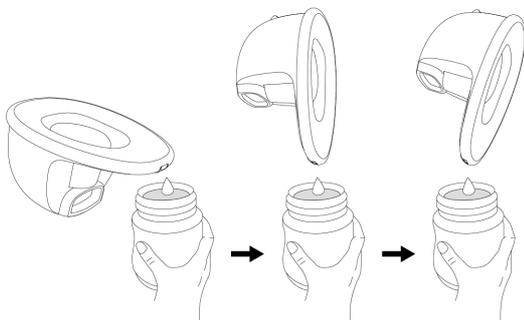

Herunterladen der App (optional)

Lade die eufy Baby-App herunter, melde dich an oder erstelle ein Konto. Folge den Anweisungen in der App, um dieses Gerät hinzuzufügen und die Einrichtung abzuschließen.

Um das Nutzungserlebnis von eufy-Produkten zu verbessern, wird die bestehende eufy Baby-App im Jahr 2025 durch die eufy-App ersetzt.



Kundendienst



12-monatige eingeschränkte Garantie auf die Pumpennabe 3-monatige beschränkte Garantie auf waschbare Teile



(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial