


## Descripción general del sacaleches



Los accesorios también incluyen:

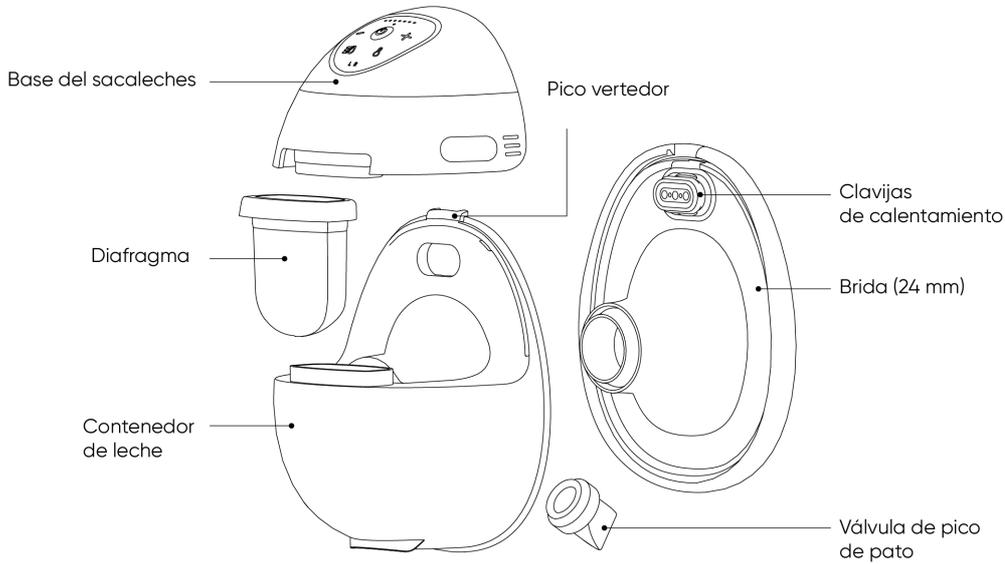

Cables de carga x2




Tarjeta de medición del pezón

## Carga

Utilice un cable de carga USB-C (incluido) y un adaptador de 5 V/1 A o superior (no incluido) para cargar sus extractores de leche.

### 💡 ¿Por qué no se inicia mi centro de bombeo?


Si encuentra un concentrador de bomba que no funciona, mantenga presionado el botón de encendido del concentrador de bomba durante 12 segundos para reiniciar y ver si se enciende.

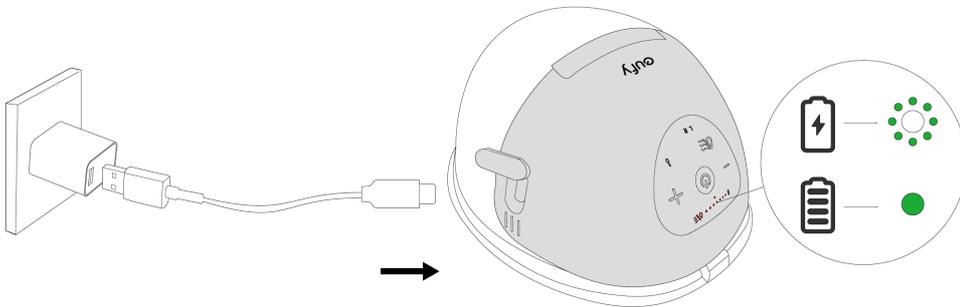


## Desmontaje

1. Paso 1: Sostiene el núcleo de la bomba con una mano y use el pulgar de la otra mano para tirar hacia afuera del borde del contenedor cerca del pico para liberar el núcleo de la bomba del pico. (Evite tirar de la brida.)


Paso 2: Levante el base del sacaleches.

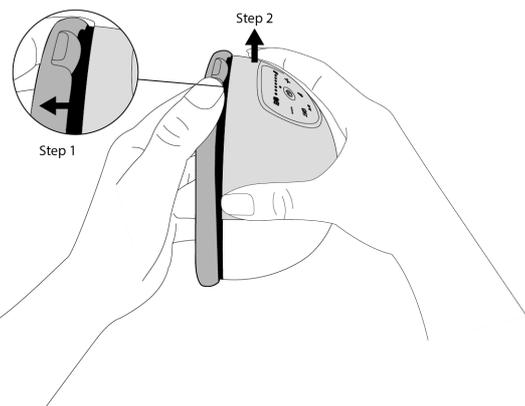


2. Retire el diafragma de la ranura.

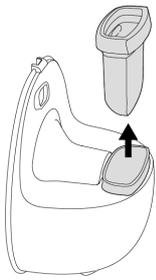

3. Desenvuelva el anillo exterior de la brida, saque las clavijas calefactoras de la muesca ovalada y luego extraiga toda la brida.

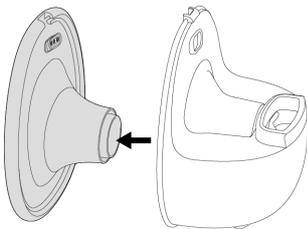

4. Golpee levemente la válvula de pico de pato con el dedo para quitarla.

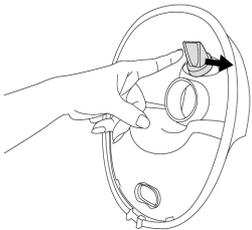

## Limpieza y Esterilización

- Antes del uso inicial: Esterilice todas las partes lavables hirviéndolas durante hasta 5 minutos, removiendo constantemente para evitar que las partes se adhieran al recipiente y se derritan. Si lo prefiere, también puede esterilizarlos con vapor durante 5 minutos como máximo.
- Limpieza diaria: Enjuague todas las piezas lavables con agua tibia y jabón y luego séquelas al aire. Esterilícelas si es necesario mediante los mismos métodos indicados en la limpieza inicial.
- La vida útil de las partes lavables: La vida estimada de las partes lavables es de 1-3 meses, y la vida real variará con la frecuencia de uso y esterilización. Reemplace las piezas si nota una disminución en la succión y el rendimiento (particularmente la válvula de pato), o si las ha almacenado demasiado tiempo cuando planea usarlas para su próximo hijo.

No utilice un microondas para esterilizar.



Todas las partes lavables (excepto el cubo de la bomba) se pueden esterilizar de la siguiente manera.

- ⚠ **Siempre mantén el cubo de la bomba seco y limpio después de cada sesión de bombeo. Si se derrama leche sobre el centro de la bomba, límpiolo con un paño seco para asegurar una carga adecuada.**

Lavavajillas



Olla de Cocción




Esterilizador de Biberones




## Montaje


1. Sostenga la base del recipiente hacia arriba, inserte la válvula de pico de pato en el pequeño orificio dentro del recipiente con el pulgar y el índice, sacúdala para asegurarse de que no se caiga.

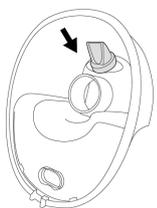


2. Empuje la brida hacia el recipiente, asegurándose de que los pines de calentamiento estén firmemente insertados en la muesca ovalada. Envuelva el anillo exterior para asegurarse de que esté correctamente sellado y evitar fugas de leche.

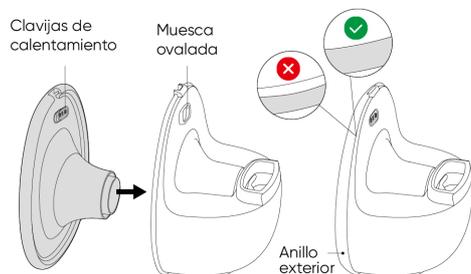


3. Presione firmemente detrás de los pines de calentamiento para una extensión completa. El calentamiento puede fallar si no está completamente extendido.

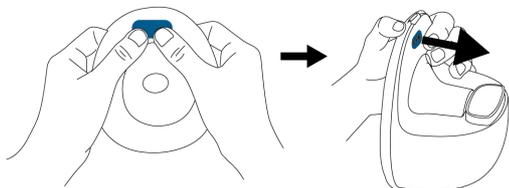

4. Inserte el diafragma en la ranura del contenedor, con el lado cóncavo del diafragma mirando hacia el lado de la brida.

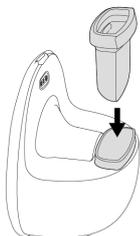


5. Instale la base del sacaleches en la parte superior del recipiente, presionando firmemente para sellar el espacio entre la base del sacaleches y el diafragma.

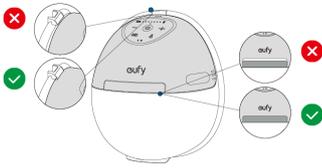

💡 El mecanismo de bloqueo entre la base del sacaleches y el pico vertedor garantizan una succión y un calentamiento fiables.

6. Para garantizar un ajuste adecuado, utilizar la Tarjeta de Medición del pezón para seleccionar un inserto de tamaño apropiado y coloque el inserto de tamaño en el túnel de la brida.

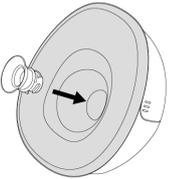

💡 Los insertos de ajuste se venden por separado en <https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>

## Llevando




**Dos criterios le ayudarán a determinar si el sacaleches está colocado correctamente:**

- Si siente una succión notable que puede sacar la leche.
- Si es cómodo de llevar.


Si la posición de uso no cumple ninguno de estos criterios, deberá ajustar la posición de la bomba.

**Su cuerpo necesita un poco de tiempo para adaptarse a una nueva bomba, así que no se desanime si los resultados no son buenos desde el principio.**

1. Inclínese ligeramente hacia adelante para asegurarse de que su pezón esté centrado en el túnel del embudo. El sacaleches debe estar firmemente contra su pecho.

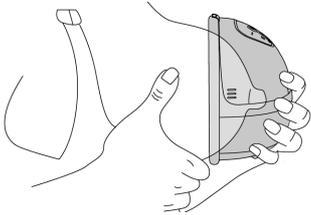

2. Utilice un sostén de lactancia de cobertura total con solapa para crear un sello hermético entre sus senos y el embudo.

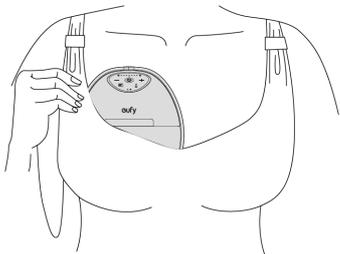

## Uso

**Para evitar fugas:**

- Cuando termine de montar, compruebe nuevamente que el anillo exterior del embudo esté perfectamente sellado.
- Asegúrese de que su pezón esté en el centro del túnel del embudo y use un sostén de lactancia de cobertura total para crear un sello hermético entre sus senos y el embudo.
- No se recueste mientras extrae la leche. Al final de una sesión, inclínese hacia adelante para retirar el sacaleches.

**¿No siente succión o tiene poca o ninguna salida?**

- Examine la válvula de pico de pato y el diafragma por si tiene daños, como fisuras, desconchados, agujeros o roturas. Si hay alguna pieza dañada, deje de usar el sacaleches y consiga un recambio.
- Compruebe que el montaje es correcto y que las cuatro piezas (válvula pico de pato, túnel de embudo, diafragma y base del sacaleches) están perfectamente selladas.
- Ajuste la posición de uso, asegúrese de que el pezón esté en el centro del túnel del embudo, que el sacaleches esté sellado en su seno y que pueda sentir una succión perceptible.
- Use diferentes bridas y tallas de embudos.
- Pruebe diferentes succiones y ritmos.

**Para garantizar un calentamiento adecuado:**

- Presione bien las clavijas calefactoras en la muesca ovalada del recipiente.
- Selle el espacio entre el cubo de la bomba y el diafragma.
- Identifique los niveles de calor y la duración que más le convengan sin irritar su piel.

**Controles de los botones**


	Presione y manténgalo presionado durante 2 segundos	Encender/apagar el sacaleches <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sacaleches se apagará automáticamente después de bombear durante 30 minutos o de pausar durante 10 minutos.</li> </ul>
	Pulsar	Pausa / Continuar
	Pulsar	Cambiar entre el modo de estimulación y el modo de expresión <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de estimulación: En este modo, el sacaleches comienza con un patrón de succión rápida y corta para hacer que su leche comience a fluir.</li> <li>• Modo de expresión: En este modo, el extractor de leche comienza con un patrón de succión lento para la expresión de la leche, succionando más profundamente y más lentamente.</li> </ul>
	Pulsar	Encender/apagar el calentamiento
	Pulsar	Aumentar/Disminuir el nivel de succión/calor (Para ajustar el nivel de calor, presione primero el botón de calor).
	Manténgalos pulsados simultáneamente durante 2 segundos.	Emparejamiento L/R en la aplicación

**Guía de luz**

	Rojo fijo	Nivel de batería <20%
	Rojo intermitente	Nivel de batería <10%
	Blanco	En modo estimulación/expresión
	Naranja fijo	En modo calefacción
	Naranja intermitente	Excepción de calefacción (Vuelva a ensamblar la brida y el cubo de la bomba para asegurarse de que las clavijas calefactoras estén asentadas correctamente).
	Indicadores del 1 al 7 en blanco/naranja	Nivel de succión: 1 a 7 Nivel de calor: 1 a 3
<b>L R</b>	Indicador L / R blanco	Lado izquierdo/derecho emparejado en la aplicación


## Transferencia de la leche

1. Pause o apague el sacaleches. Inclínese hacia adelante al sacar la bomba para evitar fugas.

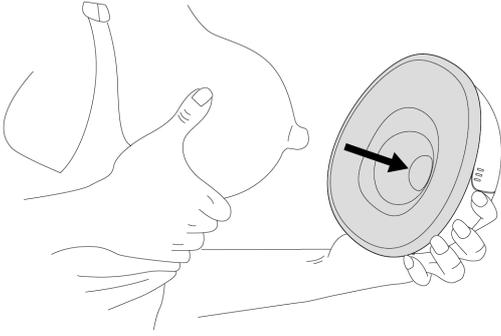


2. Retire el base del sacaleches del contenedor. Consulte el Paso 1 “Desmontaje”.


⚠ Evite desmontar cualquier pieza (incluido el diafragma) que no sea la base del sacaleches antes de pasar la leche para evitar fugas.

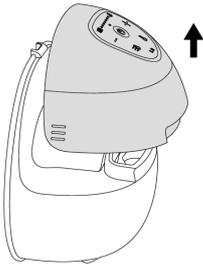

3. Deje el contenedor sobre la mesa listo para transferir.

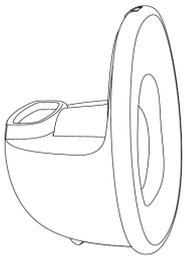

4. Inclíne el recipiente con el embudo hacia arriba para verter la leche. Cuando el pico vertedor mire hacia abajo, inclínelo más para vaciarlo por completo. Por último, retire el diafragma si es necesario para recoger la leche atrapada debajo.

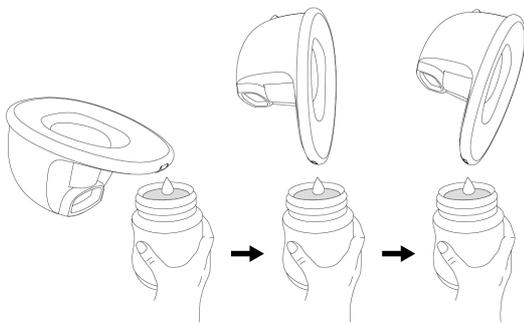

## Descargar la aplicación (Opcional)

Descargue e instale la aplicación eufy Baby, luego inicie sesión o cree una cuenta. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar este dispositivo y completar la configuración.

Para mejorar la experiencia de uso de los productos eufy, la aplicación actual eufy Baby será reemplazada por la aplicación eufy en 2025.



## Servicio de atención al cliente

 Garantía limitada de 12 meses en la base del sacaleches Garantía limitada de 3 meses en piezas lavables

 (US/CA) +1 (800) 988 7973  
(UK) +44 (0) 1604 936200  
(DE) +49 (0) 69 9579 7960  
(中国) +86 400 0550 036  
(日本) 03 4455 7823  
(AU) +61 3 8331 4800  
(Egypt) +20 8000000826  
(UAE) +971 8000320817  
(Kuwait) +965 22069086  
(KSA) +966 8008500030

 [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com)

 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial