


## Aperçu du tire-lait



Les accessoires comprennent également :

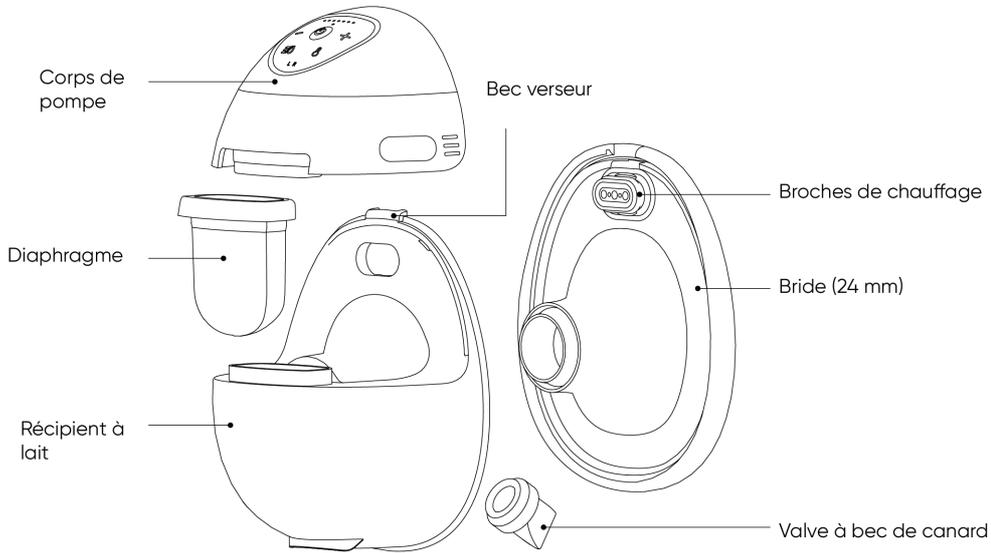

Câbles de charge x2



Gabarit de mesure du mamelon


## Charge

Utilisez un câble de chargement USB-C (inclus) et un adaptateur 5 V/1 A ou supérieur (non inclus) pour charger vos tire-lait.



### Pourquoi mon moyen de pompe ne démarre-t-il pas ?


Si vous rencontrez un moyen de pompe qui ne fonctionne pas, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation du moyen de pompe pendant 12 secondes pour le réinitialiser et voir s'il s'allume.

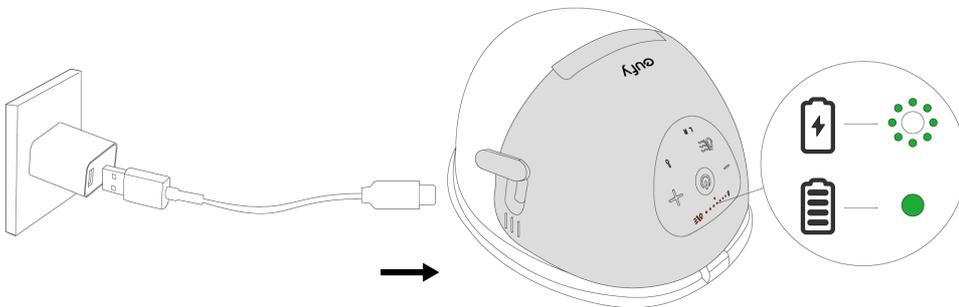


## Démontage

1. Étape 1 : Tenez le moyen de la pompe avec une main et utilisez le pouce de l'autre main pour tirer le bord du récipient près du bec vers l'extérieur afin de libérer le moyen de la pompe du bec. Évitez de tirer sur la bride.


Étape 2 : Soulevez le corps de la pompe.

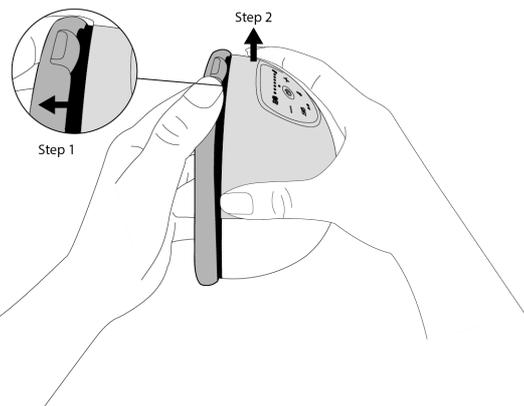


2. Retirez le diaphragme de la rainure.

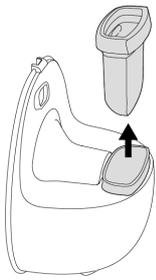

3. Déballez l'anneau extérieur de la bride, retirez les broches chauffantes de l'encoche ovale, puis retirez toute la bride.

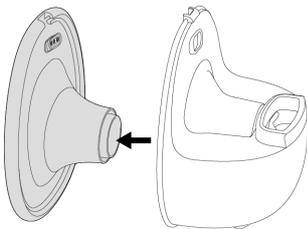

4. Donnez un petit coup à la valve à bec de canard avec le doigt pour la retirer.

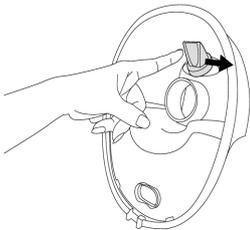

## Nettoyage et stérilisation

- Avant la première utilisation : stérilisez toutes les pièces lavables en les faisant bouillir pendant jusqu'à 5 minutes, en remuant constamment pour éviter que les pièces ne collent au récipient et ne fondent. Vous pouvez également stériliser à la vapeur pendant 5 minutes maximum.
- Nettoyage quotidien : Rincez toutes les pièces lavables avec de l'eau tiède savonneuse, puis séchez à l'air. Stérilisez si nécessaire, en utilisant les mêmes méthodes que pour le nettoyage initial.
- Durée de vie des pièces lavables : La durée de vie estimée des pièces lavables est de 1 à 3 mois, et la durée de vie réelle variera en fonction de l'utilisation et de la fréquence de stérilisation. Remplacez-les si vous remarquez une diminution de l'aspiration et des performances (en particulier la valve à clapet), ou si vous les avez stockés trop longtemps en prévision de votre prochain enfant.

**N'utilisez pas de micro-ondes pour stériliser.**



Toutes les pièces lavables (sauf le moyeu de la pompe) peuvent être stérilisées comme suit.

- **⚠ Gardez toujours le moyeu de la pompe au sec et propre après chaque session de pompage. Si du lait est renversé sur le moyeu de la pompe, essuyez-le avec un chiffon sec pour garantir une bonne recharge.**

Lave-vaisselle



Marmite




Stérilisateur de Biberons




## Assemblage


1. Retournez le récipient puis, en tenant la valve à bec de canard entre votre pouce et votre index, insérez-la dans le petit trou à l'intérieur du récipient. Donnez-lui un petit coup pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

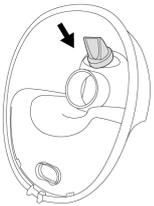


2. Poussez la bride sur le récipient, en vous assurant que les broches de chauffage sont fermement insérées dans l'encoche ovale. Enroulez l'anneau extérieur pour vous assurer qu'il est correctement scellé afin d'éviter les fuites de lait.

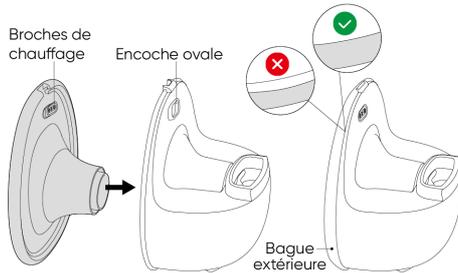


3. Appuyez fermement derrière les broches chauffantes pour une extension complète. Le chauffage peut échouer s'il n'est pas complètement déployé.

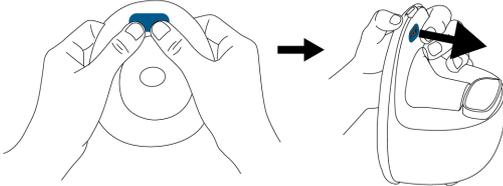

4. Insérez le diaphragme dans la rainure du conteneur, avec le côté concave du diaphragme face au côté bride.

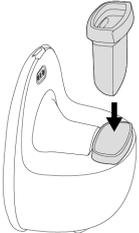


5. Installez le corps de pompe au-dessus du récipient en appuyant fermement afin de sceller l'espace entre le corps de pompe et le diaphragme.

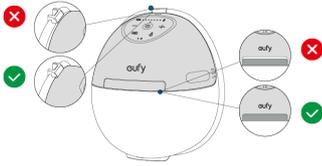

⚡ Le mécanisme de verrouillage entre le corps de pompe et le bec verseur assure une aspiration et un chauffage fiables.

6. Pour garantir un ajustement adéquat, utilisez la carte de mesure des mamelons pour sélectionner un insert de taille appropriée et placez l'insert dans le tunnel de la bride.

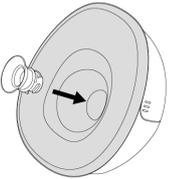


⚡ Les inserts de calibrage sont vendus séparément chez <https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>


## Porter

- 💡 **Deux critères vous aideront à déterminer si le tire-lait est correctement positionné :**
- Si vous ressentez une aspiration notable qui peut extraire le lait ;
  - Si c'est confortable.
- Si la position de port ne répond à aucun de ces critères, vous devez ajuster la position de la pompe.
- Il faut un peu de temps à votre corps pour s'adapter à une nouvelle pompe, alors ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas bons au tout début.**

1. Penchez-vous légèrement en avant pour vous assurer que le mamelon est centré dans le tunnel de la coupelle. Le tire-lait doit être fermement appuyé contre votre sein.

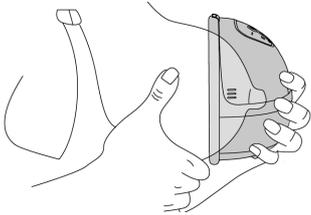

2. Utilisez un soutien-gorge d'allaitement à couverture complète avec rabat pour assurer l'étanchéité entre vos seins et la coupelle.

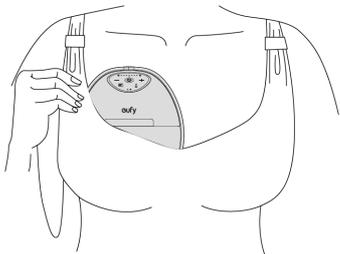

## Utilisation

**Pour prévenir les fuites :**

- Une fois le montage terminé, vérifiez à nouveau que la bague extérieure de la coupelle est parfaitement étanche.
- Assurez-vous que le mamelon est au centre du tunnel de la coupelle et utilisez un soutien-gorge d'allaitement à couverture complète pour assurer une étanchéité entre vos seins et la coupelle.
- Ne vous penchez pas en arrière pendant le pompage. À la fin d'une séance, penchez-vous en avant pour retirer la pompe.

**Vous ne ressentez aucune aspiration ou n'avez presque pas de débit?**

- Inspectez la valve en bec et le diaphragme pour repérer des défauts, notamment des craquelures, des éclats, des trous ou une usure. Si une pièce est endommagée, arrêtez l'utilisation et remplacez-la.
- Vérifiez que le montage est correct et que les quatre pièces (valve à bec de canard, tunnel de coupelle, diaphragme et corps de pompe) sont parfaitement étanches.
- Ajustez la position de port, assurez-vous que le mamelon est au centre du tunnel de la coupelle, que le tire-lait est scellé à votre sein et que vous pouvez ressentir une succion perceptible.
- Essayez différentes tailles de coupelles ou d'inserts.
- Essayez différentes succions et rythmes.

**Pour garantir un chauffage correct :**

- Pressez fermement les broches de chauffage dans l'encoche ovale du récipient.
- Comblez l'espace entre le corps de la pompe et le diaphragme.
- Identifiez les réglages de chaleur et la durée qui vous conviennent le mieux sans irriter votre peau.


**Boutons de commande**

	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Allumer/éteindre le tire-lait <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tire-lait s'éteindra automatiquement après 30 minutes de pompage ou 10 minutes de pause.</li> </ul>
	Appuyez une fois	Pause / Continuer
	Appuyez une fois	Basculer entre le mode stimulation et le mode expression <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode stimulation : Dans ce mode, le tire-lait commence par un motif de succion rapide et court pour faire démarrer l'écoulement de votre lait.</li> <li>• Mode expression : Dans ce mode, le tire-lait commence par un modèle d'aspiration lente pour l'expression de lait, aspirant plus profondément et plus lentement.</li> </ul>
	Appuyez une fois	Allumer/éteindre la chaufferette
	Appuyez une fois	Augmenter/diminuer le niveau d'aspiration/de chaleur (Pour régler le niveau de chaleur, appuyez d'abord sur le bouton de la chaufferette.)
	Appuyez et maintenez simultanément pendant 2 secondes	Appairage L/R dans l'application

**Signification des voyants**


	Rouge fixe	Niveau de batterie <20 %
	Rouge clignotant	Niveau de batterie <10 %
	Blanc	En mode Stimulation/Expression
	Orange fixe	En mode chauffage
	Orange clignotant	Exception de chauffage (Réassemblez la coupelle et le corps de la pompe pour vous assurer que les broches chauffantes sont correctement installées.)
	1 à 7 Voyants Blanc / Orange	Niveau d'aspiration : 1 à 7 Niveau de chaleur : 1 à 3
<b>L R</b>	Indicateur L/R blanc	Côté gauche/droit appairé dans l'application

1. Mettez en pause ou éteignez le tire-lait. Penchez-vous en avant lorsque vous retirez la pompe pour éviter les fuites.

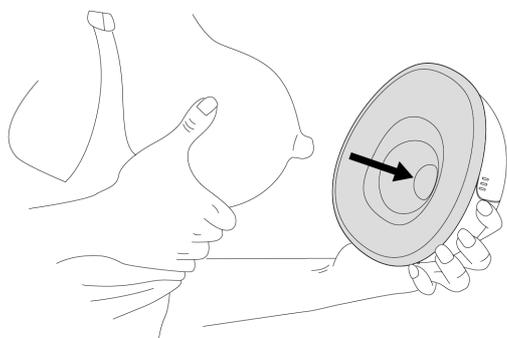


2. Retirez le moyeu de la pompe du conteneur. Reportez-vous à l'étape 1 « Démontage ».


⚠ Ne démontez pas de pièces (y compris le diaphragme) en dehors du corps de pompe avant de transférer le lait afin d'éviter les fuites.

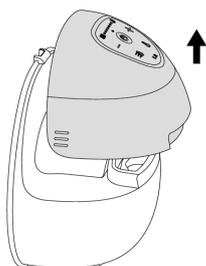

3. Laissez le récipient sur la table prêt pour le transfert.

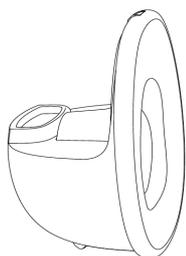

4. Tenez le récipient avec la coupelle orientée vers le haut et inclinez-le pour verser le lait. Une fois le récipient à la verticale, inclinez-le davantage pour le vider complètement. Enfin, retirez le diaphragme si nécessaire pour récupérer le lait coincé en dessous.

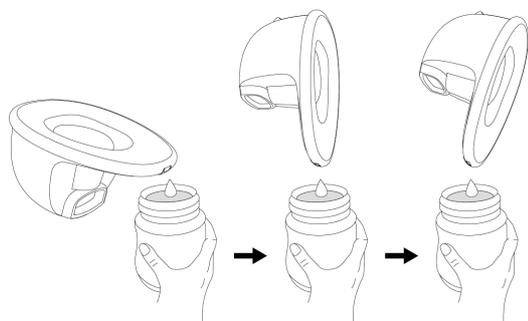

### Télécharger l'application (facultatif)

Téléchargez et installez l'application eufy Baby, puis connectez-vous ou créez un compte. Suivez les instructions de l'application pour ajouter cet appareil et terminer la configuration.

Pour améliorer l'expérience d'utilisation des produits eufy, l'application eufy Baby existante sera remplacée par l'application eufy en 2025.



## Support client



 (US/CA) +1 (800) 988 7973  
(UK) +44 (0) 1604 936200  
(DE) +49 (0) 69 9579 7960  
(中国) +86 400 0550 036  
(日本) 03 4455 7823  
(AU) +61 3 8331 4800  
(Egypt) +20 8000000826  
(UAE) +971 8000320817  
(Kuwait) +965 22069086  
(KSA) +966 8008500030

 [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com)

 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial