


## Panoramica del tiralatte



Gli accessori includono anche:

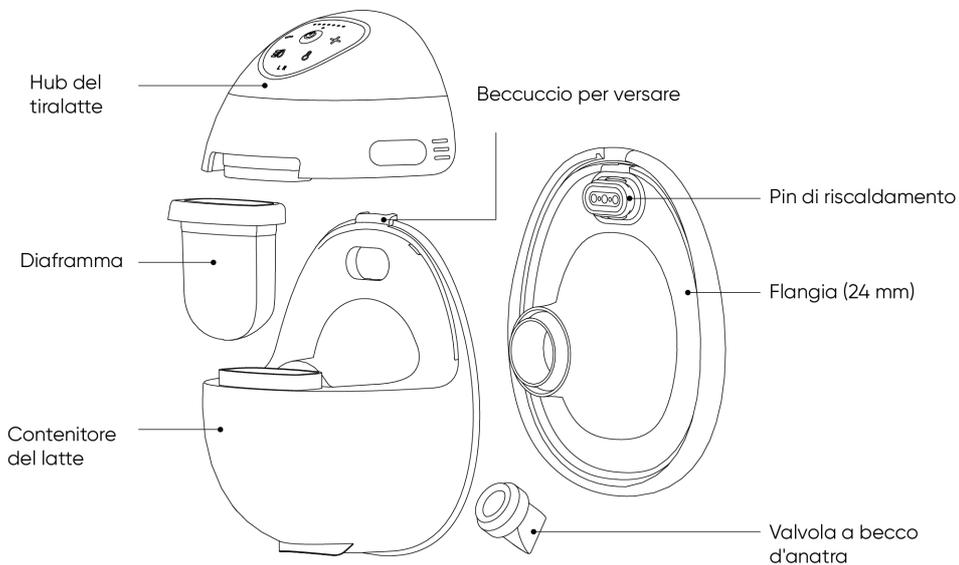

Cavi di ricarica x2




Scheda di misurazione del capezzolo

## Carica

Utilizza un cavo di ricarica USB-C (incluso) e un adattatore da 5 V/1 A o superiore (non incluso) per caricare i tiralatte.

### 💡 Perché il mio hub della pompa non si avvia?


Se riscontri un mozzo della pompa che non funziona, tieni premuto il pulsante di accensione del mozzo della pompa per 12 secondi per reimpostarlo e verifica se si accende.

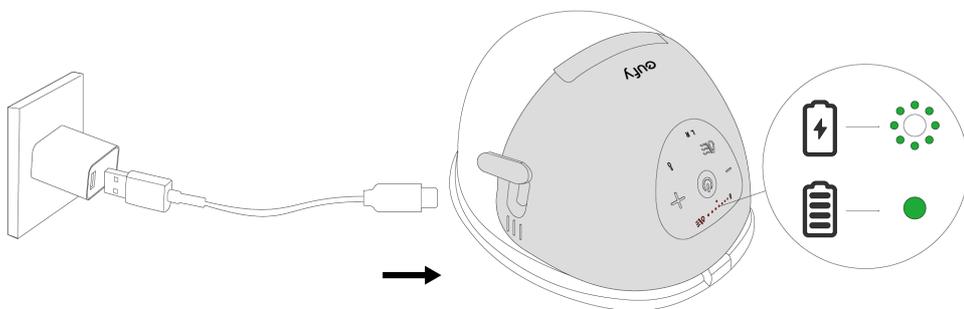


## Smontaggio

1. Passaggio 1: Tieni il mozzo della pompa con una mano e usa il pollice dell'altra mano per tirare verso l'esterno il bordo del contenitore vicino al beccuccio per rilasciare il mozzo della pompa dal beccuccio. (Evitare di tirare la flangia.)


Passaggio 2: Sollevare l'hub del tiralatte.

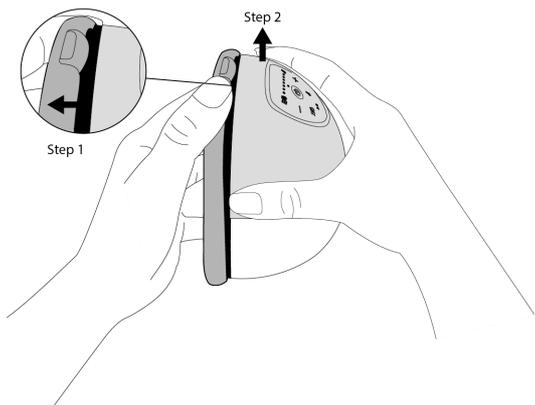


2. Rimuovere il diaframma dalla scanalatura.

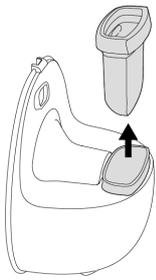

3. Srotolare l'anello esterno della flangia, estrarre i perni di riscaldamento dalla tacca ovale, quindi estrarre l'intera flangia.

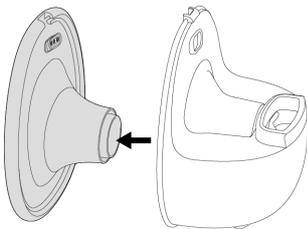

4. Far scattare la valvola a becco d'anatra con il dito per rimuoverla.

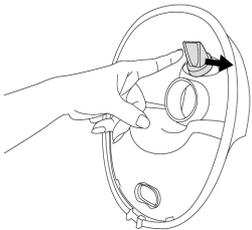

## Pulizia e sterilizzazione

- Prima dell'uso iniziale: Sterilizzare tutte le parti lavabili bollendo per un massimo di 5 minuti, mescolando costantemente per evitare che le parti si attacchino al contenitore e si sciolgano. In alternativa, sterilizzare le parti con il vapore per un massimo di 5 minuti.
- Pulizia quotidiana: sciacquare tutte le parti lavabili con acqua calda e sapone, quindi asciugarle all'aria. Se necessario, sterilizzarle utilizzando gli stessi metodi adottati per la pulizia iniziale.
- Durata delle parti lavabili: La durata stimata delle parti lavabili è di 1-3 mesi, e la durata effettiva varierà in base all'uso e alla frequenza di sterilizzazione. Sostituiscili se noti una diminuzione dell'aspirazione e delle prestazioni (in particolare la valvola a becco d'anatra) o se li hai conservati troppo a lungo quando pianifichi di usarli per il tuo prossimo bambino.

**Non utilizzare un forno a microonde per sterilizzare.**



Tutte le parti lavabili (eccetto il mozzo della pompa) possono essere sterilizzate come segue.

- ⚠ **Mantieni sempre il mozzo della pompa asciutto e pulito dopo ogni sessione di pompaggio. Se si versa del latte sul mozzo della pompa, pulirlo con un panno asciutto per garantire una carica corretta.**

Lavastoviglie



Pentola da cucina




Sterilizzatore per Biberon




## Assemblaggio


1. Tenere il fondo del contenitore verso l'alto, inserire la valvola a becco d'anatra nel piccolo foro all'interno del contenitore con il pollice e l'indice e scuoterla per accertarsi che non cada.

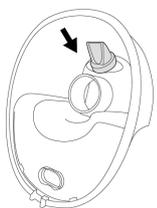


2. Spingere la flangia sul contenitore, assicurandosi che i perni riscaldanti siano saldamente inseriti nella tacca ovale. Avvolgere l'anello esterno per garantire che sia ben sigillato e prevenire la fuoriuscita di latte.

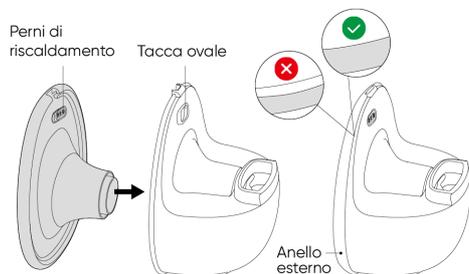


3. Premere fermamente dietro i pin di riscaldamento per l'estensione completa. Il riscaldamento potrebbe non funzionare correttamente se non completamente esteso.

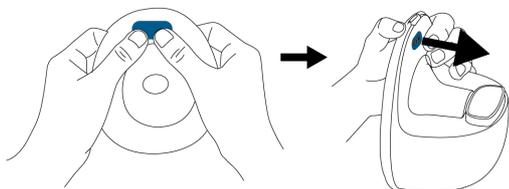

4. Inserire il diaframma nella scanalatura del contenitore, con il lato concavo del diaframma rivolto verso il lato con la flangia.

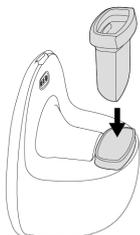


5. Installare l'hub del tiralatte sulla parte superiore del contenitore, premendo con decisione per sigillare lo spazio tra l'hub del tiralatte e la membrana.

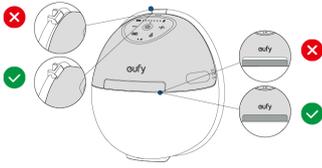

Il meccanismo di bloccaggio tra l'hub del tiralatte e il beccuccio di versamento garantisce un'aspirazione e un riscaldamento affidabili.

6. Per garantire una corretta vestibilità, utilizzare la Scheda di Misurazione del capezzolo per selezionare un inserto di dimensioni appropriato e posizionare l'inserto nella galleria della flangia.

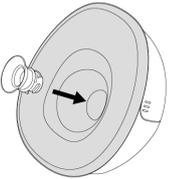


Gli inserti di dimensioni sono venduti separatamente presso <https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>


## Indossare

- Due criteri aiuteranno a determinare se il tiralatte è posizionato correttamente:
- Se si avverte un'aspirazione notevole sufficiente per estrarre il latte;
  - Se è comodo da indossare.
- Se la posizione in cui viene indossato non soddisfa nessuno di questi criteri, è necessario regolare la posizione del tiralatte.
- L'adattamento del corpo a un nuovo tiralatte richiede del tempo, quindi non ci si deve scoraggiare se inizialmente i risultati non sono soddisfacenti.**

1. Piegarsi leggermente in avanti per accertarsi che il capezzolo sia al centro del tunnel della flangia. Il tiralatte dovrebbe essere appoggiato saldamente al seno.

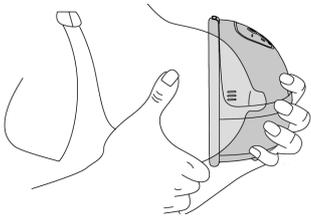

2. Utilizzare un reggiseno da allattamento a copertura totale con patta per creare una tenuta ermetica tra il seno e la flangia.

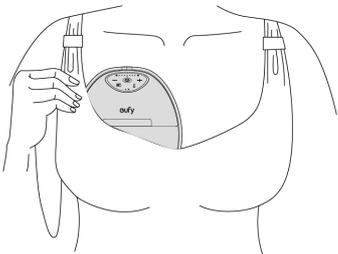

## Utilizzo

**Per prevenire le perdite:**

- Al termine del montaggio verificare nuovamente che l'anello esterno della flangia sia perfettamente sigillato.
- Accertarsi che il capezzolo sia al centro del tunnel della flangia e usare un reggiseno da allattamento a copertura totale per creare una tenuta ermetica tra il seno e la flangia.
- Non inclinarsi all'indietro durante l'estrazione. Al termine della seduta piegarsi in avanti per rimuovere il tiralatte.

**Non riesci a sentire l'aspirazione o hai zero o pochissima uscita?**

- Ispezionare la valvola a becco d'anatra e il diaframma per individuare eventuali danni, tra cui crepe, scheggiature, fori o strappi. Se una parte è danneggiata, smettere di utilizzarla e acquistare una parte sostitutiva.
- Verificare che il montaggio sia corretto e che i quattro pezzi (valvola a becco d'anatra, tunnel della flangia, membrana e hub del tiralatte) siano perfettamente sigillati.
- Regolare la posizione, accertarsi che il capezzolo sia al centro del tunnel della flangia, che il tiralatte sia sigillato al seno e che si avverta un'aspirazione notevole.
- Provare a utilizzare flangia o inserto di dimensioni diverse.
- Prova diverse aspirazioni e ritmi.

**Per garantire il corretto riscaldamento:**

- Premere i perni riscaldanti saldamente nella tacca ovale del contenitore.
- Sigillare lo spazio tra l'hub del tiralatte e la membrana.
- Individuare le impostazioni di calore e la durata più adatte che non provochino irritazioni alla pelle.

**Comandi a pulsante**


	Premere e tenere premuto per 2 secondi	Accendere/spegnere il tiralatte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tiralatte si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di estrazione o 10 minuti di pausa.</li> </ul>
	Premere	Pausa/Continua
	Premere	Passare dalla modalità di stimolazione alla modalità di espressione e viceversa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di stimolazione: In questa modalità, il tiralatte inizia con un breve e rapido schema di suzione per far iniziare il flusso del latte.</li> <li>• Modalità Espressione: In questa modalità, il tiralatte inizia con un modello di suzione lenta per l'estrazione del latte, succhiando più profondamente e più lentamente.</li> </ul>
	Premere	Accendere/spegnere il riscaldamento
	Premere	Aumenta/diminuisce il livello di aspirazione/calore (Per regolare il livello di calore, premere prima il pulsante di riscaldamento.)
	Tenere premuti contemporaneamente per 2 secondi	Associazione L/R nell'app

**Guida agli indicatori luminosi**

	Rosso fisso	Livello della batteria <20%
	Rosso lampeggiante	Livello della batteria <10%
	Bianco	In modalità stimolazione/espressione
	Arancione fisso	In modalità riscaldamento
	Arancione lampeggiante	Anomalia di riscaldamento (Rimontare la flangia e l'hub del tiralatte per garantire che i perni di riscaldamento siano posizionati correttamente.)
	da 1 a 7 Indicatori bianco/arancione	Livello di aspirazione: Da 1 a 7 Livello di calore: da 1 a 3
<b>L R</b>	Indicatore L/R bianco	Lato sinistro/destro accoppiato nell'app


## Trasferimento del latte

1. Mettere in pausa o spegnere il tiralatte. Piegarsi in avanti quando si estrae il tiralatte per evitare perdite.

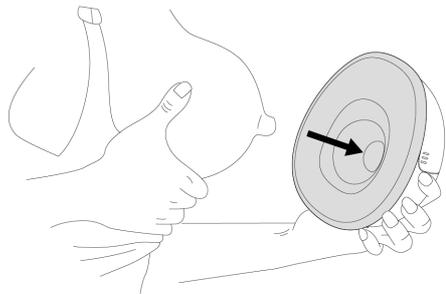


2. Rimuovere il mozzo della pompa dal contenitore. Consultare il passaggio 1 di disassemblaggio.


⚠ Per evitare perdite, prima di trasferire il latte evitare di smontare qualsiasi parte (incluso il diaframma), ad eccezione dell'hub del tiralatte.

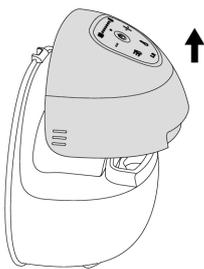

3. Lasciare il contenitore sul tavolo pronto per il trasferimento.

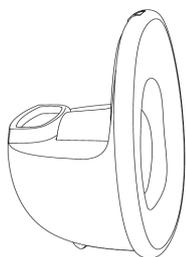

4. Inclinare il contenitore con la flangia verso l'alto per versare il latte. Quando il beccuccio è rivolto verso il basso, inclinarlo ulteriormente per svuotarlo completamente. Infine, rimuovere il diaframma per raccogliere l'eventuale latte intrappolato sotto di esso.

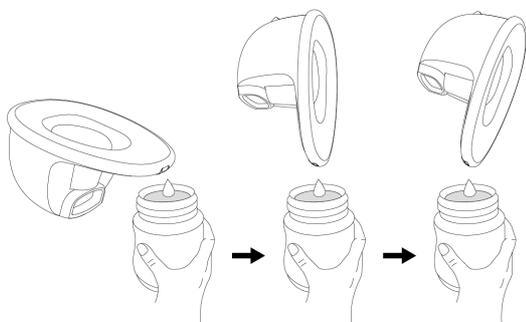

## Scaricare l'App (Opzionale)

Scaricare e installare l'app eufy Baby, quindi accedere o creare un account. Segui le istruzioni in-app per aggiungere questo dispositivo e completare la configurazione.

Per migliorare l'esperienza di utilizzo dei prodotti eufy, l'attuale app eufy Baby sarà sostituita dall'app eufy nel 2025.



## Assistenza Clienti

 Garanzia limitata di 12 mesi sull'hub del tiralatte Garanzia limitata di 3 mesi sulle parti lavabili

 (US/CA) +1 (800) 988 7973  
(UK) +44 (0) 1604 936200  
(DE) +49 (0) 69 9579 7960  
(中国) +86 400 0550 036  
(日本) 03 4455 7823  
(AU) +61 3 8331 4800  
(Egypt) +20 8000000826  
(UAE) +971 8000320817  
(Kuwait) +965 22069086  
(KSA) +966 8008500030

 [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com)

 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial