


Overzicht borstkolf



Accessoires omvatten ook:

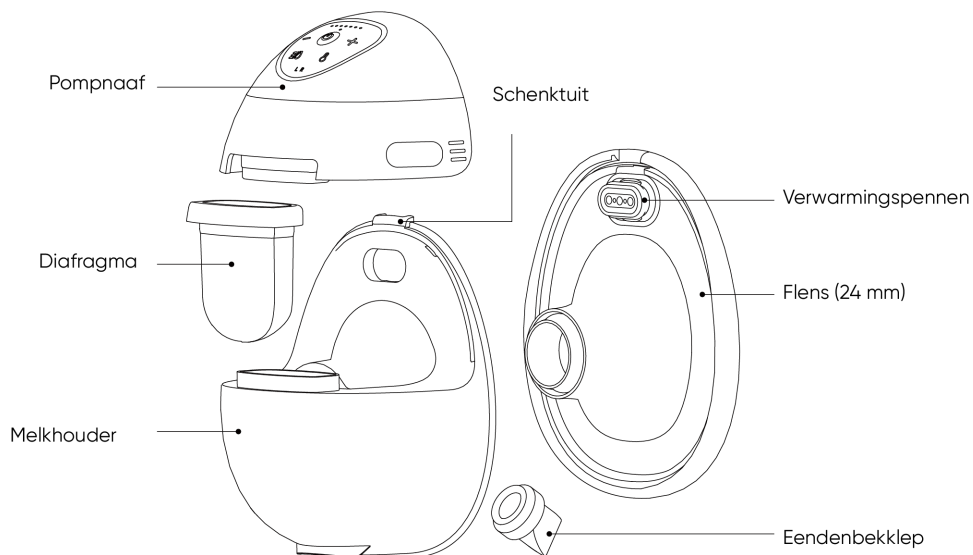


Opladen

Gebruik een USB-C-oplaadkabel (meegeleverd) en een adapter van 5V/1A of hoger (niet meegeleverd) om uw borstkolven op te laden.



Waarom start mijn pomphub niet op?


Als u een pomphub tegenkomt die niet werkt, houd dan de aan/uit-knop van de pomphub 12 seconden ingedrukt om deze te resetten en te controleren of hij wordt ingeschakeld.

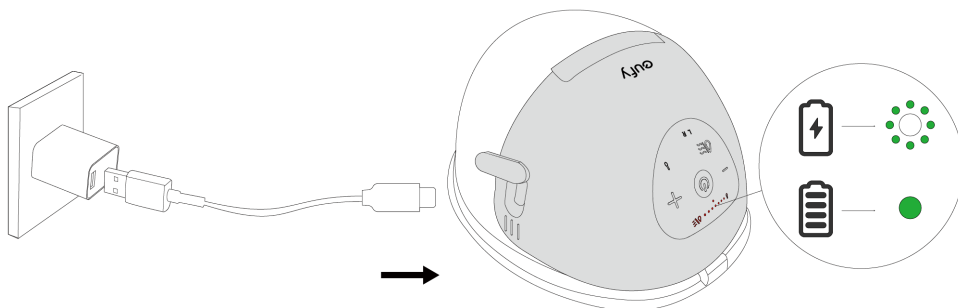


Demonteren

1. Stap 1: Houd de pomphub met één hand vast en gebruik de duim van de andere hand om de rand van de container bij de tuit naar buiten te trekken om de pomphub van de tuit los te maken. (Trek niet aan de flens.)


Stap 2: Til de pompnaaf.

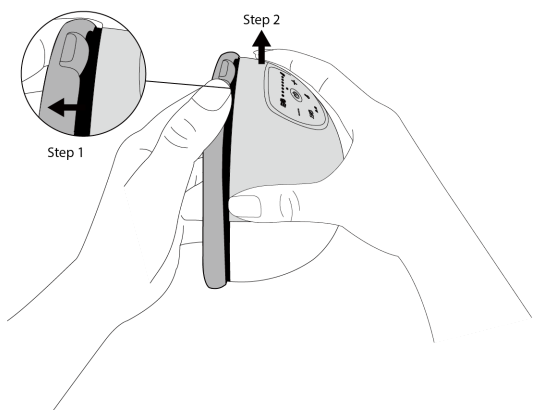


2. Verwijder het membraan uit de groef.

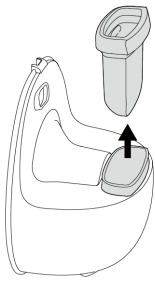

3. Wikkel de buitenste ring van de flens los, trek de verwarmingspinnen uit de ovale inkeping en trek vervolgens de hele flens naar buiten.

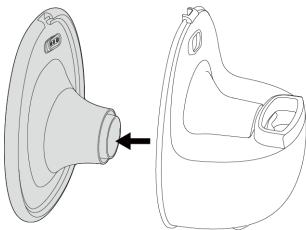

4. Tik met je vinger tegen de eendenbekklep om deze te verwijderen.

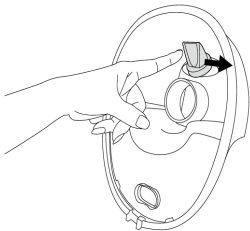

Reinigen en steriliseren

- Voor eerste gebruik: steriliseer alle wasbare onderdelen door ze tot 5 minuten te koken, terwijl je voortdurend roert om te voorkomen dat de onderdelen aan de container blijven kleven en smelten. U kunt ook maximaal 5 minuten met stoom steriliseren.
- Dagelijkse reiniging: Spoel alle wasbare onderdelen af met warm zeepsop en laat ze aan de lucht drogen. Steriliseer indien nodig op dezelfde manier als bij de eerste reiniging.
- Levensduur van wasbare onderdelen: De geschatte levensduur van de wasbare onderdelen is 1-3 maanden, en de werkelijke levensduur zal variëren afhankelijk van gebruik en sterilisatiefrequentie. Vervang ze als je een vermindering in zuigkracht en prestaties opmerkt (vooral de eendklep), of als je ze te lang hebt opgeslagen wanneer je van plan bent te kolven voor je volgende kind.

Gebruik geen magnetron om te steriliseren.



Alle wasbare onderdelen (behalve de pomphub) kunnen als volgt worden gesteriliseerd.

⚠ Houd de pomphub altijd droog en schoon na elke pompbeurt. Als er melk op de pomphaaf wordt gemorst, veeg deze dan schoon met een droge doek om ervoor te zorgen dat het goed oplaadt.

Vaatwasser



Kookpot




Flessensterilisator voor baby's




Montage


1. Houd de bodem van de houder omhoog, steek de eendenbekklep met duim en wijsvinger in het kleine gaatje aan de binnenkant van de houder en tik er tegenaan zodat deze er niet uitvalt.

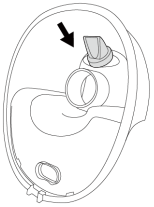


2. Duw de flens op de container en zorg ervoor dat de verwarmingspennen stevig in de ovale inkeping worden gedrukt. Wikkel de buitenring om ervoor te zorgen dat deze goed is afgesloten om melklekken te voorkomen.

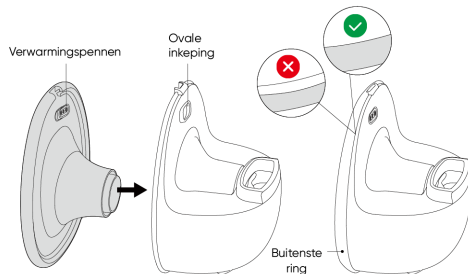


3. Druk stevig achter de verwarmingspennen voor volledige uittrekking. Verwarming kan falen als deze niet volledig uitgeschoven is.

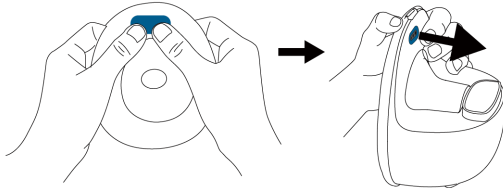

4. Plaats het diafragma in de groef van de container, met de holle kant van het diafragma naar de flenszijde gericht.

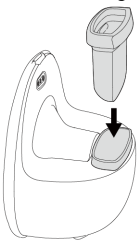


5. Installeer de pompnaaf op de bovenkant van de houder en druk stevig aan om de opening tussen de pompnaaf en het membraan af te dichten.

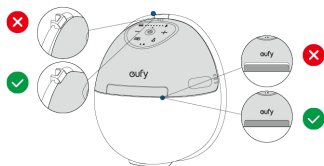

⚡ Het vergrendelingsmechanisme tussen de pompnaaf en de schenktuit zorgt voor betrouwbare aanzuiging en verwarming.

6. Om een goede pasvorm te garanderen, gebruik de Tepel meetkaart om een geschikte maat inzetstuk te kiezen en plaats het maat inzetstuk in de flens tunnel.

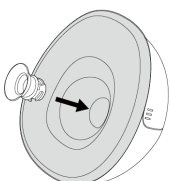


⚡ Formaat Inzetten worden apart verkocht.
<https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>


Dragen

- ⚡ **Twee criteria helpen je bepalen of de borstkolf correct is geplaatst:**
- Of je nu een merkbare zuigkracht voelt die melk naar buiten kan trekken;
 - Of het comfortabel is om te dragen.
- Als de draagpositie niet aan een van deze criteria voldoet, moet je de positie van de pomp aanpassen.
- Het duurt enige tijd voordat je lichaam zich heeft aangepast aan een nieuwe pomp, dus wees niet ontmoedigd als de resultaten in het begin niet goed zijn.**

1. Leun iets naar voren om er zeker van te zijn dat je tepel gecentreerd is in de flenstunnel. De borstkolf moet stevig tegen je borst aan zitten.

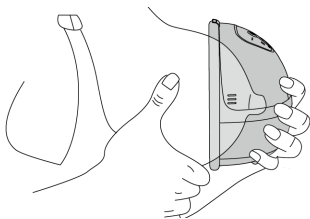

2. Gebruik een voedingsbeha met volledige dekking en een flap om een goede afsluiting tussen je borsten en de flens te creëren.

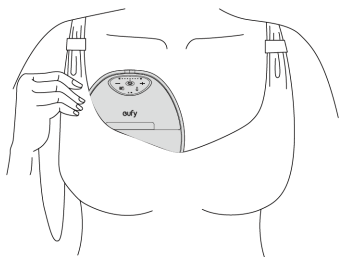

Gebruik

**Om lekkage te voorkomen:**

- Ben je klaar met de montage, controleer dan opnieuw of de buitenring van de flens perfect afgedicht is.
- Zorg ervoor dat je tepel zich in het midden van de flenstunnel bevindt en gebruik een volledig bedekkende voedingsbeha om een goede afsluiting tussen je borsten en de flens te creëren.
- Leun niet achterover tijdens het pompen. Aan het einde van een sessie leun je naar voren om de pomp te verwijderen.

Geen zuigkracht of helemaal geen of zeer weinig output?

- Inspecteer het eendenbekventiel en het membraan op beschadigingen, zoals barsten, spanen, gaten of scheuren. Als een onderdeel beschadigd is, stop dan met het gebruik en koop een vervangend onderdeel.
- Controleer of de montage correct is en of de vier delen (eendenbekklep, flenstunnel, membraan en pompnaaf) perfect afgedicht zijn.
- Pas de draagpositie aan, zorg ervoor dat de tepel zich in het midden van de flenstunnel bevindt, dat de pomp goed op je borst is aangesloten en dat je merkbare zuigkracht voelt.
- Experimenteer met verschillende maten flenzen en inzetstukken.
- Probeer verschillende zuigbewegingen en ritmes.

**Om een goede verwarming te garanderen:**


- Druk de verwarmingspinnen stevig in de ovale inkeping van de container.
- Dicht de opening tussen de pompnaaf en het membraan af.
- Identificeer de warmte-instellingen en de duur die het beste bij je passen zonder je huid te irriteren.

Knoppen		
	Druk en houd 2 seconden vast	Zet de borstkolf aan/uit • De borstkolf wordt automatisch uitgeschakeld na 30 minuten kolven of 10 minuten pauzeren.
	Druk op de knop	Pauzeren / Doorgaan
	Druk op de knop	Schakel tussen de stimulatiemodus en de expressiemodus • Stimulatiemodus: In deze modus begint de borstkolf met een snelle en korte zuigpatroon om uw melkstroom op gang te brengen. • Expressiemodus: In deze modus begint de borstkolf met een langzaam zuigpatroon voor melkexpressie, zuigend dieper en langzamer.
	Druk op de knop	Verwarming in-/uitschakelen
	Druk op de knop	Verhoog/verlaag het zuig-/warmteniveau (Om het warmteniveau aan te passen, druk je eerst op de verwarmingsknop.)
	Druk in en houd 2 seconden vast	L/R-koppeling in de app

Lichtgids		
	Brandt rood	Batterijniveau <20%
	Knipperend rood	Batterijniveau <10%
	Wit	In stimulatie-/expressiemodus
	Stabiël oranje	In verwarmingsmodus
	Knipperend oranje	Uitzonderlijk warm (Monteer de flens en de pompnaaf opnieuw om ervoor te zorgen dat de verwarmingspennen goed op hun plaats zitten.)
	1 tot 7 witte/oranje lampjes	Zuigniveau: 1 tot 7 Verwarmingsniveau: 1 tot 3
L R	Witte L/R-indicator	Links/rechts gekoppeld in de app


Melk overhevelen

1. Pauzeer of schakel de borstkolf uit. Leun naar voren wanneer je de pomp eruit haalt om lekkage te voorkomen.

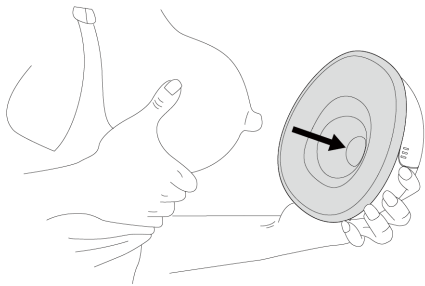


2. Verwijder de pomphub uit de container. Zie stap 1 'Demonteren'.


⚠️ Demonteer om lekkage te voorkomen behalve de pomp geen andere onderdelen (waaronder het membraam) voordat u gaat kolven.

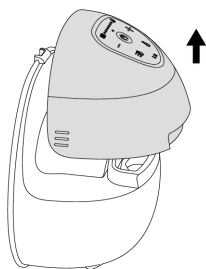

3. Laat de houder op de tafel staan, klaar voor overdracht.

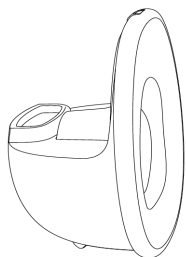

4. Kantel de houder met de flens omhoog om melk uit te schenken. Wanneer de schenktuit naar beneden is gericht, kantel je de houder verder om deze volledig te legen. Verwijder ten slotte zo nodig het membraam om de melk die eronder zit op te vangen.

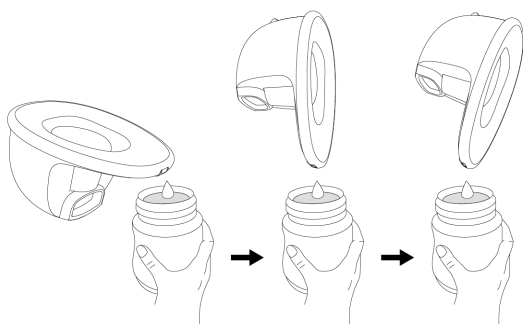

Het downloaden van de app (Optioneel)

Download en installeer de eufy Baby-app en log vervolgens in of maak een account aan. Volg de in-app instructies om dit apparaat toe te voegen en de installatie te voltooien.

Om de ervaring met het gebruik van eufy-producten te verbeteren, zal de bestaande eufy Baby-app in 2025 worden vervangen door de eufy-app.





12 maanden beperkte garantie op de pompnaaf 3 maanden beperkte garantie op wasbare onderdelen



(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com



[@EufyOfficial](#)



[@EufyOfficial](#)



[@EufyOfficial](#)