


Visão geral da bomba tira-leite



Os acessórios também incluem:

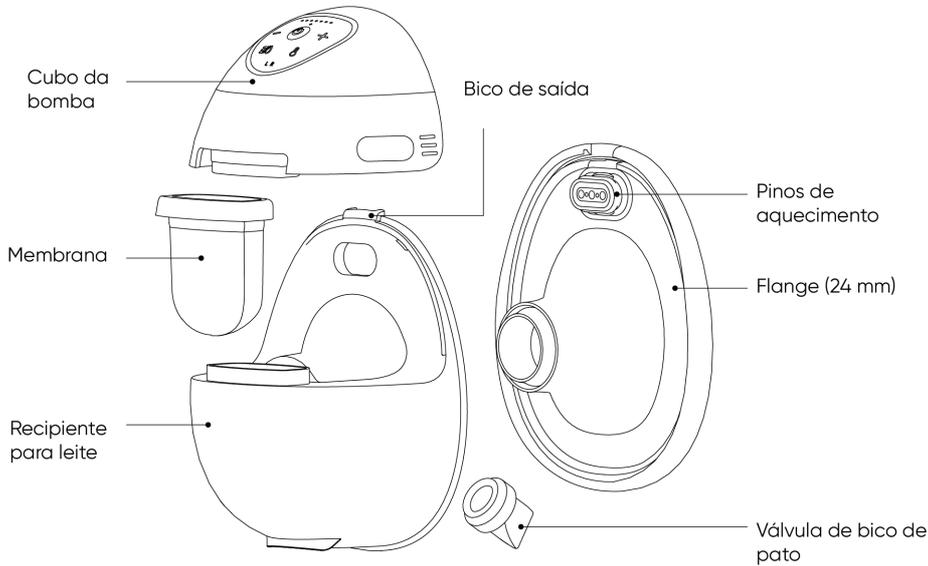

Cabos de Carregamento x2



Cartão de medição do mamilo


Carregamento

Utilize um cabo de carregamento USB-C (incluído) e um adaptador 5 V/1 A ou superior (não incluído) para carregar as bombas tira-leite.



Por que meu hub de bomba não está inicializando?


Se você encontrar um hub de bomba que não funciona, pressione e segure o botão de energia no hub de bomba por 12 segundos para redefinir e ver se ele liga.

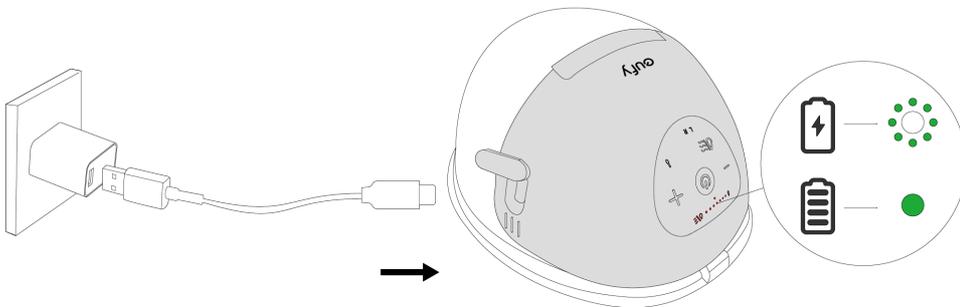


Desmontagem

1. Passo 1: Segure o hub da bomba com uma mão e use o polegar da outra mão para puxar a borda do recipiente próximo ao bico para fora, liberando o hub da bomba do bico. (Evite puxar a flange.)


Passo 2: Levante o cubo da bomba.

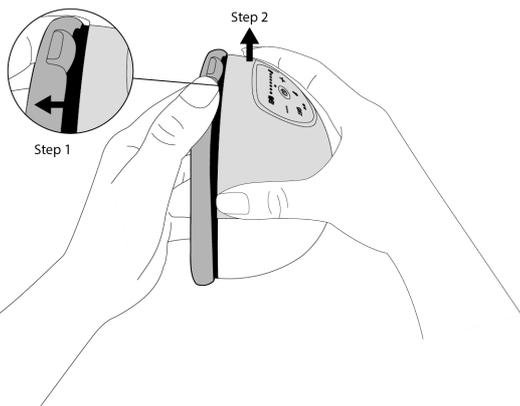


2. Retire a membrana da ranhura.

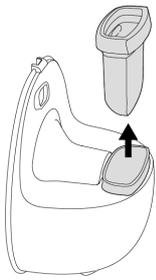

3. Desenrole o anel exterior da flange, puxe os pinos de aquecimento para fora do entalhe oval e, em seguida, puxe toda a flange para fora.

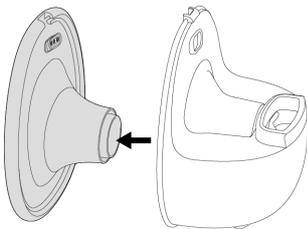

4. Desencaixe a válvula de bico de pato com o dedo para a retirar.

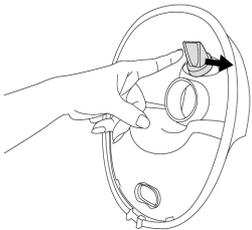

Limpeza e esterilização

- Antes do Uso Inicial: Esterilizar todas as peças laváveis fervendo-as por até 5 minutos, mexendo constantemente para evitar que as peças grudem no recipiente e derretam. Em alternativa, esterilize a vapor durante um máximo de 5 minutos.
- Limpeza diária: enxague todas as peças laváveis com água morna e sabão e deixe secar ao ar. Se for necessário, utilize os mesmos métodos de esterilização da limpeza inicial.
- Vida útil das peças laváveis: A vida útil estimada das peças laváveis é de 1-3 meses, e a vida útil real variará conforme o uso e a frequência de esterilização. Substitua-os se notar uma diminuição na sucção e desempenho (particularmente a válvula de pato), ou se os tiver guardado por muito tempo ao planejar bombear para o seu próximo filho.


Não utilize um micro-ondas para esterilizar.



Todas as partes laváveis (exceto o cubo da bomba) podem ser esterilizadas da seguinte forma.

- **Sempre mantenha o hub da bomba seco e limpo após cada sessão de bombeamento. Se o leite derramar no hub da bomba, limpe-o com um pano seco para garantir o carregamento adequado.**

Lava-louças

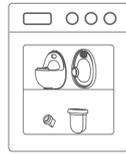

Panela de Cozinha




Esterilizador de Mamadeiras




Montagem


1. Segure o fundo do recipiente para cima, insira a válvula de bico de pato no pequeno orifício no interior do recipiente com o polegar e o indicador e agite para garantir que não cai.

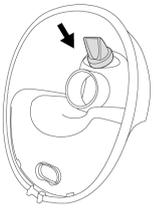


2. Empurre a flange no recipiente, certificando-se de que os pinos de aquecimento estejam firmemente inseridos na ranhura oval. Envolve o anel externo para garantir que esteja devidamente vedado e evitar vazamento de leite.

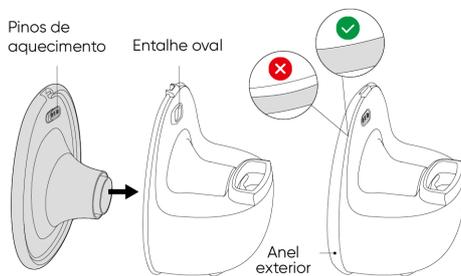


3. Pressione firmemente atrás dos pinos de aquecimento para a extensão completa. O aquecimento pode falhar se não estiver totalmente estendido.

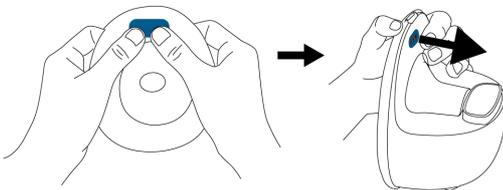

4. Insira o diafragma na ranhura do recipiente, com o lado côncavo do diafragma voltado para o lado da flange.

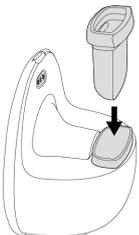


5. Instale o cubo da bomba na parte superior do recipiente, pressionando firmemente para selar o espaço entre o cubo da bomba e a membrana.

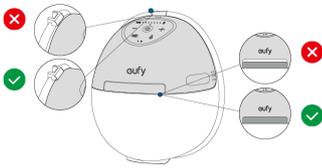

💡 O mecanismo de bloqueio entre o cubo da bomba e o bico de saída garante uma sucção e um aquecimento fiáveis.

6. Para garantir um ajuste adequado, use o Cartão de Medição de mamilo para selecionar um insert apropriado e coloque o insert no túnel da flange.

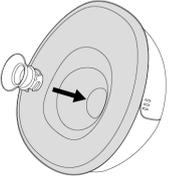

💡 Os inserts de dimensionamento são vendidos separadamente em <https://www.eufy.com/collections/acessorios-para-bombas-de-leite>

Utilização


💡 **Dois critérios ajudarão a determinar se a bomba tira-leite está corretamente posicionada:**

- Se sentir uma sucção perceptível capaz de extrair leite
- Se é confortável de usar.


Se a posição de uso não corresponder a nenhum destes critérios, tem de ajustar a posição da bomba.

O seu corpo demora algum tempo a adaptar-se a uma nova bomba, por isso não desanime se os resultados não forem bons logo no início.

1. Incline-se ligeiramente para a frente para se certificar de que o mamilo está centrado com o túnel da flange. A bomba tira-leite deve estar firmemente encostada ao seio.

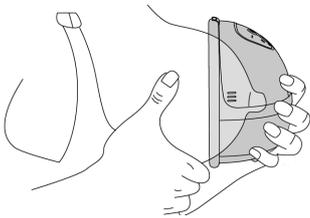

2. Utilize um soutien de amamentação de cobertura total com uma aba para criar uma vedação apertada entre os seus seios e a flange.

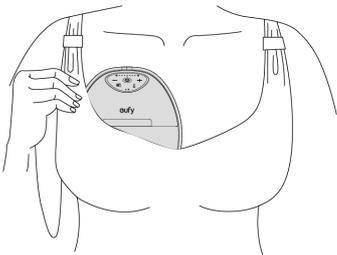

Usando

**Para evitar vazamentos:**

- Quando terminar a montagem, verifique novamente se o anel exterior da flange está perfeitamente vedado.
- Certifique-se de que o mamilo fica no centro do túnel da flange e utilize um soutien de amamentação de cobertura total para criar uma vedação apertada entre os seus seios e a flange.
- Não se incline para trás enquanto bombeia. No final de uma sessão, incline-se para a frente para retirar a bomba.

Não sente sucção ou tem zero ou muito pouca saída?

- Inspeccione a válvula de bico de pato e a membrana para verificar se têm danos, como fissuras, lascas, furos ou rasgões. Se uma peça estiver danificada, deixe de utilizá-la e compre uma peça de substituição.
- Verifique se a montagem está correta e se as quatro peças (válvula de bico de pato, túnel de flange, membrana e cubo da bomba) estão perfeitamente seladas.
- Ajuste a posição de utilização, certifique-se de que o mamilo está no centro do túnel da flange, que a bomba está selada ao seu seio e que consegue sentir uma sucção perceptível.
- Experimente diferentes tamanhos de flanges ou inserções.
- Experimente diferentes sucções e ritmos.

**Para garantir um aquecimento adequado:**

- Pressione firmemente os pinos de aquecimento no entalhe oval do recipiente.
- Vede o espaço entre o cubo da bomba e a membrana.
- Identifique as definições de calor e a duração que melhor se adequam a si sem irritar a sua pele.

Controlos de botões


	Premir e manter premido durante 2 segundos	Ligar/desligar a bomba tira-leite <ul style="list-style-type: none"> • A bomba tira-leite desligará automaticamente após trabalhar por 30 minutos ou pausar por 10 minutos.
	Premir	Pausar/Continuar
	Premir	Alternar entre o modo de estimulação e o modo de expressão <ul style="list-style-type: none"> • Modo de Estimulação: Neste modo, a bomba de mama começa com um padrão de sucção rápida e curta para fazer o leite começar a fluir. • Modo de Expressão: Neste modo, a bomba de mama começa com um padrão de sucção lento para a expressão do leite, sugando mais profundamente e mais devagar.
	Premir	Ligar/desligar o aquecimento
	Premir	Aumentar/Diminuir o nível de aspiração/calor (Para ajustar o nível de calor, prima primeiro o botão de aquecimento).
	Premir e manter premido em simultâneo durante 2 segundos	Emparelhamento E/D na aplicação

Guia de luzes

	Vermelho constante	Nível da bateria <20%
	Vermelho intermitente	Nível da bateria <10%
	Branco	No modo de estimulação/expressão
	Laranja fixo	No modo de aquecimento
	Laranja intermitente	Anomalia de aquecimento (Volte a montar a flange e o cubo da bomba para garantir que os pinos de aquecimento estão corretamente encaixados).
	1 a 7 indicadores brancos/laranja	Nível de aspiração: 1 a 7 Nível de Calor: 1 a 3
L R	Indicador E/D branco	Lado esquerdo/direito emparelhado na aplicação


Transferência de leite

1. Pause ou desligue a bomba tira-leite. Incline-se para a frente quando retirar a bomba para evitar fugas.

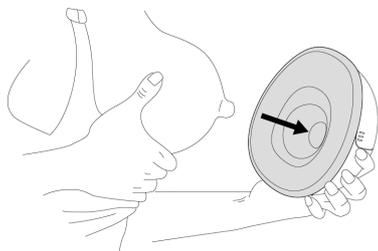


2. Remova o cubo da bomba do recipiente. Consulte o passo 1 da secção "Desmontagem".


⚠ Evite desmontar quaisquer peças (incluindo a membrana), exceto o cubo da bomba, antes de transferir o leite para evitar fugas.

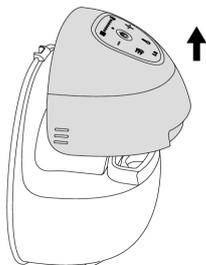

3. Deixe o recipiente sobre a mesa pronto a ser transferido.

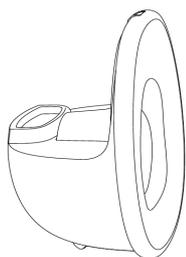

4. Incline o recipiente com a flange virada para cima para verter o leite. Quando o bico de saída estiver virado para baixo, inclinar mais para esvaziar completamente. Por fim, retire a membrana, se for necessário, para recolher o leite que ficou retido sob a membrana.

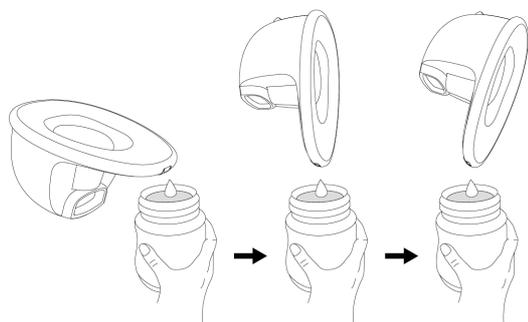

Baixando o Aplicativo (Opcional)

Descarregue e instale a aplicação eufy Baby e, em seguida, inicie sessão ou crie uma conta. Siga as instruções no aplicativo para adicionar este dispositivo e concluir a configuração.

Para melhorar a experiência de uso dos produtos eufy, o aplicativo eufy Baby existente será substituído pelo aplicativo eufy em 2025.



Serviço De Apoio Ao Cliente



Garantia limitada de 12 meses para o cubo da bomba Garantia limitada de 3 meses para as peças laváveis



(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中國) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial