



# 主机概览

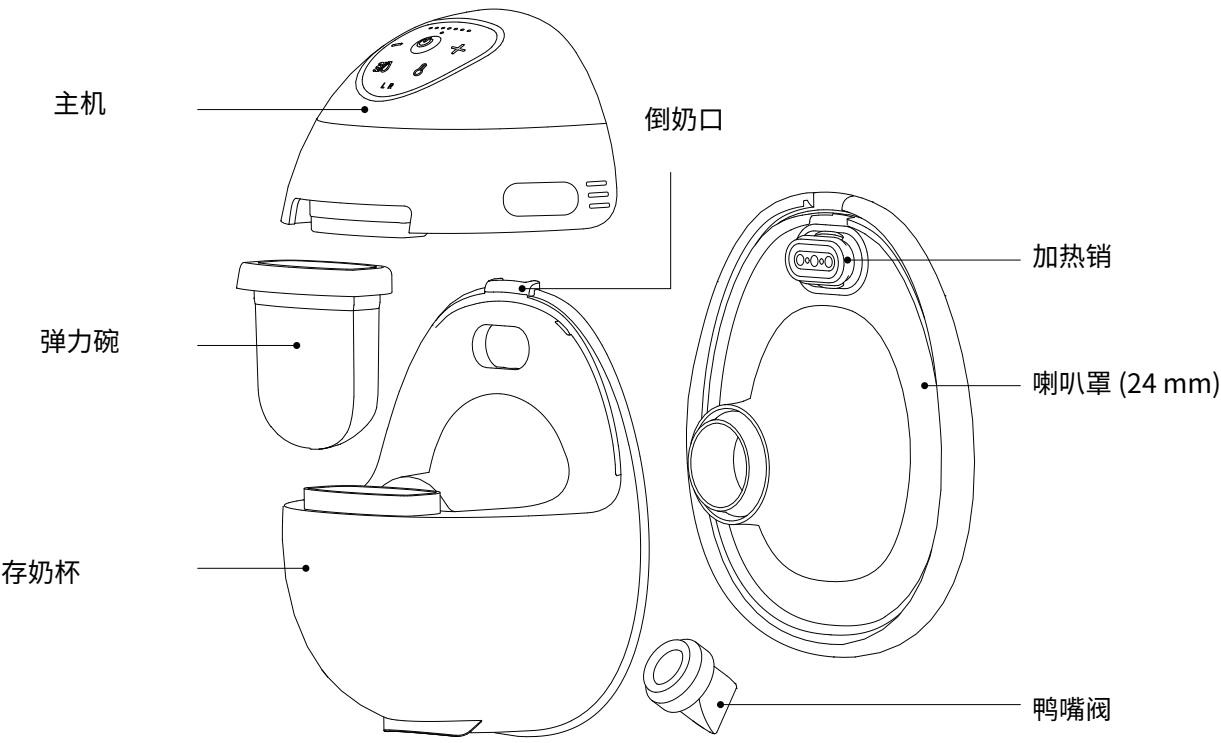

配件包含：

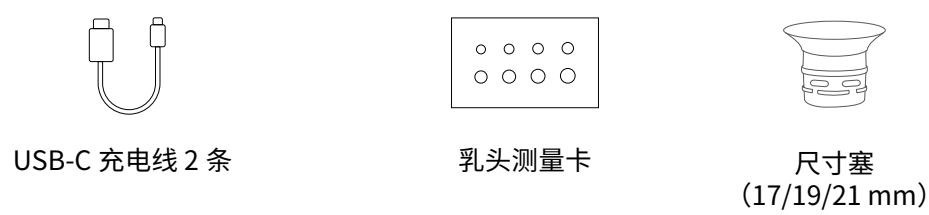


# 充电

用随附的 USB-C 充电线和一个 5V/1A 或更高功率的充电器（自备）为吸奶器充电。




为什么主机无法启动？  
如果您遇到主机无法工作的情况，请长按主机上的电源键 12 秒以重置，然后再尝试开机。

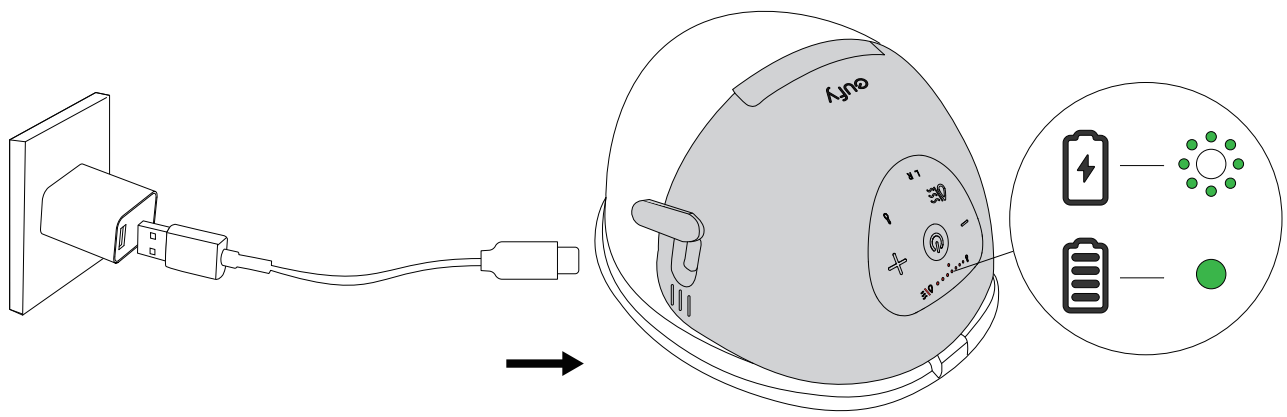


## 组装

1. 第一步：用一只手握住主机，然后用另一只手的拇指将倒奶口附近的奶瓶边缘向外拉，使主机从倒奶口脱离。（切勿拉喇叭罩。）


第二步：提起主机。

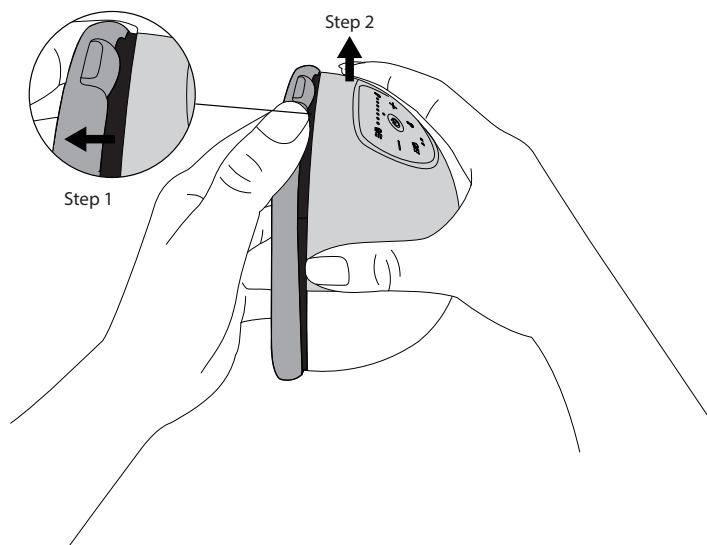


2. 从凹槽中取出弹力碗。

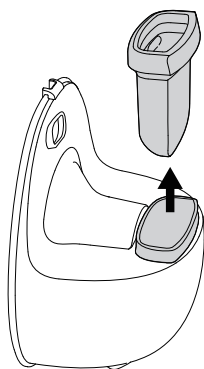

3. 打开喇叭罩外圈，将加热销从椭圆形凹槽中拉出，然后将整个喇叭罩拉出。

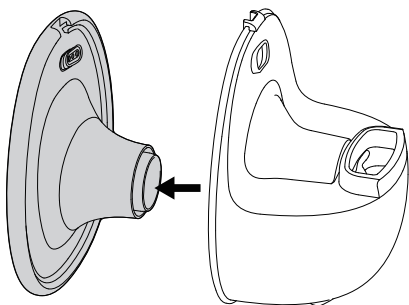

4. 用手指轻弹鸭嘴阀即可取下。

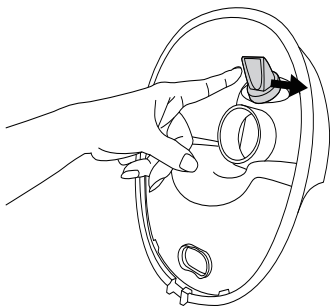

## 清洗和消毒



- 首次使用前：将所有可洗部件煮沸消毒，最长 5 分钟，且需不断搅拌，以防止部件粘住或溶化。亦可选择用蒸汽消毒，最长 5 分钟。
- 日常清洁：用温水冲洗所有可洗部件，然后晾干。如有必要，可用首次使用前的方式消毒。
- 可洗部件的使用寿命：预期使用寿命为 1-3 个月，实际使用寿命因使用和消毒频率而异。如果发现吸力和性能下降（尤其是鸭嘴阀），或因为下一个新生儿准备而存放太久，请更换新的可洗部件。

请勿使用微波炉消毒。




所有可洗部件（主机除外）均可按以下方式进行消毒。



每次吸奶过程后请务必保持主机干燥且干净。如有乳汁不慎洒在主机上，请用干布擦拭干净，以确保正常充电。

洗碗机

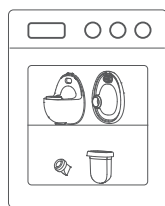

烹饪锅




婴儿奶瓶消毒器




## 组装


1. 握住奶杯底部朝上，用拇指和食指将鸭嘴阀塞入存奶杯内的小孔并轻弹，确保其不会掉出来。

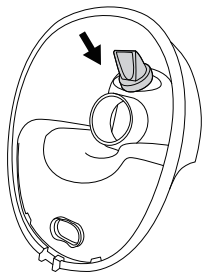


2. 将喇叭罩推到存奶杯上，确保加热销牢固并完全推入椭圆形凹槽内。裹紧外圈以确保密封严实，防止漏奶。

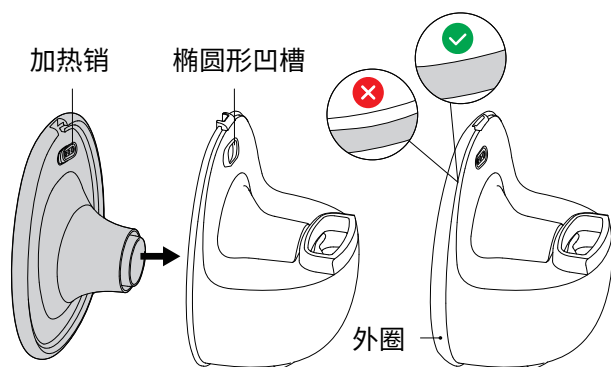


3. 用力按压加热销背面使其完全伸展。加热销接触不良可能会导致无法加热。

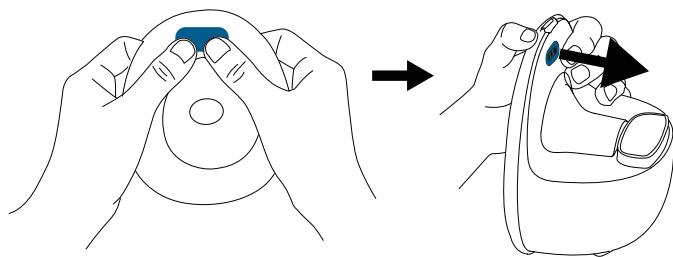

4. 将弹力碗装入存奶杯的凹槽中，弹力碗凹面朝向喇叭罩一侧。

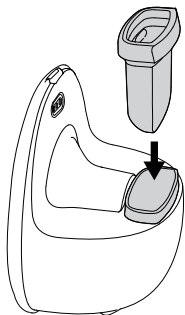


5. 将主机安装在存奶杯上部，并用力按压以密封主机和弹力碗之间的缝隙。

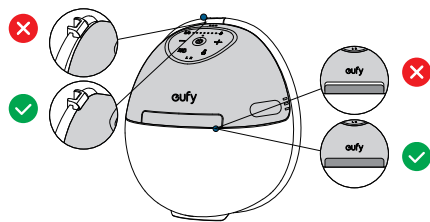

💡 主机和倒奶口之间的锁扣确保可靠的吸力和加热。

6. 为确保穿戴合适，请用乳头测量卡帮助您选择合适的尺寸塞，并将尺寸塞放入喇叭罩通道中。

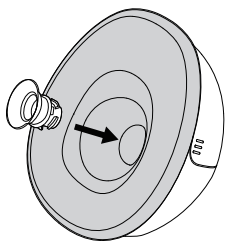

💡 您可通过安克企业微信或京东、天猫的安克官方旗舰店购买尺寸塞等配件。

## 佩戴


💡 两个标准帮助您确定吸奶器是否佩戴到位：

- 是否感觉到明显的吸力可吸出乳汁；
- 佩戴是否舒适。


如果不符合以上两个标准，则需调整吸奶器的佩戴位置。

您的身体需要一点时间来适应新的吸奶器，因此如果最初效果不佳，请不要灰心。

1. 稍微前倾，确保乳头位于喇叭罩通道的中心。吸奶器应紧贴乳房。

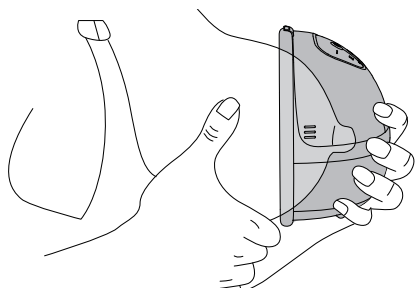

2. 使用带翻盖搭扣的全覆盖式哺乳文胸，使乳房和喇叭罩紧密贴合。

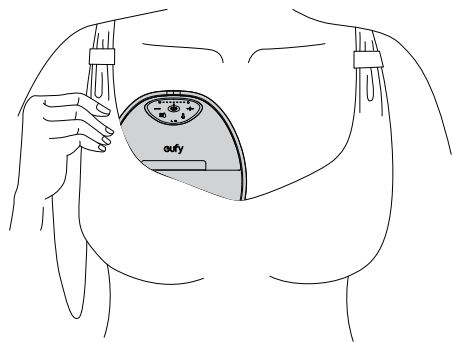

## 使用



### 为防止漏奶：

- 组装完成后，再次检查喇叭罩的外圈是否完全密封。
- 确保乳头位于喇叭罩通道的中心，并使用全覆盖型哺乳文胸使乳房紧密贴合在喇叭罩上。
- 吸奶时请勿向后倾斜。结束吸奶后，前倾身体取下吸奶器。

### 感觉不到吸力或者输出量偏少甚至为零？

- 检查鸭嘴阀和弹力碗是否有损毁，包括有裂缝、缺口、孔洞或撕裂。如果某个部件有损坏，请停止使用并购买替换件。
- 检查组装是否正确，以及四个部件（鸭嘴阀、喇叭罩通道、弹力碗、主机）是否完全贴合。
- 调整佩戴位置，确保乳头位于喇叭罩通道的中心，吸奶器贴合在乳房上，且可感觉到明显的吸力。
- 尝试使用不同尺寸的喇叭罩或尺寸塞。
- 尝试不同的吸力和韵律。



### 为确保正常加热：

- 将加热线牢固地压入椭圆形凹槽内。
- 密封主机和弹力碗之间的间隙。
- 确定最适合您的加热设定和持续时间，以免刺激皮肤。

## 按键操作

|  |          |                                                                                                                                               |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 长按 2 秒钟  | 打开 / 关闭主机 <ul style="list-style-type: none"><li>• 吸奶 30 分钟或暂停 10 分钟后，吸奶器将自动关机。</li></ul>                                                      |
|  | 按一下      | 暂停 / 继续                                                                                                                                       |
|  | 按一下      | 在泌乳模式和吸乳模式之间切换 <ul style="list-style-type: none"><li>• 泌乳模式：在此模式下，吸奶器模拟快速、短暂的吮吸动作，让乳汁开始分泌。</li><li>• 吸乳模式：在此模式下，吸奶器模拟缓慢的吮吸动作，更深但更慢。</li></ul> |
|  | 按一下      | 打开 / 关闭加热                                                                                                                                     |
|  | 按一下      | 增加 / 减少吸力 / 加热水平<br>(若要调节加热等级，请先按加热键。)                                                                                                        |
|  | 同时按住 2 秒 | 在 APP 中左 / 右配对中                                                                                                                               |


## 灯光指引

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 红灯常亮 | 电量 <20%     |
|  | 红灯闪烁 | 电量 <10%     |
|  | 白色   | 处于泌乳 / 吸乳模式 |

|                                                                                   |                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|  | 橙色灯常亮          | 处于加热模式                          |
|                                                                                   | 橙色灯闪烁          | 加热异常<br>(重新组装喇叭罩和主机，确保加热销正确对位。) |
| .....                                                                             | 1 至 7 白灯 / 橙色灯 | 吸力等级：1 至 7<br>加热等级：1 至 3        |
| L R                                                                               | L/R 白灯         | 在 APP 中左右已配对                    |


## 倒奶

1. 暂停或关机。取出吸奶器时身体前倾，防止漏奶。

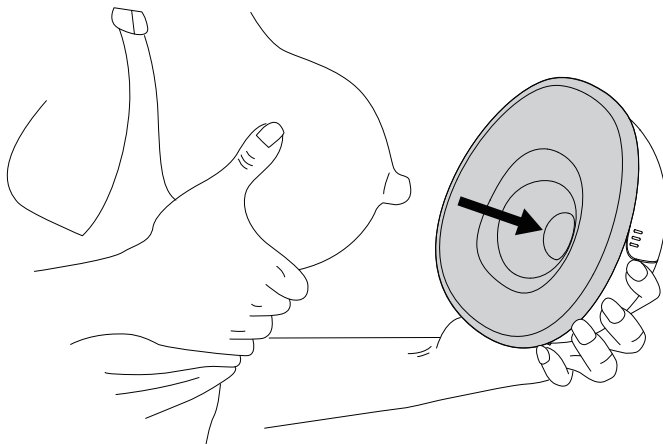


2. 从存奶杯上取出主机。参阅“拆卸”步骤 1。


 倒奶前，切勿拆卸除主机以外的任何部件（包括弹力碗），以防漏奶。

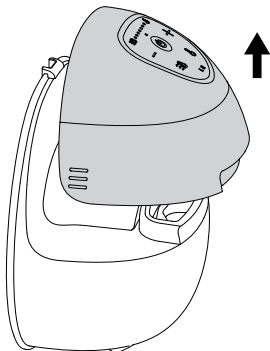

3. 将存奶杯放在桌子上，准备倒奶。

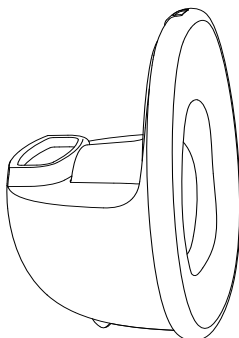

4. 将存奶杯倾斜，喇叭罩朝上，以倒出母乳。当倒奶口朝下时，进一步倾斜以完全排空。最后，如果需要，请取下弹力碗以收集其下方的任何残留母乳。

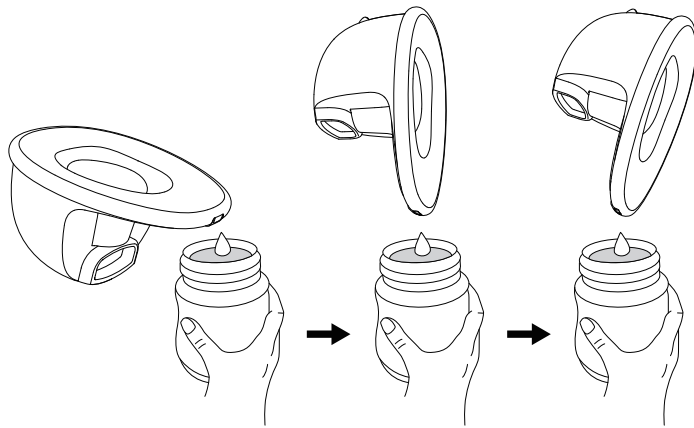

## 下载 APP (可选)

下载并安装 eufy Baby APP，然后登录或创建帐户。按照 APP 的说明绑定此设备并完成设置。



## 客户服务

🔊 主机提供 12 个月有限保修；可洗部件提供 3 个月有限保修

☎ (US/CA) +1 (800) 988 7973  
(UK) +44 (0) 1604 936200  
(DE) +49 (0) 69 9579 7960  
(中国) +86 400 0550 036  
(日本) 03 4455 7823  
(AU) +61 3 8331 4800  
(Egypt) +20 8000000826  
(UAE) +971 8000320817  
(Kuwait) +965 22069086  
(KSA) +966 8008500030

✉ support@eufy.com