

Пайдаланушы нұсқаулығы

Өнім атауы: eufy киілетін кеуде сорғышы S1
Модель: T8D02

Өнім туралы

Қораптын ішінде не?

Өнімге шолу

Бір қарағанда

Басқару түймелері

Жарық индикаторлары

Зарядтау

Бөлшектеу

Тазалау және зарарсыздандыру

Алғашқы пайдаланудан бұрын

Күнделікті пайдалану үшін

Құрастыру

Киіп жүру

Өлшеу

Қосымша өлшемдік кірістіруді пайдаланыңыз
(қалауыңызша)

Киіңіз

Қосымшасыз пайдалану

Сүт сауу

Стимуляция режимі және Сору режимі

eufy Baby қолданбасымен пайдалану

Сүтті құю

Сүтті сақтау

Ана сүтін сақтау

Сақталған сүтті беру


Техникалық қызмет көрсету

Жиі қойылатын сұрақтар

Техникалық сипаттамалар

Өндіруші

Өнім туралы

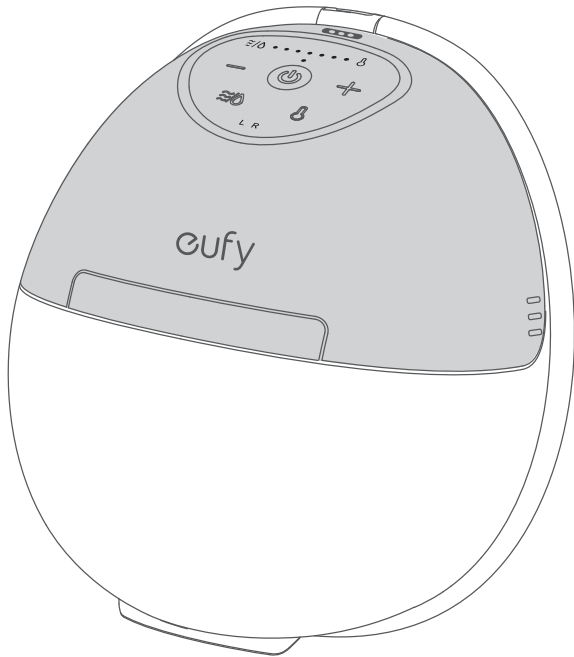

Eufy киілетін сүт сорғысы сериясы лактация кезеңіндегі әйелдерге емшектерінен сүт шығарып, жинауға арналған. Бұл сүт сорғышты eufy Baby қосымшасымен немесе онсыз қолдануға болады, ол сізге балаңыз үшін сүтті қауіпсіз, тиімді және ыңғайлы түрде шығарып, жинауға көмектеседі.



• Бұл өнім бір пайдаланушыға арналған.


ҚАУІП – Электр тогынан зақымдану қаупін азайту үшін:

- Шомылып жатқанда қолданбаңыз.
- Өнімді ваннаға немесе раковинаға құлап кетуі немесе тартылып кетуі мүмкін жерге қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
- Суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе түсірмеңіз.
- Суға түсіп кеткен өнімді алуға тырыспаңыз. Дерееу розеткадан суырыңыз.
- Әрқашан оны пайдаланбас бұрын зарядтағыштан ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ – Күйіктердің, электр тогының соғуының, өрттің немесе жеке жарақаттардың қаупін азайту үшін.

- Бұл өнімді тек осы нұсқаулықта сипатталған мақсатта ғана пайдаланыңыз. Өндіруші ұсынбаған қондырмаларды пайдаланбаңыз.
- Бұл өнімнің сымы немесе штепселі зақымдалған болса, дұрыс жұмыс істемесе, құлап немесе зақымдалған болса, немесе суға түсіп кеткен болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз. Өнімді тексеру және жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.
- Шнурды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз.
- Ұйықтап жатқанда немесе ұйқылы-ояу күйде ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ешқашан ешқандай затты ешбір тесікке немесе шлангқа тастамаңыз немесе салмаңыз.
- Сыртта қолданбаңыз немесе аэрозоль (шашыратқыш) өнімдері қолданылып жатқан немесе оттегі беріліп жатқан жерде жұмыс істемеңіз.
- Өнімді өзгертпеңіз.
- Бұл ойыншық емес, оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл жеке қолдануға арналған жеке күтім өнімі және оны басқа пайдаланушылармен бөлісуге болмайды.
- Егер тітіркену немесе жайсыздық пайда болса, фланец пен кеуде тінінің арасындағы тығыздағышты саусағыңызбен ажыратыңыз, пайдалануды тоқтатыңыз және медициналық қызметкерге жүгініңіз.
- **Өнімді 35 минуттан артық кимеңіз және қолданбаңыз. Денсаулық сақтау маманыңызбен кеңесіп, сору сеансы қанша уақытқа созылуы керектігін түсініңіз.**
- Сорғы хабын жумаңыз немесе дезинфекцияламаңыз. Тек таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Сүт сорғышты тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймаңыз. Микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.
- **Сүт контейнері мен барлық силикон бөлшектерін әр жолы 5 минуттан артық қайнатпаңыз.**
- Өнімді тым ыстық немесе тым суық ортада пайдаланбаңыз, өнімді күшті күн сәулесіне немесе ылғалды ортаға ұшыратпаңыз.
- Осы өнім мен аксессуарларға арналған қолайлы температура 0°C-40°C.
- Құрылғыны 5°C-25°C аралығындағы температурада зарядтау ұсынылады.

Қораптын ішінде не?

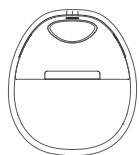


x2



x1



x6

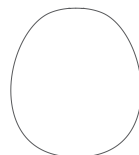


x2

Сүт сорғыштар
(24 мм фланецтер)


Магнитті
Зарядтау кабелі

Өлшемдік кірістірулер
(17/19/21 мм)


Шаң қаптамалары

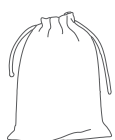


x1

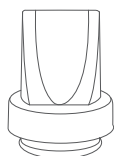

x2

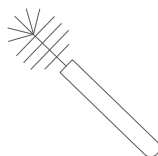

x1

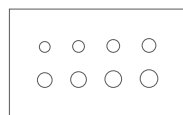

x1



x1

Сақтау
сөмкесі

Артық
Үйрек тұмсық
клапандары


Тазалау
щеткасы

Емізік
Өлшеу картасы

Қысқа
Нұсқаулық

Өнімге шолу

Бір қарағанда

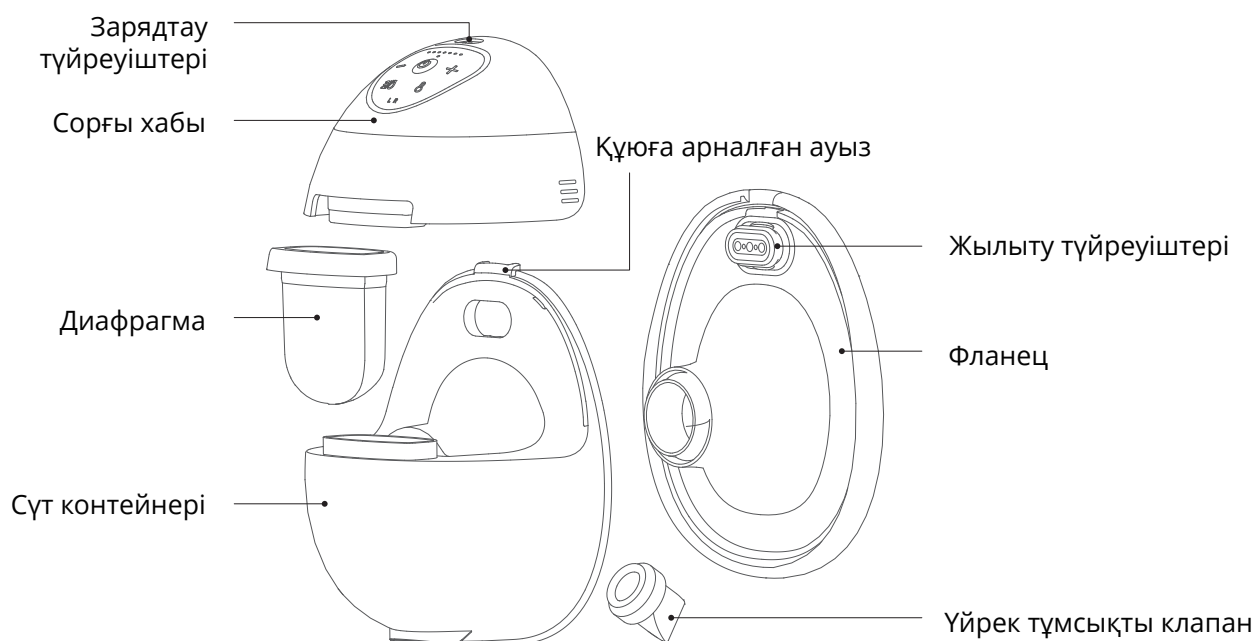

Бөлік	Функция
Зарядтау түйреуіштері	Магнитті зарядтау кабелімен байланыс арқылы сүт сорғышты зарядтаңыз.
Сорғы хабы	Емшек сорғысының моторы. Оның параметрлерін басқаруға арналған басқару панелі бар.
Диафрагма	Деформация арқылы соруды жасайтын мембрана емшек сүтін сорғының түйінінен бөліп, сіздің сүт қорыңыздың тазалығын қамтамасыз етеді.
Сүт контейнері	Кеуде сүтін жинаушы. Әрбір сауу сеансынан кейін кеуде сүтін контейнерден құю шүмегі арқылы құйып алыңыз.

Жылыту түйреуіштері	Сүт сорғысының жылыту функциясы үшін орталықпен байланыста.
Фланец	Силиконды бөлік, ол сіздің емшегіңізге тікелей сәйкес келіп, вакуумдық тығыздағышты қалыптастырады. “Өлшеу” осы пайдаланушы нұсқаулығындағы бөлімін қараңыз, өзіңізге сәйкес фланец немесе кірістіру өлшемін табу үшін.
Үйрек тұмсықты клапан	Сору функциясын қамтамасыз етіп, сүтті контейнерге шығаратын клапан.

Басқару түймелері

	Басыңыз және 2 секунд бойы ұстаңыз	Сүт сауу қосу / өшіру Сүт сорғыш 30 минут сору немесе 10 минут үзіліс жасағаннан кейін автоматты түрде өшеді.
	Басыңыз	Тоқтату / Жалғастыру
	Басыңыз	Стимуляция режимі мен Сору режимі арасында ауысыңыз. Стимуляция режимі: Бұл режимде сүт сорғыш құрылғысы сүттің ағуын бастау үшін жылдам және қысқа сорғыш үлгісін қолданады. Сору режимі: Бұл режимде сүт сорғыш баяу сору үлгісімен басталады, сүтті тереңірек және баяу сорып алады.
	Басыңыз	Жылытуды Қосу / Өшіру
	Басыңыз	Сору / Жылу деңгейін арттыру / төмендету (Жылу деңгейін реттеу үшін алдымен жылыту батырмасын басыңыз.)
	Бір уақытта 2 секунд бойы басып тұрыңыз	Қосымшадағы L/R жұптастыру (Алдымен eufy Baby қосымшасында емізік сорғыштарды орнату қажет.)

Жарық индикаторлары

	Жасыл жыпылықтау	Зарядтау жүріп жатыр
	Тұрақты жасыл	Зарядтау аяқталды
	Тұрақты қызыл	Батарея деңгейі <20%
	Жыпылықтаған қызыл түс	Батарея деңгейі <10%
	Ақ	Стимуляция / Сауу режимінде
	Тұрақты қызғылт сары	Жылыту режимінде
	Жыпылықтаған қызғылт сары	Жылыту қатесі Фланец пен сорғы хабын қайта жинап, жылыту түйреуіштерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

• • • • •	1-ден 7-ге дейінгі индикаторлар тұрақты ақ.	Сору / Жылу деңгейі: 1-ден 7-ге дейін
	Ақ жыпылықтау	Үзіліс режимінде (Сүт сорғыш қосылғаннан кейін үзіліс режиміне өтеді. Сол немесе оң жақты растаңыз және қуат түймесін басып жалғастыrmас бұрын сорғыш деңгейін реттеңіз.)
	L / R индикаторлары кезекпен жыпылықтайды	Сол / Оң жақты жұптастыру қолданбада
	L / R көрсеткіші Ақ	Сол жақ / Оң жақ жақтары қолданбада жұптастырылған



- Әдепкі бойынша, индикатор шамдары 10 секунд әрекетсіздіктен кейін сөнеді. Бұл уақытты eufy Baby қолданбасында өзгертуге болады.
- Индикатор шамдары жанған кезде, түймелерді басу сәйкес әрекеттерді бірден орындайды. Индикаторлар өшіп тұрғанда, кез келген батырманы басып құрылғыны оятыңыз, содан кейін сәйкес әрекеттер үшін батырмаларды басыңыз.

Зарядтау


<https://youtu.be/7KIDNBc3wKM>

Алғашқы қолданар алдында, сүт сорғыштарды толық зарядтаңыз, олар 4-тен 6 ретке дейін сүт сорғызу сеансына жетуі мүмкін.



Сіздің емізік сорғышыңыз зарядтағышпен зарядтау кезінде жұмыс істемейді Сүт сорғыштарын зарядтау кезінде кимеңіз.

Сүт сорғыштарды зарядтау үшін магниттік зарядтау кабелін (қоса беріледі) және 5B/1A немесе одан жоғары адаптерді (қоса берілмейді) пайдаланыңыз.

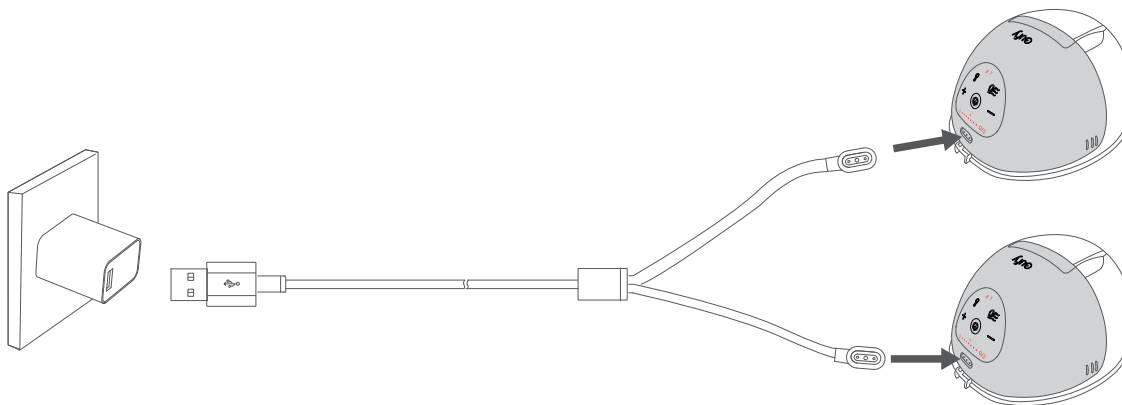


Бөлшектеу

<https://youtu.be/88AqHUD2nhY>


Алғашқы қолдану үшін немесе әр қолданғаннан кейін сорғыларды тазалау немесе бөлек стерильдеу үшін бөлшектерге ажыратыңыз.

1. 1-қадам: Бір қолыңызбен сорғы түйінін ұстап, екінші қолыңыздың бас бармағымен шүмекке жақын контейнердің шетін сыртқа қарай тартып, сорғы түйінін шүмектен босатыңыз. (Фланецті тартудан аулақ болыңыз.) 2-қадам: Хабты көтеріңіз.

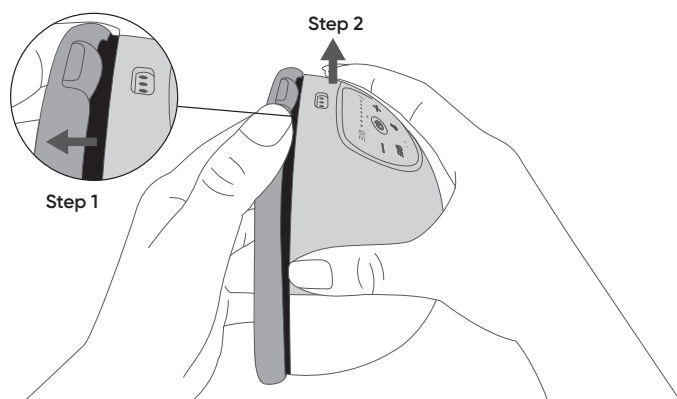


• Сорғы хабы мен құю шүмегі арасындағы құлыптау механизмі сенімді соруды және қыздыруды қамтамасыз етеді.


2. Диафрагманы ойықтан алыңыз.

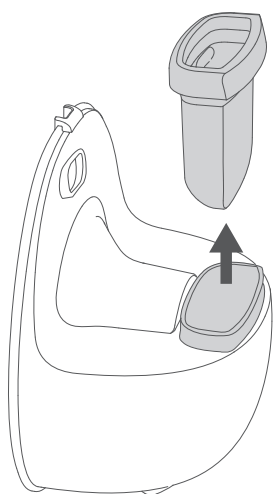

3. Фланецтің сыртқы сақинасын алыңыз, қыздыру түйреуіштерін сопақша ойықтан шығарыңыз, содан кейін бүкіл фланецті шығарыңыз.

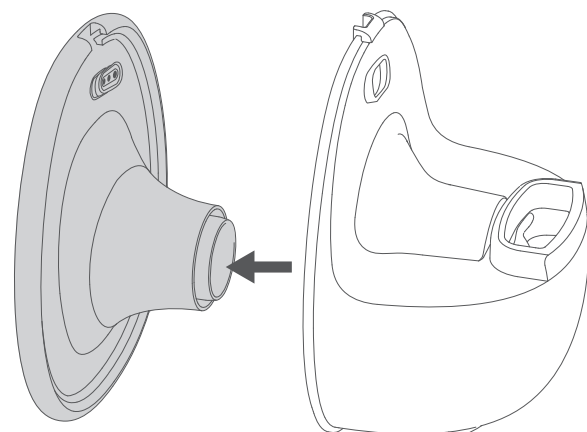

4. Саусақпен үйрек тұмсық клапанын шертіп, оны алып тастаңыз.

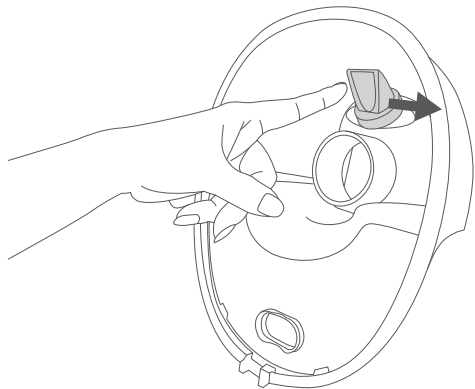

- Сорғыны қолданғаннан кейін үйрек тұмсық клапаны тайғақ болуы мүмкін. Үйректұмсық клапанын түрту оны оңайырақ жылжытуға көмектеседі.

Тазалау және зарарсыздандыру


https://youtu.be/lklQ_H89qrA



- Сорғы хабынан басқа барлық компоненттер жууға болады. Сорғы хабын дезинфекциялық сүрткіштермен тазалаңыз.
- Сәбилерге арналған тамақтану заттарын берілген таза щеткамен тазалаңыз.
- Барлық бөлшектерді қолмен тазалаңыз. Ыдыс жуғыш машинаны тазалау үшін қолданбаңыз.
- Микротолқынды пешті зарарсыздандыру үшін пайдаланбаңыз. Жоғары температуралар қызмет ету мерзімін қысқартып, қауіпсіздік қатерлерін тудырады.
- Барлық бөлшектерді тазалап, стерильдегеннен кейін ауада толықтай құрғатыңыз.

Алғашқы пайдаланудан бұрын

Барлық жуылатын бөлшектерді 5 минутқа дейін қайнатып, зарарсыздандырыңыз, бөлшектердің ыдысқа жабысып, еріп кетпеуі үшін үнемі араластырып тұрыңыз. Балама ретінде, бу арқылы зарарсыздандыруды ең көп дегенде 5 минут бойы орындаңыз. Содан кейін оларды таза қысқыштармен алыңыз.

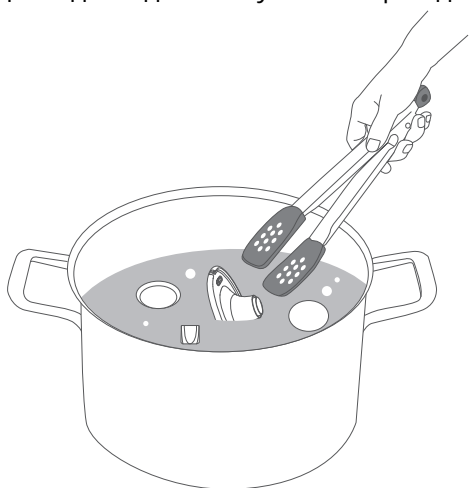

Күнделікті пайдалану үшін

Барлық жуылатын бөлшектерді жылы, сабынды сумен шайып, содан кейін ауада құрғатыңыз. Қажет болған жағдайда, бастапқы тазалау әдістерін қолдана отырып, стерильдеңіз.




Құрастыру

<https://youtu.be/UchwqZQrDIU>




Құрастыруды бастамас бұрын, қолыңызды сабынмен және сумен жақсылап жуыңыз.


1. Контейнердің төменгі бөлігін жоғары көтеріп, үлкен және сұқ саусақтарыңызбен контейнердің ішіндегі кішкентай тесікке үйрек тұмсық клапанын салыңыз және оның түсіп кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны жеңіл түртіңіз.

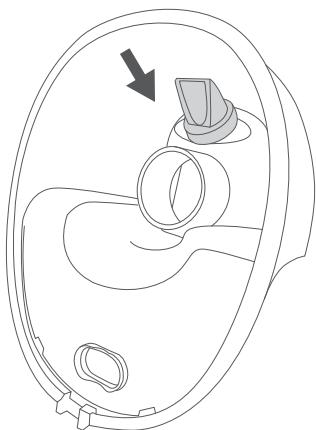


2. Фланец туннелін контейнерге қойып, қыздыру түйреуіштерінің сопақша ойыққа мықтап кіргеніне көз жеткізіңіз. Сыртқы сақинаны дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіп, сүттің ағуын болдырмау үшін ораңыз.

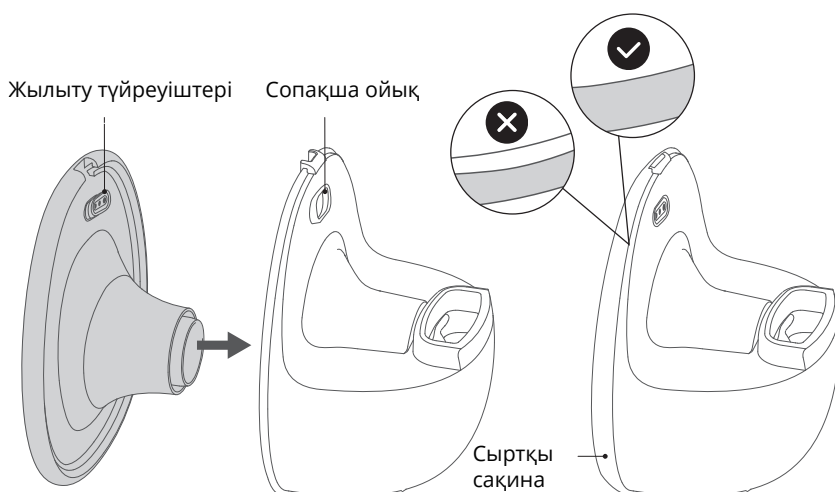

3. Диафрагманы контейнердің ойығына салыңыз, диафрагманың ойыс жағы фланец жағына қаратып орналастырыңыз.

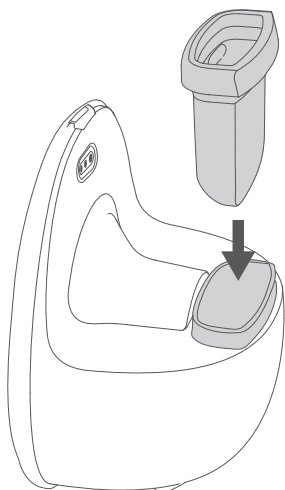

4. Сорғы хабын контейнердің жоғарғы жағына орнатыңыз, сорғы хабы мен диафрагма арасындағы саңылауды тығыздау үшін мықтап басыңыз.

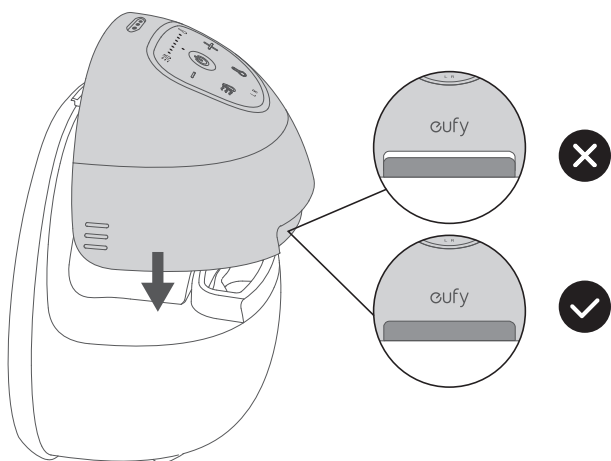

Киіп жүру

Кешіріңіз, бірақ мен тек мәтіндерді аударамын. Егер сізде аударуға арналған мәтін болса, оны осында енгізіңіз, мен сізге көмектесемін!

Өлшеу

Емізік өлшемін анықтау картасын фланец немесе кірістіру өлшемін анықтау үшін қолданыңыз:

1. Емшегіңіздің ұшын тік тұрғанша ынталандырыңыз.
2. Тесікті әр ниппельге сырғытыңыз. Тесіктің негізіне тығыз сәйкес келетін емізік диаметрі бар тесікті таңдаңыз.
3. Өлшем кестесіне сәйкес өлшеміңізді алыңыз.




- Емшек ұшының икемділігі өлшемге әсер етуі мүмкін. Сізге серпімді емізіктеріңіз болса, өлшемді кішірейту қажет болуы мүмкін немесе серпімділігі аз емізіктеріңіз болса, өлшемді үлкейту қажет болуы мүмкін. Егер сіз ыңғайсыздық сезінсеңіз немесе өнімділіктің тұрақты төмендеуін байқасаңыз, әртүрлі өлшемдерді сынап көруіңіз қажет болуы мүмкін.
- 15 мм, 17 мм, 19 мм және 21 мм өлшемді кірістірулерді 24 мм фланецтермен бірге қолдану керек. Сіздің таңдауыңыз үшін 24 мм және 27 мм фланецтер қолжетімді.

Емізік диаметрі	Ұсынылған Фланец немесе кірістіру өлшемі
11-13мм	15 мм *
13-15мм	17мм *
15-17мм	19мм *
17-20мм	21мм *
20-23мм	24мм
23-26мм	27мм
* 24 мм фланецпен өлшемдік кірістірулерді пайдалану қажет.	


Қосымша өлшемдік кірістіруді пайдаланыңыз (қалауыңызша)

Дұрыс сәйкестікті қамтамасыз ету үшін Nipple Measurement Card-ты қолданып, сәйкес өлшемдегі кірістіруді таңдаңыз және оны фланец туннеліне орналастырыңыз.

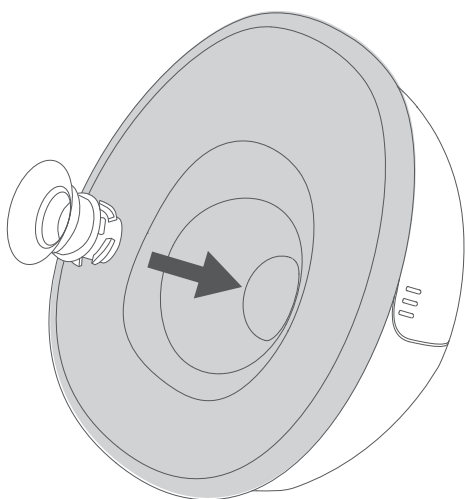


Киіңіз

1. Сәл алға еңкейіп, емізікшеңіздің фланец туннелінің ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз. Сүт сорғышты кеудеңізге нық басу керек.

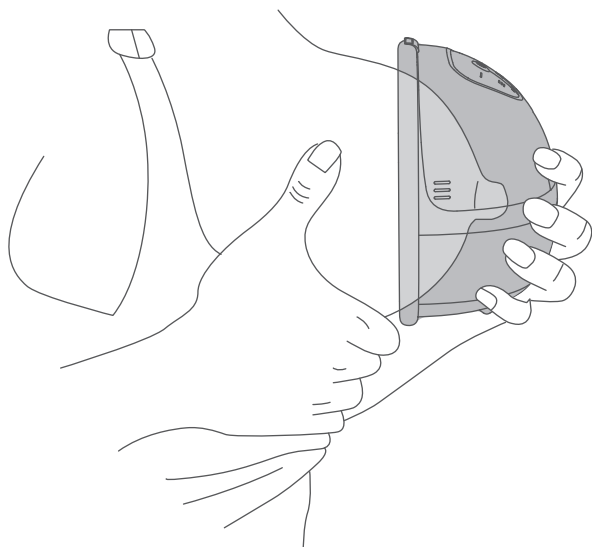

2. Толық жабатын, қақпақты емізетін лифчикті қолданып, кеудеңіз бен фланец арасында тығыз тығыздағыш жасаңыз.

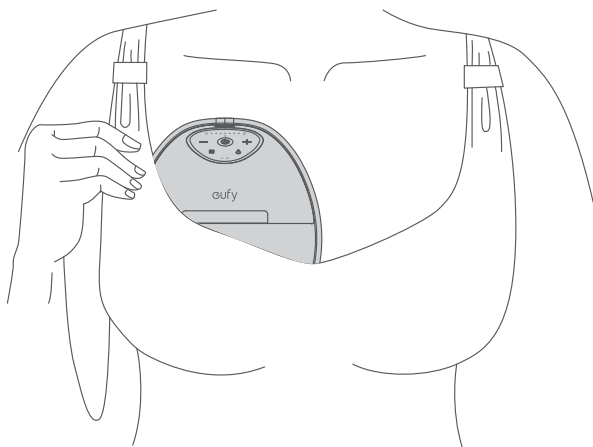

Екі критерий сізге сүт сорғыштың дұрыс орналасқанын анықтауға көмектеседі:

- Сіз сүтті шығарып алуға мүмкіндік беретін айқын соруды сезесіз бе?
- Оны кию ыңғайлы ма?

Егер кию позициясы осы критерийлердің ешқайсысына сәйкес келмесе, сорғының орнын реттеуіңіз қажет.

Сіздің денеңіз жаңа сорғыға бейімделу үшін біраз уақыт қажет, сондықтан басында нәтижелер жақсы болмаса, көңіліңізді түсірмеңіз.

Қосымшасыз пайдалану

Мен тек мәтінді аударамын. Егер сізде аударуға арналған мәтін болса, оны осында енгізіңіз.

Сүт сауу

1. Қуат түймесін 2 секунд бойы басып тұрып, сүт сорғышты қосыңыз.
2. Қуат түймесін басып, сорғыны іске қосыңыз. Тоқтату үшін қайта басыңыз.

	Басыңыз және 2 секунд бойы ұстаңыз	Сүт сауу қосу / өшіру Сүт сорғыш 30 минут сору немесе 10 минут үзіліс жасағаннан кейін автоматты түрде өшеді.
	Басыңыз	Тоқтату / Жалғастыру


- Ынталандыру режимі 2 минутқа созылады, содан кейін ол автоматты түрде сүт шығару режиміне ауысады.
- Егер ана сүті ерте шықса, сүтті сауып алу режиміне ауысыңыз.
- Жылыту түймесін басып, жылыту режимін қосыңыз немесе өшіріңіз.

	Басыңыз	Стимуляция режимі мен Сору режимі арасында ауысыңыз.
	Басыңыз	Жылытуды Қосу / Өшіру

- Сору немесе жылу деңгейін ең қолайлы деңгейге реттеңіз.

	Басыңыз	Сору / Жылу деңгейін арттыру / төмендету (Жылу деңгейін реттеу үшін алдымен жылыту батырмасын басыңыз.)
---	---------	--

• Сүтті сорып жатқанда, артық толып кетпеуі үшін сүт деңгейін уақыт өте тексеріп тұрыңыз. Сорғылауды 6 унциядан (150 мл) артық болған жағдайда тоқтатыңыз.

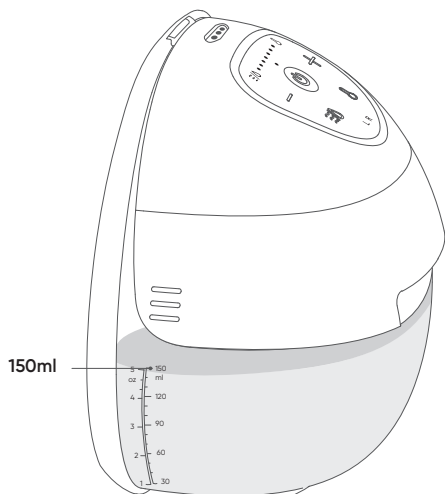

- Сүтті шығара алмасаңыз, 5 минуттан артық сорғылауды бір уақытта жалғастырмаңыз. Күннің басқа уақытында қайтадан көріңіз.
- Егер процесс өте қолайсыз немесе ауыр болса, сорғыны пайдалануды тоқтатыңыз және денсаулық сақтау маманымен кеңесіңіз.
- Өнімді 35 минуттан артық кимеңіз және қолданбаңыз. Денсаулық сақтау маманыңызбен кеңесіп, сору сеансы қанша уақытқа созылуы керектігін түсініңіз.

Стимуляция режимі және Сору режимі

- **Стимуляция режимі** (Массаж режимі деп те аталады):

Сүттің бөліну рефлексін, яғни сүттің шығуын ынталандыру үшін нәрестенің бастапқы жылдам емуін еліктеу мақсатында жасалған. Бұл режим әдетте сүттің бөлінуін бастау үшін жылдамырақ және жеңілдетілген сорғыш үлгісін қолданады. Мақсат – денеге сүттің ағуын бастау туралы белгі беру. Бұл режим әдетте қысқа уақытқа созылады, бірнеше минутқа ғана созылады және сорғылау процесінің бірінші кезеңі болып табылады.

- **сауу режимі:**

Сүт шығару рефлексі іске қосылғаннан кейін, сүт шығару режиміне ауысыңыз. Бұл режим нәрестенің емшекті емген кезде сүтті баяу және терең сорып алуын имитациялайды. Сауу режимі сүтті тиімді шығару үшін баяу, бірақ күшті сороды қолданады. Бұл кезең анаға кеудесін жеткілікті түрде босату үшін қажет болғанша созылуы мүмкін, бұл әр сеансқа шамамен 10-20 минутты құрауы мүмкін.

eufy Baby қолданбасымен пайдалану

[Мен тек мәтінді аудар аламын. Егер сізде аударуға арналған мәтін болса, оны осында енгізіңіз.](#)

Телефоныңыз — сүт сауудағы серіктесіңіз. Eufy Baby қолданбасымен тәжірибеңізді жақсартыңыз.



- **Құрылғыларды басқару:** Емізік сорғыштарын қайта атау, жақтарын таңдау және LED жарығын реттеу.
- **Қашықтан басқару пульті:** Сорғыны іске қосу немесе тоқтату, сородың немесе жылудың деңгейін реттеу, ынталандыру және сүт шығару режимдері арасында ауысу.
- **Кесте мен сессияны орнатыңыз:** Сорғыны ұмытпау үшін өзіңізге ескертіңіз. Әрбір сессияның ұзақтығын немесе сыйымдылығын белгілеңіз.
- **OptiRhythm технологиясымен сүт өнімділігін оңтайландырыңыз:** 4 алдын ала орнатылған ырғақтың


бірін таңдаңыз және сорғыны балаңызға ең қолайлы ету үшін сорудың қарқындылығын, жылдамдығын және ұзақтығын реттеңіз.

1. **Әдепкі бойынша максималды ырғақ:** Максималды нәтиже алғысы келетін аналар үшін. Максималды нәтиже алғысы келетін аналар үшін. Стимуляция мен сору режимдері арасында бірнеше рет ауысыңыз.
 2. **Табиғи ырғақ:** Бала табиғи сору ырғағын бағалайтын аналар үшін. Стимуляция және сүт шығару режимдері арасында ұзын және қысқа тартуларды араластыра отырып ауысыңыз.
 3. **Стандартты ырғақ:** Дәстүрлі электрлік сору ырғағын қалайтын аналар үшін. 2 минуттан кейін стимуляция режимінен сору режиміне бір рет ауысу.
 4. **Жұмсақ ырғақ:** Сезімтал емізіктері бар аналар үшін. Әрбір сорғыш баяу қарқынмен және жұмсақ жанасумен жұмыс істеуі үшін мұқият калибренген.
- **Оқу құралы және Жиі қойылатын сұрақтар:** Толығырақ нұсқаулықтармен немесе ақауларды жою бойынша ақпаратпен танысыңыз.
 - **Деректерді қадағалау:** Сору тарихын қарап шығыңыз.
 - **Фирмалық бағдарламаны жаңарту:** Өнімділікті жақсарту немесе жаңа мүмкіндіктерді қосу үшін қолжетімді болған жағдайда фирмалық бағдарламаны жаңартыңыз.

Сүтті құю


https://youtu.be/v_HzT9psxSY

1. Сүт сорғышты тоқтатыңыз немесе өшіріңіз. Сорғыны шығарған кезде ағып кетудің алдын алу үшін алға еңкейіңіз.

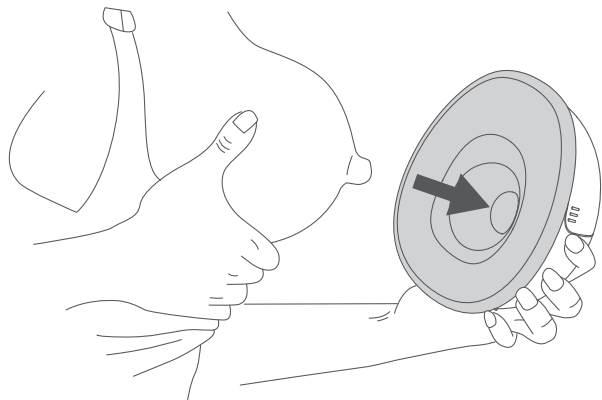


2. Сорғы хабын контейнерден алыңыз. (Қараңыз **“Бөлшектеу”** 1-қадам.)


 Сүтті тасымалдаудан бұрын ағып кетудің алдын алу үшін сорғы хабынан басқа бөліктерді (диафрагманы қоса алғанда) бөлшектемеңіз.

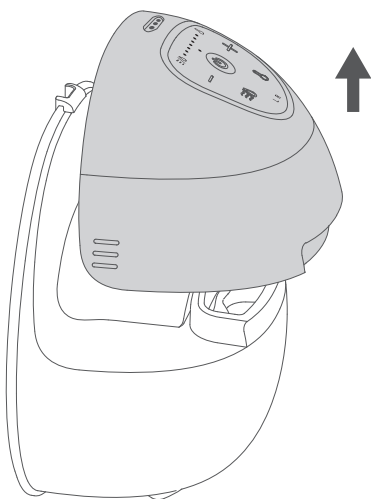

3. Контейнерді тасымалдауға дайын күйінде үстелге қалдырыңыз.

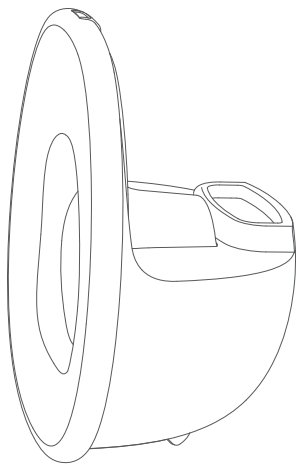

4. Контейнерді сүтті құю үшін ернеуі жоғары қараған күйде еңкейтеңіз. Құю шүмегі төмен қараған кезде, толық босату үшін одан әрі еңкейтеңіз. Соңында, қажет болса, оның астында жиналып қалған сүтті алу үшін диафрагманы алып тастаңыз.

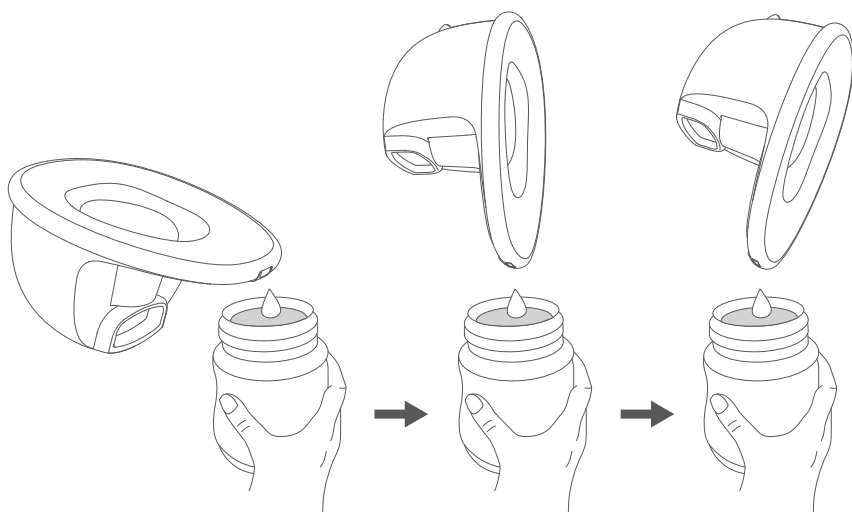

Сүтті сақтау

Ана сүтін сақтау

Ана сүтін таза және стерильденген сүт сақтауға арналған қапшыққа немесе тығыздағыш жастықшасы бар сүт бөтелкесіне құйып, дереу тоңазытқышқа салқындату немесе мұздату үшін қойыңыз.



- Ана сүтін қайта-қайта мұздатпаңыз.
- Жаңа сауылған ана сүтін мұздатылған ана сүтімен араластырмаңыз.

Сақталған сүтті беру

Мұздатылған ана сүтін еріту үшін оны бір түнге тоңазытқышқа қойыңыз. Балама ретінде, төтенше жағдайда еріту үшін ыстық су құйылған ыдысты пайдалануға болады. Ерітілгеннен кейін, оны 24 сағат ішінде тұтыну керек.



- Сәбиіңізді тамақтандырмас бұрын, ана сүтінің температурасын тексеруді ұмытпаңыз.
- Сүт сақтауға арналған бөтелкені қайнап жатқан суға қыздыру үшін салмаңыз, себебі ол жарылып немесе жарықшақ пайда болуы мүмкін.
- Емшек сүтін жылыту үшін микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.
- Тамақтандырғаннан кейін қалған ана сүтін төгіңіз.

Техникалық қызмет көрсету

1. Сорғы хабы

Кез келген түрдегі өзгерістерге тыйым салынады. Сорғы хабын ашу немесе оған қол сұғу кепілдікті жарамсыз етеді. Егер жөндеу қажет болса, сорғы хабын сатушыға немесе тікелей өндірушіге қайтарыңыз.

2. Жуылатын бөлшектер

Жуылатын бөлшектердің күтілетін қызмет ету мерзімі 1-3 ай. Ұзақ мерзімді сақтаудан кейін немесе келесі балаңыз үшін сорғыны қолданар алдында жуылатын бөлшектерді ауыстырылуы ұсынылады.

Көбірек киюге болатын кеуде сорғылары мен қосалқы бөлшектерді сатып алуға болады.

<https://www.eufy.com/breast-pump>

3. Орнатылған батарея

Егер сіздің емізік сорғыңыз ұзақ уақыт пайдаланылмаса, кіріктірілген батарея баяу разрядталады. Батареяның ұзақ уақыт бойы төмен кернеуден зақымдануын болдырмау үшін, сүт сорғышты әр 3 ай сайын зарядтаңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Жиі қойылатын сұрақтар мен шешімдерді төмендегі сілтемені басу арқылы ЖҚС бөлімінен таба аласыз:

<https://www.eufy.com/products/t8d02181?variant=43660278366394>

Техникалық сипаттамалар

Енгізу	100-240В ~, 50/60Гц
Шығару	5V=2A
Батарея сыйымдылығы	1400mAh / 3.7VDC
Номиналды қуат	5W
Батареяны зарядтау уақыты	1.5 сағат
Батареяны пайдалану уақыты	2 сағат
Шу деңгейі	<46dB
Жұмыс температурасы	0°C - 40°C
Тасымалдау және сақтау температурасы	-20°C - 70°C
Тасымалдау және сақтау кезіндегі ылғалдылық	15% - 90%

Әдепкі ашық порт: BLE (Bluetooth Low Energy)

Порттың сипаттамасы:

Құрылғы қосылғаннан кейін, BLE хабар тарату автоматты түрде қосылады және Bluetooth желісін конфигурациялау (немесе басқару) қызметтерін ұсынады. Bluetooth қызметі құрылғы өшірілгеннен кейін өшіріледі.

Өндіруші

Өндіруші: Shenzhen TPH Technology Co.

Мекенжай: Лянчуан технологиялық паркі, 29-ғимарат, 2-қабат, 203-бөлме,
Булань жолы, 21, Сялилян қауымдастығы, Наньвань көшесі, Лунган ауданы,
Шэньчжэнь, Қытай 518000