

Пайдаланушы нұсқаулығы

Өнім атауы: eufy киілетін сүт сорғысы S1 Pro

Модель: T8D04

Өнім туралы

Қораптың ішінде не бар

Өнімге шолу

Бір қарағанда

Басқару түймелері

Жарық индикаторлары

Зарядтау

Бөлшектеу

Тазалау және зарарсыздандыру

Алғашқы пайдаланудан бұрын

Күнделікті пайдалану үшін

Құрастыру

Киіп жүру

Өлшеу

Көлемді реттегішті пайдаланыңыз (Қосымша).

Киіңіз

Қосымшасыз пайдалану

Сорғылау

Стимуляция режимі және Сору режимі

eufy Baby қолданбасымен пайдалану

Сүтті құю

Сүтті сақтау

Ана сүтін сақтау

Сақталған сүтті беру


Техникалық қызмет көрсету

Жиі қойылатын сұрақтар

Техникалық сипаттамалар

Өндіруші

Өнім туралы

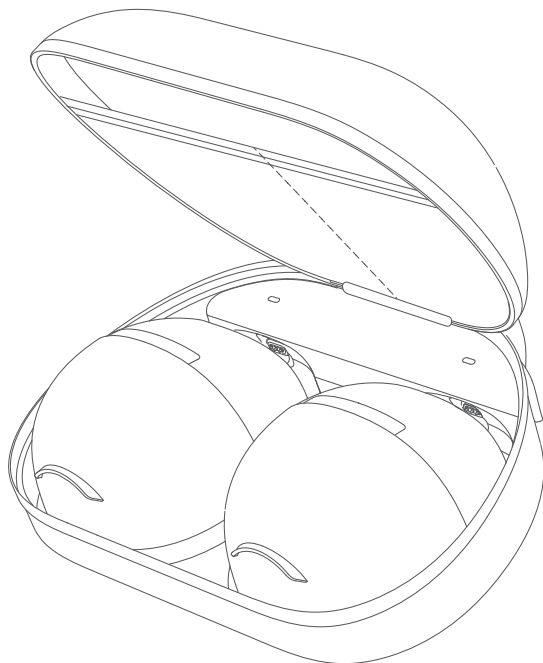

Eufy киілетін сүт сорғыш сериясы емізулі әйелдердің емшектерінен емшек сүтін шығарып, жинауға арналған. Емшек сорғысын eufy Baby қосымшасымен немесе онсыз пайдаланып, ана сүтін балаңыз үшін қауіпсіз, тиімді және ыңғайлы түрде шығарып, жинауға болады.



• Бұл өнім бір пайдаланушыға арналған.

ҚАУІП – Электр тогынан зақымдану қаупін азайту үшін:

- Шомылып жатқанда қолданбаңыз.
- Өнімді ваннаға немесе раковинаға құлап кетуі немесе тартылып кетуі мүмкін жерге қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
- Суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз немесе түсірмеңіз.
- Суға түсіп кеткен өнімге қол созбаңыз. Дереву ажыратыңыз.
- Әрқашан оны пайдаланбас бұрын зарядтағыштан ажыратыңыз.


ЕСКЕРТУ – Күйіктердің, электр тогының соғу қаупінің, өрттің немесе жеке жарақаттардың қаупін азайту үшін.

- Бұл өнімді тек осы нұсқаулықта сипатталған мақсатта ғана пайдаланыңыз.
- Бұл өнімнің сымы немесе штепселі зақымдалған болса, дұрыс жұмыс істемесе, құлап немесе зақымдалған болса, немесе суға түсіп кеткен болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз.
- Шнурды қыздырылған беттерден алыс ұстаңыз.
- Ұйықтап жатқанда немесе ұйқылы-ояу күйде ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ешқашан ешқандай затты ешбір тесікке немесе шлангқа ештеңе салмаңыз
- Сыртта пайдаланбаңыз немесе аэрозоль (шашыратқыш) өнімдері қолданылып жатқан немесе оттегі беріліп жатқан жерде жұмыс істемеңіз.
- Өнімді өзгертпеңіз.
- Бұл ойыншық емес, оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл жеке қолдануға арналған жеке күтім өнімі және оны басқа пайдаланушылармен бөлісуге болмайды.
- Егер тітіркену немесе жайсыздық пайда болса, фланец пен кеуде тінінің арасындағы тығыздағышты саусағыңызбен ажыратыңыз, пайдалануды тоқтатыңыз және медициналық қызметкерге жүгініңіз.
- **Өнімді 35 минуттан артық кимеңіз және қолданбаңыз. Денсаулық сақтау маманыңызбен кеңесіп, сору сеансы кезінде қанша уақыт сору керектігін түсініңіз.**
- Сорғы хабын жумаңыз немесе залалсыздандырмаңыз. Тек таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Сүт сорғышты тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймаңыз. Микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.
- **Сүт контейнері мен барлық силикон бөлшектерін әр жолы 5 минуттан артық қайнатпаңыз.**
- Өнімді тым ыстық немесе тым суық ортада пайдаланбаңыз, өнімді күшті күн сәулесіне немесе ылғалды ортаға ұшыратпаңыз.
- **Осы өнім мен аксессуарларға арналған қолайлы температура 0°C-40°C.**
- Құрылғыны 5°C-25°C аралығындағы температурада зарядтау ұсынылады.


Қораптың ішінде не бар

Қаптаманы ашқанда, келесі бөлшектердің барлығы қаптамада екеніне көз жеткізіңіз.[eufy Smart қолдау орталығы](https://support.eufy.com/s/contact-us): <https://support.eufy.com/s/contact-us>

Көбірек киюге болатын кеуде сорғылары мен қосалқы бөлшектерді сатып алуға болады:<https://www.eufy.com/breast-pump>

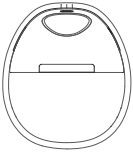x2

x1

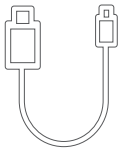x1

x1

x6


Сүт сорғыштар
(24 мм
фланецтер)


Зарядтау
қорабы


USB-C
Зарядтау
кабелі


Магнитті
Зарядтау
кабелі

Өлшемдік
кірістірулер
(17/19/21 мм)

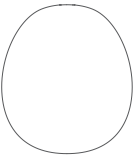x2

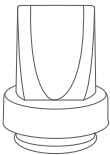x2

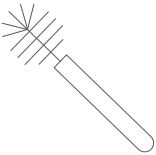x1

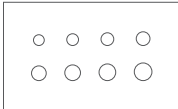x1

x1

Шаң
қаптамалары

Қосымша
Үйрек тұмсық
клапандары

Тазалау
щеткасы

Емізік
Өлшеу картасы

Жылдам
бастау
нұсқаулығы

Өнімге шолу

Бір қарағанда



Зарядтау түйреуіштері

Сорғы торабы

Құюға арналған ауыз

Жылыту түйреуіштері

Фланец

Диафрагма

Сүт контейнері

Үйрек тұмсықты клапан

Бөлік	Функция
Зарядтау түйреуіштері	Магнитті зарядтау кабелін сүт сорғышпен түйістіріп, оны зарядтаңыз.
Сорғы торабы	Емшек сорғысының моторы. Оның параметрлерін басқаруға арналған басқару панелі бар.
Диафрагма	Деформация арқылы сороды жасайтын мембрана ана сүті мен сорғының түйінін бөліп, сүт қорының тазалығын қамтамасыз етеді.

Сүт контейнері	Емшек сүтін жинаушы. Әрбір сору сеансынан кейін емшек сүтін контейнерден құю шүмегі арқылы құйып алыңыз.
Жылыту түйреуіштері	Сүт сорғыштың жылыту функциясы үшін хабпен байланыста.
Фланец	Силиконды бөлік, ол сіздің емізігіңізге тікелей сәйкес келіп, вакуумдық тығыздағышты құрайды. “Өлшеу” осы пайдаланушы нұсқаулығындағы бөлімін қараңыз, өзіңізге сәйкес фланец немесе кірістіру өлшемін табу үшін.
Үйрек тұмсықты клапан	Сору функциясын қамтамасыз етіп, сүтті контейнерге шығаратын клапан.

Басқару түймелері

	Басыңыз және 2 секунд бойы ұстаңыз	Сүт сауу қосу / өшіру (Сүт сорғышы 30 минут сауады немесе 10 минут үзілістен кейін автоматты түрде өшеді.)
	Басыңыз	Тоқтату / Жалғастыру
	Басыңыз	Стимуляция режимі мен Сауу режимі арасында ауысыңыз Стимуляция режимі: Бұл режимде сүт сорғыш құрылғысы сүттің ағуын бастау үшін жылдам және қысқа сорғыш үлгісін қолданады. Сору режимі: Бұл режимде сүт сорғыш баяу сору үлгісімен басталады, сүтті тереңірек және баяу сорып шығарады.
	Басыңыз	Жылытуды Қосу / Өшіру
	Басыңыз	Үлкейту / Сауу деңгейін азайту / Жылыту (Жылу деңгейін реттеу үшін алдымен жылыту түймесін басыңыз.)
	Бір уақытта 2 секунд бойы басып тұрыңыз.	Қосымшадағы L/R жұптастыру (Алдымен eufo Baby қосымшасында емізік сорғыштарды орнатуыңыз қажет.)

Жарық индикаторлары

	Жасыл жыпылықтау	Зарядтау жүріп жатыр
	Тұрақты жасыл	Зарядтау аяқталды
	Тұрақты қызыл	Батарея деңгейі <20%
	Жыпылықтаған қызыл жарық	Батарея деңгейі <10%
	Ақ	Стимуляция / сауу режимінде
	Тұрақты қызғылт сары	Жылыту режимінде
	Жыпылықтаған қызғылт сары	Жылыту қатесі Фланец пен сорғы хабын қайта жинап, жылыту түйреуіштерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

• • • • •	1-ден 7-ге дейінгі индикаторлар тұрақты ақ түсте	Сору / Жылу деңгейі: 1-ден 7-ге дейін
	Ақ жыпылықтау	Үзіліс режимінде (Сүт сорғыш қосылғаннан кейін үзіліс режиміне өтеді. Сол немесе оң жақты растаңыз және сорғыш деңгейін реттеп, жалғастыру үшін қуат түймесін басыңыз.)
L R	L / R индикаторлары кезекпен жыпылықтайды	Сол / Оң жақты жұптастыру қолданбада
	L / R көрсеткіші Ақ	Сол жақ / Оң жақ жағы қолданбада жұптастырылған



- Әдепкі бойынша, индикатор шамдары 10 секунд әрекетсіздіктен кейін сөнеді. Бұл уақытты eufy Baby қосымшасында өзгертуге болады.
- Индикатор шамдары жанған кезде, түймелерді басу сәйкес әрекеттерді бірден орындайды. Индикаторлар өшіп тұрғанда, кез келген батырманы басып құрылғыны оятыңыз, содан кейін сәйкес әрекеттер үшін батырмаларды басыңыз.

Зарядтау

https://youtu.be/X_mkD0XHY0c


Алғаш рет қолданар алдында, сүт сорғыштарды толық зарядтаңыз, бұл оларды 2 күнге дейін пайдалануға мүмкіндік береді.



Сіздің емізік сорғышыңыз зарядтағышпен зарядтау кезінде жұмыс істемейді.


Опция 1:

Сүт сорғыштарын зарядтау үшін магниттік зарядтау кабелін (қоса беріледі) және 5В/1А немесе одан жоғары адаптерді (қоса берілмейді) пайдаланыңыз.

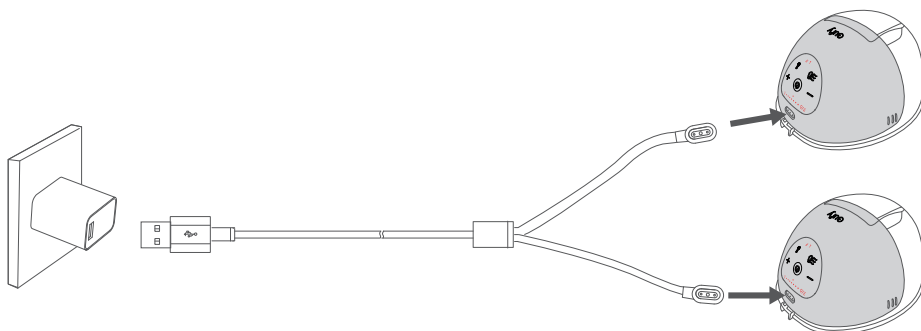

Опция 2:

Емшек сорғыларын зарядтау үшін (қоса берілген) зарядтау қорабын пайдаланыңыз. Зарядтау қорабын қалай пайдалану туралы толығырақ ақпарат алу үшін [eufy емізік сорғысының зарядтау қорабына арналған пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз](#).

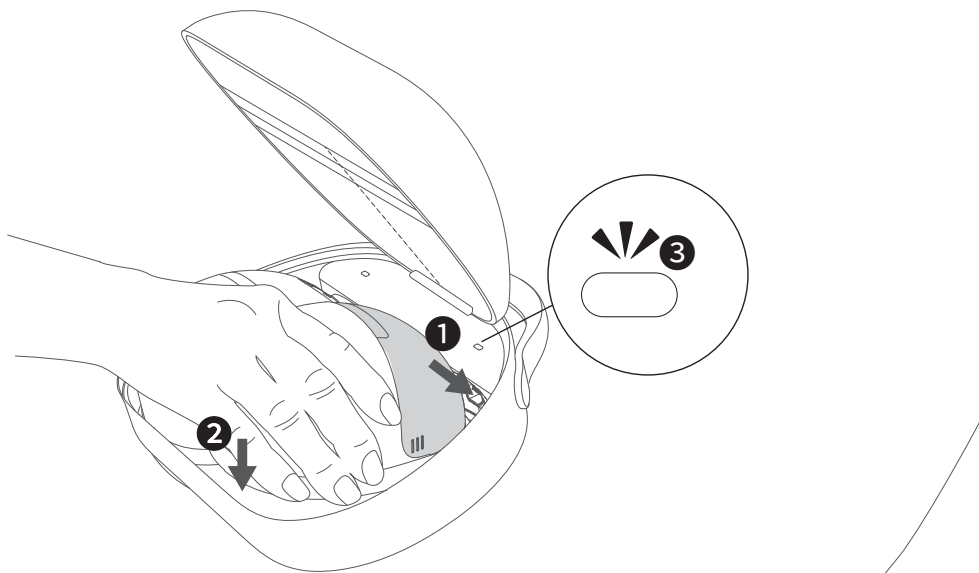


Бөлшектеу

<https://youtu.be/88AqHUD2nhY>


Алғашқы қолдану үшін немесе әр қолданғаннан кейін сорғыларды тазалау немесе бөлек стерильдеу үшін оларды бөлшектерге ажыратыңыз.

- 1-қадам: Бір қолыңызбен сорғы хабын ұстап, екінші қолыңыздың бас бармағымен шүмекке жақын контейнердің шетін сыртқа қарай тартып, сорғы хабын шүмектен босатыңыз. (Фланецті тартудан аулақ болыңыз.)
- 2-қадам: Хабты көтеріңіз.

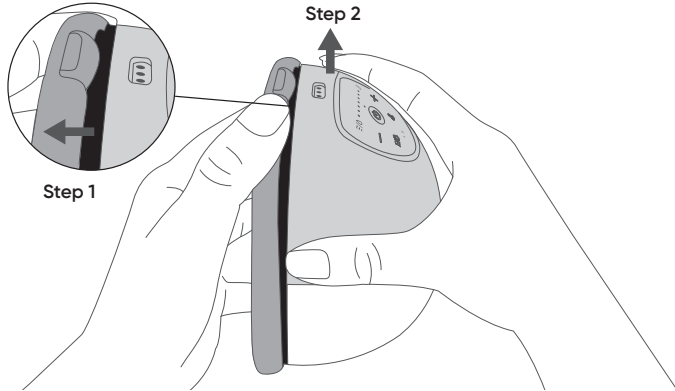


• Сорғы хабы мен құю шүмегі арасындағы құлыптау механизмі сенімді соруды және қыздыруды қамтамасыз етеді.


2. Диафрагманы ойықтан алыңыз.

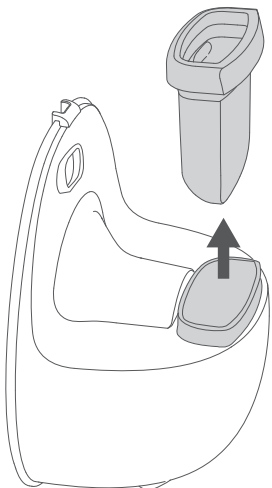

3. Фланецтің сыртқы сақинасын алып тастаңыз, қыздыру түйреуіштерін сопақша ойықтан шығарыңыз, содан кейін бүкіл фланецті шығарыңыз.

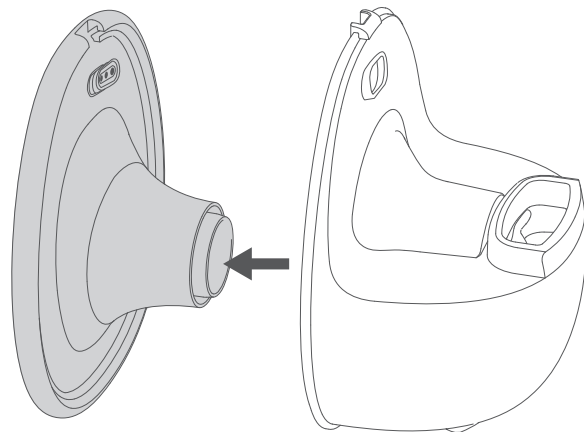

4. Саусақпен үйрек тұмсық клапанын түртіп, оны алып тастаңыз.

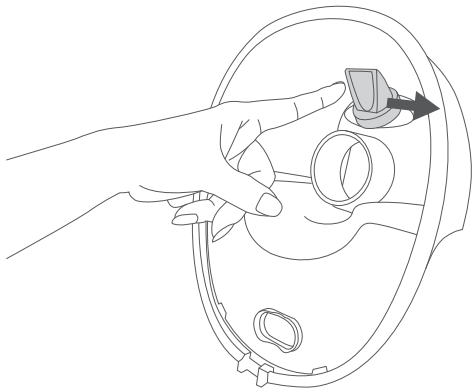

• Сорғыны қолданғаннан кейін үйрек тұмсық клапаны тайғақ болуы мүмкін. Үйректұмсық клапанын түрту оны оңайырақ жылжытуға көмектеседі.

Тазалау және зарарсыздандыру


https://youtu.be/lklQ_H89qrA



- Сорғы хабынан басқа барлық компоненттер жууға болады. Сорғы хабын дезинфекциялық сүрткіштермен тазалаңыз.
- Сәбилерге арналған тамақтандыру заттарын берілген таза щеткамен ысқылаңыз.
- Барлық бөлшектерді қолмен тазалаңыз.
- Емшек сүтін жылыту үшін микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Жоғары температуралар қызмет ету мерзімін қысқартып, қауіпсіздікке қауіп төндіреді.
- Барлық бөлшектерді тазалап, стерильдегеннен кейін ауада толықтай құрғатыңыз.

Алғашқы пайдаланудан бұрын

Барлық жуылатын бөлшектерді қайнату арқылы 5 минутқа дейін зарарсыздандырыңыз, бөлшектердің ыдысқа жабысып, еріп кетпеуі үшін үнемі араластырып тұрыңыз. Балама ретінде, бу арқылы стерильдеуді ең көп дегенде 5 минутқа дейін орындаңыз. Содан кейін оларды таза қысқыштардың көмегімен алып тастаңыз.

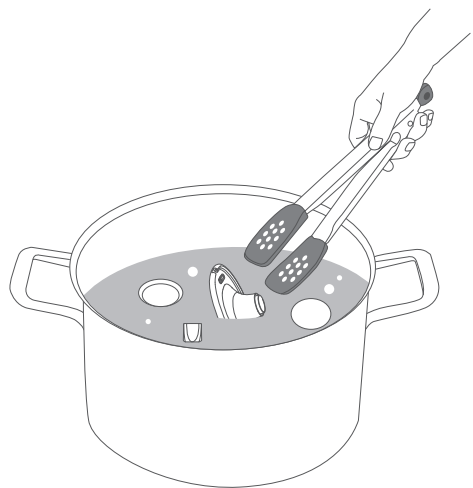

Күнделікті пайдалану үшін

Барлық жуылатын бөлшектерді жылы, сабынды сумен шайып, содан кейін ауада құрғатыңыз.




Құрастыру

<https://youtu.be/UchwqZQrDIU>




Жинауды бастамас бұрын, қолыңызды сабынмен және сумен жақсылап жуыңыз.


1. Контейнердің төменгі бөлігін жоғары көтеріп, үлкен және сұқ саусақтарыңызбен контейнердің ішіндегі кішкентай тесікке үйрек тұмсық клапанын салыңыз және оның түсіп кетпеуін қамтамасыз ету үшін оны жеңіл түртіңіз.

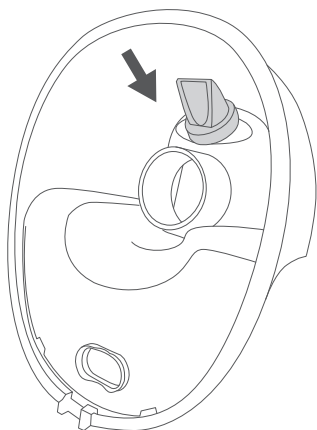


2. Фланец туннелін контейнерге қойып, жылыту түйреуіштерінің сопақша ойыққа мықтап кіргеніне көз жеткізіңіз. Сыртқы сақинаны дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіп, сүттің ағуын болдырмау үшін ораңыз.

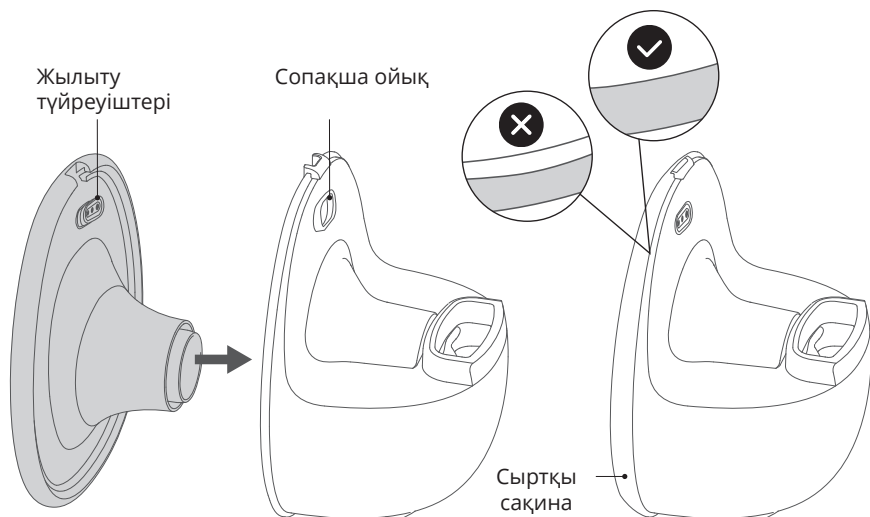

3. Диафрагманы контейнердің ойығына салыңыз, диафрагманың ойыс жағы фланец жағына қараған болсын.

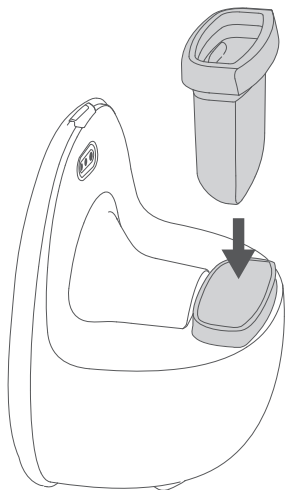

4. Сорғы хабын контейнердің жоғарғы жағына орнатыңыз, сорғы хабы мен диафрагма арасындағы саңылауды тығыздау үшін мықтап басыңыз.

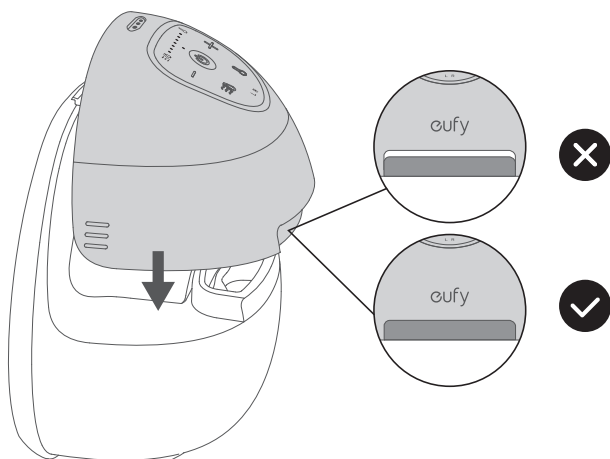

Киіп жүру

<https://youtu.be/nzC4MHDWaPM>

Өлшеу

Емізік өлшемін анықтау картасын фланец немесе кірістіру өлшемін анықтау үшін қолданыңыз:

1. Кеуденіңіздің ұшын тік тұрғанша қоздырыңыз.
2. Тесікті әр ниппельге сырғытыңыз.
3. Өлшем кестесіне сәйкес өлшеміңізді анықтаңыз.




- Емшек ұшының икемділігі өлшемге әсер етуі мүмкін. Сізге серпімді емізіктеріңіз болса, өлшемді кішірейту қажет болуы мүмкін, ал серпімділігі аз емізіктеріңіз болса, өлшемді үлкейту қажет болуы мүмкін. Егер сіз ыңғайсыздық сезінсеңіз немесе өнімділіктің тұрақты төмендеуін байқасаңыз, әртүрлі өлшемдерді қолданып көруіңіз қажет болуы мүмкін.
- 15 мм, 17 мм, 19 мм және 21 мм өлшемді кірістірулерді 24 мм фланецтермен бірге қолдану керек. Сіздің таңдауыңыз үшін 24 мм және 27 мм фланецтер қолжетімді.

Емшек диаметрі	Ұсынылады Ф л а н е ц немесе кірістіру өлшемі
11-13мм	15мм
13-15мм	17мм *
15-17мм	19мм *
17-20мм	21мм
20-23мм	24мм
23-26мм	27мм
* 24 мм фланецпен өлшемдік кірістірулерді пайдалану қажет.	


Көлемді реттегішті пайдаланыңыз (Қосымша).

Дұрыс сәйкестікті қамтамасыз ету үшін Nipple Measurement Card-ты қолданып, сәйкес өлшемдегі кірістіруді таңдаңыз және оны фланец туннеліне орналастырыңыз.

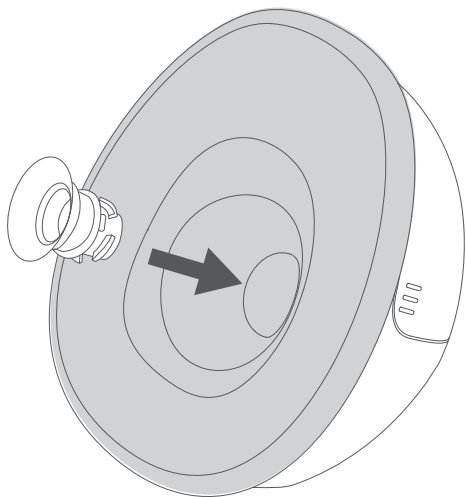


Киіңіз

1. Сәл алға еңкейіп, емізік фланец туннелінің ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз. Сүт сорғышты кеудеңізге нық басып қою керек.

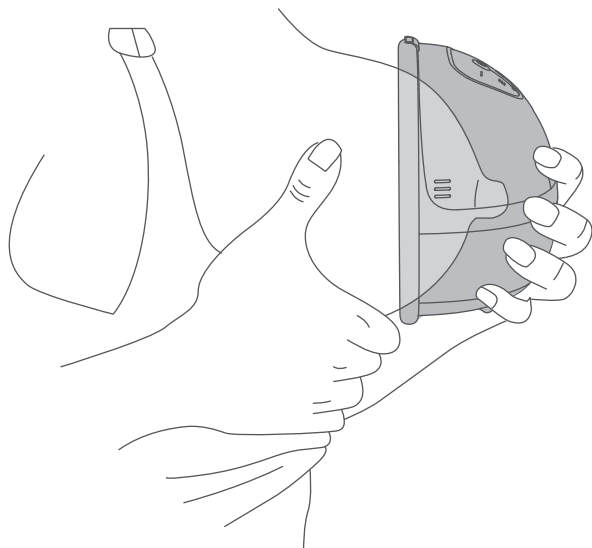

2. Толық жабылатын, қақпақты емізетін лифчикті қолданып, кеудеңіз бен фланец арасында тығыз тығыздағыш жасаңыз.

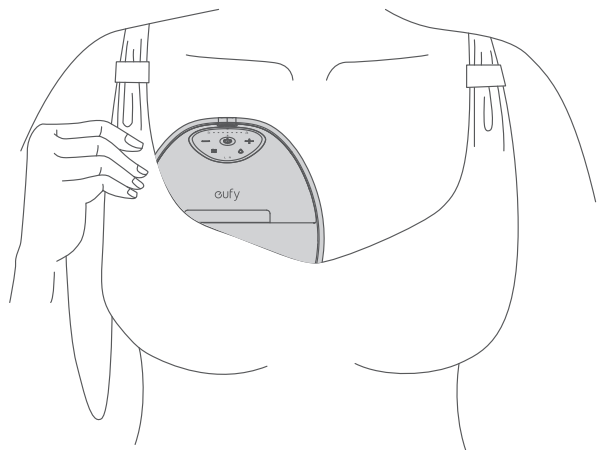

Екі критерий сізге сүт сорғыштың дұрыс орналасқанын анықтауға көмектеседі:

- Сіз сүтті шығарып алатын айқын сороды сезесіз бе?
 - Оны кию ыңғайлы ма?
- Егер кию позициясы осы критерийлердің ешқайсысына сәйкес келмесе, сорғының орнын реттеуіңіз қажет.
- Сіздің денеңіз жаңа сорғыға бейімделу үшін біраз уақыт қажет, сондықтан басында нәтижелер жақсы болмаса, көңіліңізді түсірмеңіз.

Қосымшасыз пайдалану

Сорғылау

1. Қуат түймесін 2 секунд бойы басып тұрып, сүт сорғышты қосыңыз.
2. Қуат түймесін басып, сорғыны іске қосыңыз.

	Басыңыз және 2 секунд бойы ұстаңыз	Сүт сауу қосу / өшіру (Сүт сорғышы 30 минут сауады немесе 10 минут үзілістен кейін автоматты түрде өшеді.)
	Басыңыз	Тоқтату / Жалғастыру


- Ынталандыру режимі 2 минутқа созылады, содан кейін ол автоматты түрде сүт шығару режиміне ауысады. Егер ана сүті ерте шықса, сүтті сауып алу режиміне ауысыңыз.
- Жылыту түймесін басып, жылыту режимін қосыңыз немесе өшіріңіз.

	Басыңыз	Стимуляция режимі мен Сауу режимі арасында ауысыңыз
	Басыңыз	Жылытуды Қосу / Өшіру

- Сору немесе жылу деңгейін ең қолайлы деңгейге реттеңіз.

	Басыңыз	Үлкейту / Сауу денгейін азайту / Жылыту (Жылу деңгейін реттеу үшін алдымен жылыту түймесін басыңыз.)
--	---------	---

- Сүтті сорып жатқанда, артық толып кетпеуі үшін сүт деңгейін уақытылы тексеріп тұрыңыз.

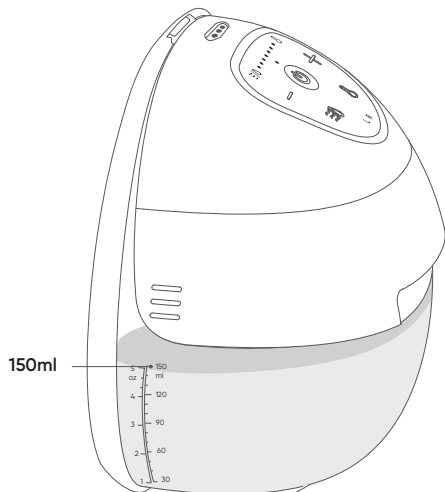

- Сүтті шығара алмасаңыз, 5 минуттан артық сорғылауды жалғастырмаңыз. Try again at another time during the day.
- Егер процесс өте қолайсыз немесе ауыр болса, сорғыны пайдалануды тоқтатыңыз және денсаулық сақтау маманымен кеңесіңіз.
- Өнімді 35 минуттан артық кимеңіз және қолданбаңыз. Денсаулық сақтау маманыңызбен кеңесіп, сору сеансы кезінде қанша уақыт сору керектігін түсініңіз.

Стимуляция режимі және Сору режимі

• Стимуляция режимі (Массаж режимі деп те аталады):

Сүттің бөліну рефлексін, яғни сүттің шығуын ынталандыру үшін нәрестенің бастапқы жылдам еміне еліктеу мақсатында жасалған. Бұл режим әдетте сүттің шығуын бастау үшін тезірек және жеңілдетілген сорғыш үлгісін пайдаланады. Мақсат – денеге сүттің ағуын бастау туралы белгі беру. Бұл режим әдетте қысқа уақытқа созылады, бірнеше минутқа ғана созылады және сорғылау процесінің бірінші кезеңі болып табылады.

• Сору режимі:

Сүт шығару рефлексі іске қосылғаннан кейін, сору режиміне ауысыңыз. Бұл режим нәресте емізген кезде және сүтті емшектен сорып жатқанда болатын баяу, терең сору әрекетін имитациялайды. Сору режимі сүтті тиімді шығару үшін баяу, бірақ күшті сороды қолданады. Бұл кезең анаға кеудесін жеткілікті түрде босату үшін қажет болғанша созылуы мүмкін, бұл әр сеансқа шамамен 10-20 минутты құрауы мүмкін.

eufy Baby қолданбасымен пайдалану

<https://youtu.be/0eWX-TetCos>

Телефоныңыз — сүт сауудағы серіктесіңіз.



Құрылғыларды басқару: Сүт сорғыштарды қайта атау, жақтарын таңдау және LED жарығын реттеу.

Қашықтан басқару пульті: Сорғыны іске қосу немесе тоқтату, сору немесе қыздыру деңгейін реттеу, ынталандыру және сүт шығару режимдері арасында ауысу.

Кесте мен сессияны орнатыңыз: Өзіңізге сүт шығару керектігін ұмытпау керектігін еске салыңыз.


OptiRhythm технологиясымен сүт шығуын оңтайландырыңыз: 4 алдын ала орнатылған ырғақтың бірін таңдаңыз және сорғыны балаңызға ең қолайлы ету үшін сорудың қарқындылығын, жылдамдығын және ұзақтығын реттеңіз.

1. **Әдепкі бойынша максималды ырғақ:** Ең жоғары өнімділік алғысы келетін аналар үшін. Стимуляция және сүт шығару режимдері арасында бірнеше рет ауысыңыз.
 2. **Табиғи ырғақ:** Бала емізу кезіндегі табиғи сору ырғағын бағалайтын аналар үшін. Стимуляция және сүт шығару режимдері арасында ұзын және қысқа тартуларды араластыра отырып ауысыңыз.
 3. **Стандартты ырғақ:** Дәстүрлі электрлік сорғының соратын үлгісін қалайтын аналарға арналған. 2 минуттан кейін стимуляция режимінен сүт шығару режиміне ауысу.
 4. **Жұмсақ ырғақ:** Сезімтал емізіктері бар аналарға арналған. Әрбір сорғыш баяу қарқынмен және жұмсақ жанасумен жұмыс істеу үшін мұқият реттелген.
- Оқу құралы және Жиі қойылатын сұрақтар:** Толығырақ нұсқаулықтармен немесе ақауларды жою бойынша ақпаратпен танысыңыз.
- Деректерді қадағалау:** Сору тарихын қарап шығыңыз.
- Фирмалық бағдарламаны жаңарту:** Өнімділікті жақсарту немесе жаңа мүмкіндіктерді қосу үшін қолжетімді болған кезде фирмалық бағдарламаны жаңартыңыз.

Сүтті құю

https://youtu.be/v_HzT9psxSY


1. Сүт саууды тоқтатыңыз немесе өшіріңіз. Сорғыны шығарған кезде ағып кетудің алдын алу үшін алға еңкейіңіз.

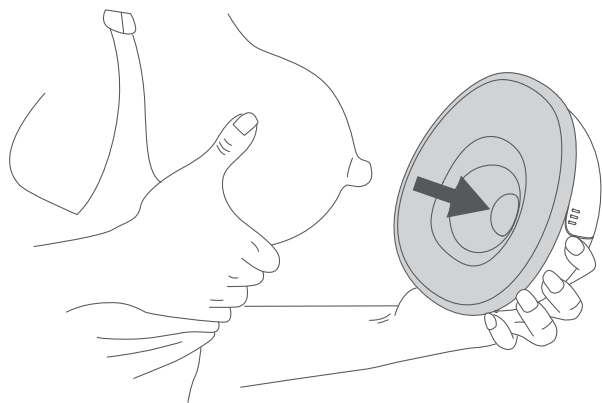


2. Сорғы хабын контейнерден алыңыз. ("Бөлшектеу" 1-қадамға қараңыз.)




Сүтті тасымалдау алдында ағып кетудің алдын алу үшін сорғы хабынан басқа бөліктерді (диафрагманы қоса алғанда) бөлшектеуден аулақ болыңыз.

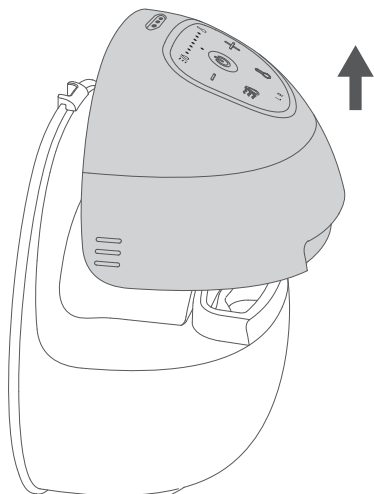

3. Контейнерді үстелге қойып, тасымалдауға дайын күйде қалдырыңыз.

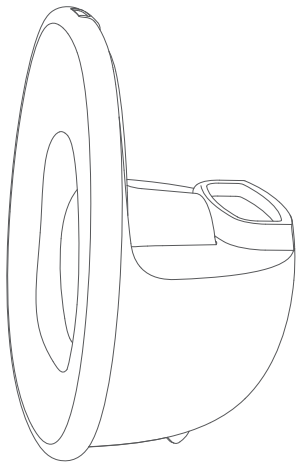

4. Контейнерді сүтті құю үшін ернеуі жоғары қаратып еңкейтіңіз. Құю шүмегі төмен қараған кезде, толық босату үшін одан әрі еңкейтіңіз. Соңында, қажет болса, оның астында жиналған сүтті алу үшін диафрагманы алып тастаңыз.

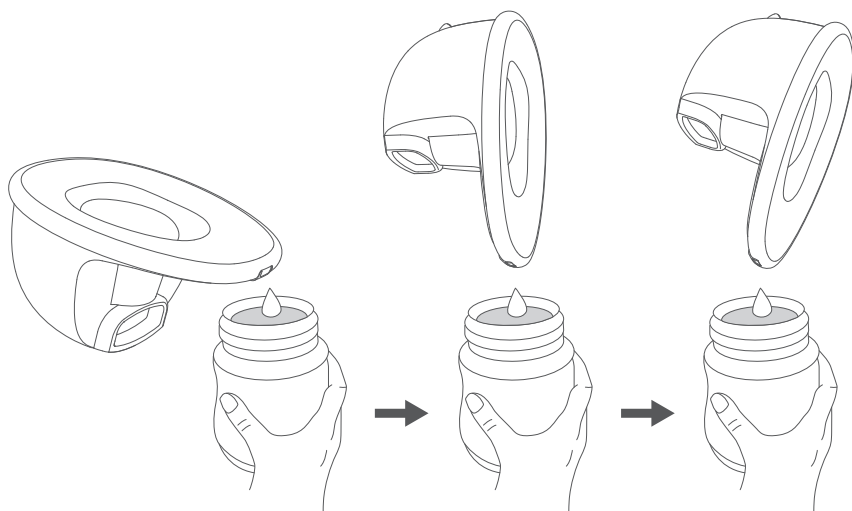

Сүтті сақтау

Ана сүтін сақтау

Ана сүтін таза және стерильденген сүт сақтауға арналған қапшыққа немесе тығыздағыш жастықшасы бар сүт бөтелкесіне құйып, дереу тоңазытқышқа салқындату немесе мұздату үшін қойыңыз.



- Ана сүтін қайта-қайта мұздатпаңыз.
- Жаңа сауылған ана сүтін мұздатылған ана сүтімен араластырмаңыз.

Сақталған сүтті беру

Мұздатылған ана сүтін еріту үшін оны бір түнге тоңазытқышқа қойыңыз. Балама ретінде, төтенше жағдайда еріту үшін ыстық су құйылған ыдысты пайдалануға болады.



- Сәбиіңізді тамақтандырмас бұрын, ана сүтінің температурасын тексеріңіз.
- Сүт сақтау бөтелкесін қайнап жатқан суға қыздыру үшін салмаңыз, себебі ол жарылып немесе жарықшақ пайда болуы мүмкін.
- Емшек сүтін жылыту үшін микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.
- Тамақтандырғаннан кейін қалған ана сүтін төгіңіз.

Техникалық қызмет көрсету

1. Сорғы торабы

Кез келген түрдегі өзгерістерге тыйым салынады. Сорғы хабын ашу немесе оған қол сұғу кепілдікті жарамсыз етеді. Егер жөндеу қажет болса, сорғы хабын сатушыға немесе тікелей өндірушіге қайтарыңыз.

2. Жуылатын бөлшектер

Жуылатын бөлшектердің күтілетін қызмет ету мерзімі 1-3 ай. Ұзақ уақыт сақтау немесе келесі балаңыз үшін сору алдында жуылатын бөлшектерді ауыстыру ұсынылады.

Көбірек киюге болатын емшек сорғылары мен қосалқы бөлшектерді

<https://www.eufy.com/breast-pump>

3. Орнатылған батарея

Егер сіздің емізік сорғыңыз ұзақ уақыт пайдаланылмаса, кіріктірілген батарея баяу разрядталады. Батареяның ұзақ уақыт бойы төмен кернеуден зақымдануын болдырмау үшін, сүт сорғыларын әр 3 ай сайын зарядтаңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Жиі қойылатын сұрақтар мен шешімдерді төмендегі сілтемені басу арқылы ЖҚС бөлімінен таба аласыз:

<https://www.eufy.com/products/t8d04121?ref=breast-pump&variant=43660277121210>

Техникалық сипаттамалар

Енгізу	100-240В ~, 50/60Гц
Шығару	5V=2A
Батарея сыйымдылығы	1400mAh / 3.7VDC
Номиналды қуат	5W
Батареяны зарядтау уақыты	1.5 сағат
Батареяны пайдалану уақыты	2 сағат
Дыбыс деңгейі	<46dB
Жұмыс температурасы	0°C - 40°C
Тасымалдау және сақтау температурасы	-20°C - 70°C
Тасымалдау және сақтау кезіндегі ылғалдылық	15% - 90%

Әдепкі ашық порт: BLE (Bluetooth Low Energy)
Порт сипаттамасы:
Құрылғы қосылғаннан кейін, BLE хабар тарату автоматты түрде қосылады, Bluetooth желісін конфигурациялау (немесе басқару) қызметтерін ұсынады.Өндіруші

Өндіруші

Өндіруші: Shenzhen TPN Technology Co.
Мекенжай: Лянчуан технологиялық паркі, 29-ғимарат, 2-қабат, 203-бөлме,
Булань жолы, 21, Сялилян қауымдастығы, Наньвань көшесі, Лунган ауданы,
Шэньчжэнь, Қытай 518000