

Руководство пользователя

Носимый молокоотсос eufy E20

First product name than model name

Модель: T6060

Корпус насоса

Зарядка

Разборка

Очистка и стерилизация

Сборка

Ношение

Использование


Переливание молока

Local info


Производитель

Обслуживание клиентов


Корпус насоса

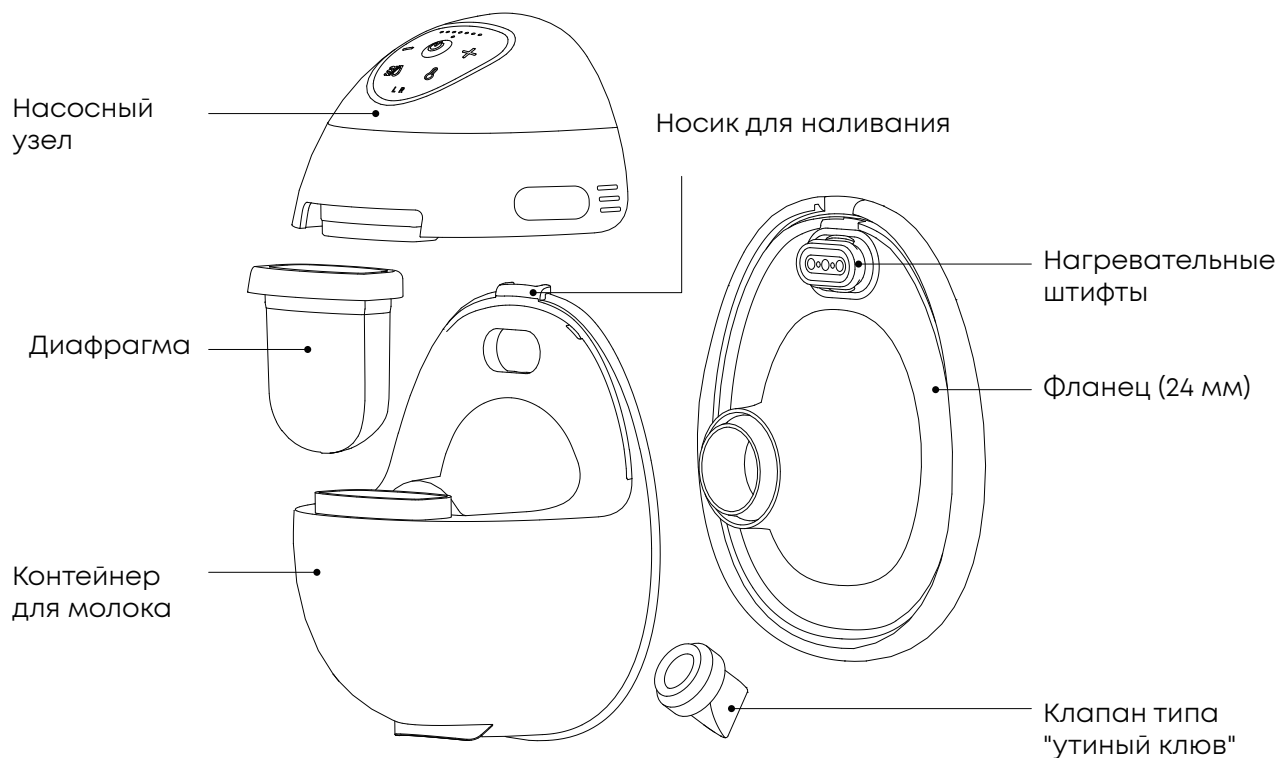

Аксессуары также включают:

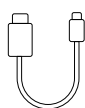

Кабели для зарядки x2

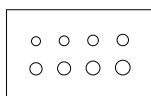

Шкала


Зарядка

Используйте кабель для зарядки USB-C (в комплекте) и адаптер 5 В/1 А или более мощный (не входит в комплект) для зарядки ваших молокоотсосов.



Почему мой насосный узел не запускается?


Если вы столкнулись с неисправностью насосного узла, нажмите и удерживайте кнопку питания на насосном узле в течение 12 секунд, чтобы сбросить настройки и проверить, включится ли он.

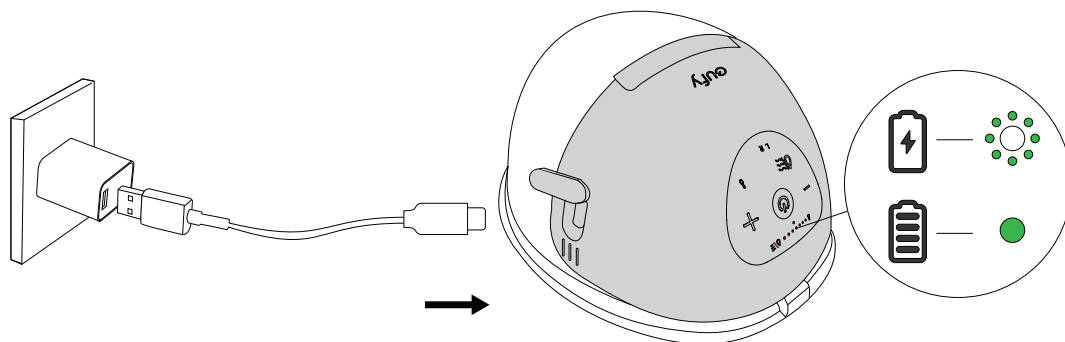


Разборка

1. **Шаг 1:** Удерживайте корпус насоса одной рукой и большим пальцем другой руки потяните край контейнера возле носика наружу, чтобы освободить корпус насоса от носика. (Избегайте тянуть за фланец.)


Шаг 2: Поднимите ступицу.

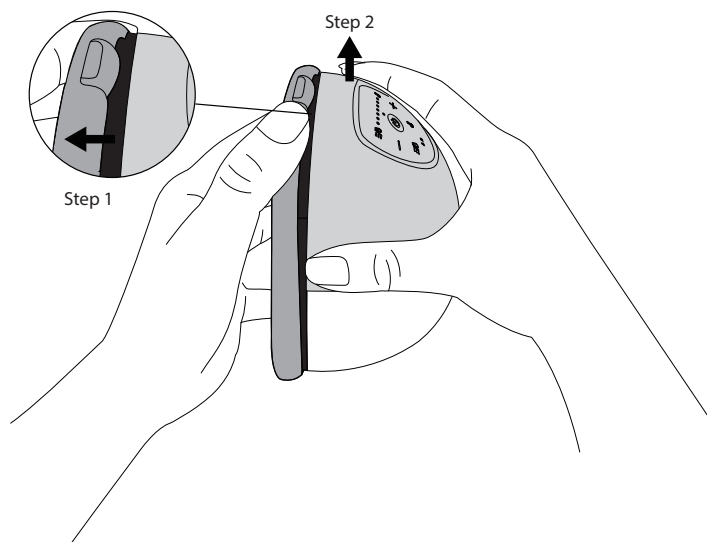


2. Удалите диафрагму из канавки.

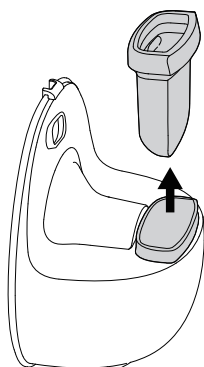

3. вытяните контакты нагревателя из овального отверстия и снимите воронку

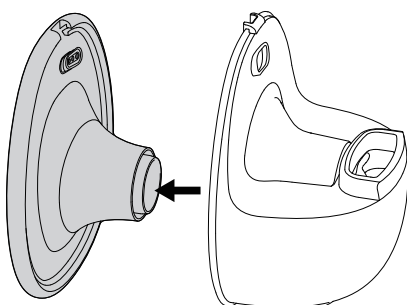

4. Слегка сожмите клапан «утиный клюв» пальцами, чтобы снять его

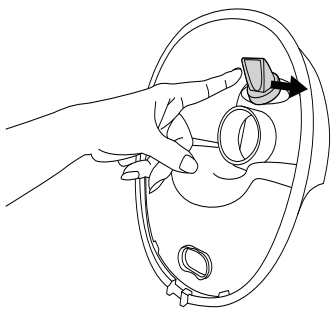

Очистка и стерилизация



- **Перед первым использованием:** простерилизуйте все моющиеся части, кипятя их до 5 минут, постоянно помешивая, чтобы предотвратить прилипание частей к контейнеру и их плавление. В качестве альтернативы простерилизуйте паром максимум 5 минут.
- **Ежедневная чистка:** Промойте все моющиеся части теплой мыльной водой, затем дайте им высохнуть на воздухе. Стерилизуйте при необходимости, используя те же методы, что и при первоначальной очистке.
- **Срок службы моющихся частей:** Срок службы моющихся частей: Ориентировочный срок службы моющихся частей составляет 1-3 месяца, фактический срок службы будет зависеть от частоты использования и стерилизации. Меняйте их после каждого сеанса сцеживания

Не используйте микроволновую печь для стерилизации.




Все моющиеся части (**кроме ступицы насоса**) можно стерилизовать следующим образом.



Всегда держите насосный узел сухим и чистым после каждого сеанса откачки. Если молоко пролилось на насосный узел, протрите его сухой тканью, чтобы обеспечить правильную зарядку.

Посудомоечная
машина

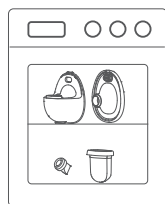

Кастрюля




Стерилизатор для
детских бутылочек




Сборка


1. Держите нижнюю часть контейнера вверх, вставьте клапан «утиный клюв»... и слегка прижмите его, чтобы убедиться, что он плотно зафиксирован

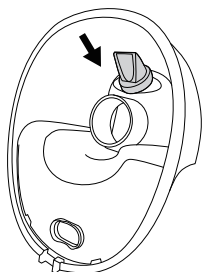


2. Наденьте фланец на контейнер, убедившись, что нагревательные штыри плотно вставлены в овальный вырез. Оберните внешнее кольцо, чтобы убедиться, что оно плотно запечатано, и предотвратить утечку молока.

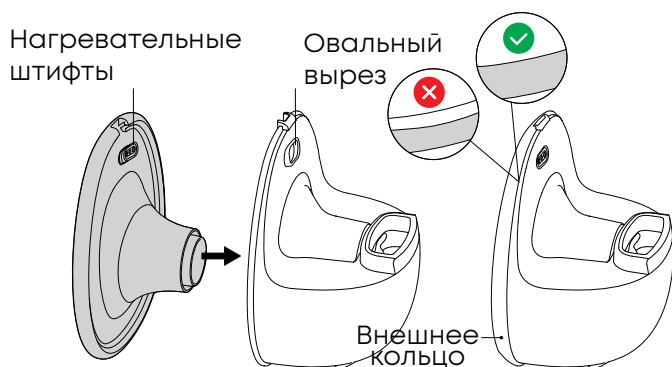


3. Плотно надавите на контакты нагревателя, чтобы они полностью встали на место

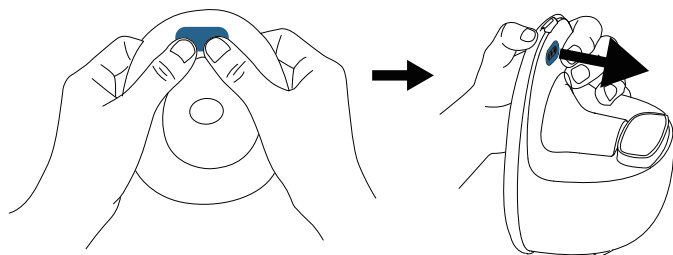

4. Вставьте диафрагму в паз контейнера, при этом вогнутая сторона диафрагмы должна быть обращена к стороне с фланцем.

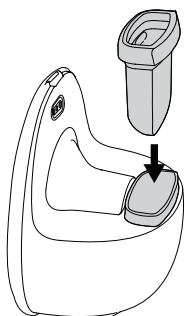


5. Установите насосный узел на верхнюю часть контейнера, плотно прижимая его, чтобы устранить зазор между насосным узлом и диафрагмой.

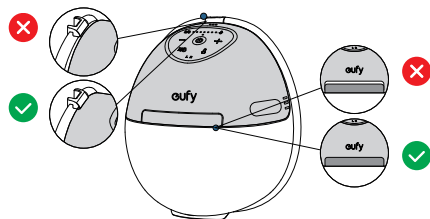

💡 Механизм блокировки между моторным блоком и клювом для наливания обеспечивает надежное всасывание и нагрев.

6. Чтобы обеспечить правильную посадку, используйте шкалу измерения сосков, чтобы выбрать подходящую вставку нужного размера, и поместите её в творонку.

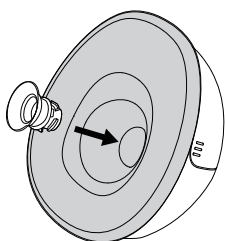

💡 Вставки для регулировки размера продаются отдельно на сайте <https://www.eufy.com/collections/breast-pump-accessories>

Ношение


💡 Два критерия помогут вам определить, правильно ли расположен молокоотсос:

- Чувствуете ли вы заметное всасывание, которое может вытягивать молоко?
- Удобно ли это носить?


Если положение насоса не соответствует ни одному из этих критериев, необходимо отрегулировать его положение.

Вашему организму потребуется немного времени, чтобы адаптироваться к новому насосу, поэтому не расстраивайтесь, если результаты поначалу будут не очень хорошими.

1. Убедитесь, что между моторным блоком и диафрагмой нет зазора. Наклонитесь немного вперед, чтобы убедиться, что ваш сосок находится в центре воронки. Молокоотсос должен плотно прилегать к вашей груди.

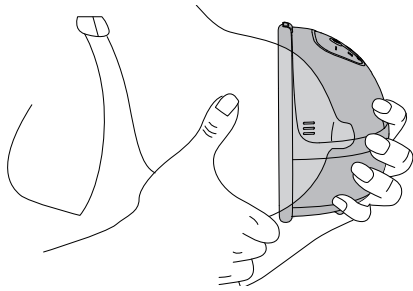

2. Используйте бюстгальтер для кормления с полной чашкой и откидной створкой, чтобы обеспечить плотное прилегание между грудью и фланцем..

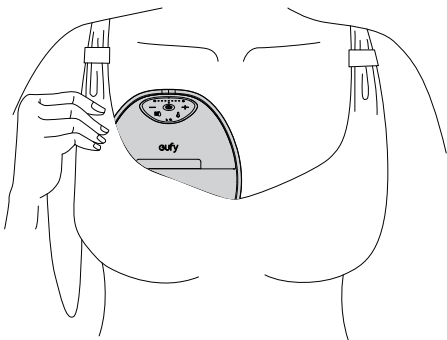

Использование



Чтобы предотвратить утечку:

- Когда вы завершите сборку, еще раз убедитесь, что внешнее кольцо фланца полностью герметично.
- Убедитесь, что ваш сосок находится в центре туннеля воронки, и используйте бюстгальтер для кормления с полным покрытием, чтобы создать плотное прилегание между грудью и фланцем.
- Не отклоняйтесь назад во время сцеживания. В конце сеанса наклонитесь вперед, чтобы снять насос.

Не чувствуете всасывания или совсем нет или очень мало выхода?

- Осмотрите клапан типа «утиный клюв» и диафрагму на наличие повреждений, включая трещины, сколы, отверстия или разрывы. Если деталь повреждена, прекратите использование и приобретите замену.
- Убедитесь, что сборка выполнена правильно и что четыре детали (клапан типа "утиный клюв", воронка, диафрагма и корпус насоса) герметично соединены.
- Отрегулируйте положение, убедитесь, что сосок находится в центре туннеля воронки, насос плотно прилегает к вашей груди, и вы чувствуете заметное всасывание.
- Экспериментируйте с различными размерами фланцев или вставок.
- Попробуйте разные уровни всасывания и ритмы.



Для обеспечения правильного нагрева:

- Нажмите нагревательные штифты плотно в овальный вырез контейнера.
- Запечатйте зазор между ступицей насоса и диафрагмой.
- Определите настройки температуры и продолжительность, которые лучше всего подходят вам и не вызывают раздражения кожи.

Кнопки управления


	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд	Включить / Выключить молокоотсос • Молокоотсос автоматически выключится после работы в течение 30 минут или после паузы на 10 минут.
	Нажмите	Пауза / Продолжить

	Нажмите	Переключение между режимом стимуляции и режимом сцеживания • Режим стимуляции: В этом режиме молокоотсос начинает с быстрого и короткого ритма всасывания, чтобы стимулировать начало выделения молока. • Режим сцеживания: В этом режиме молокоотсос начинает с медленного ритма всасывания для сцеживания молока, с более глубоким и медленным ритмом сцеживания
	Нажмите	Включить / Выключить нагрев
	Нажмите	Увеличение / уменьшение уровня всасывания / нагрева (Чтобы отрегулировать уровень нагрева, сначала нажмите кнопку нагрева.)
	Нажмите и удерживайте одновременно в течение 2 секунд	Сопряжение L/R в приложении

Световые индикаторы		
	Непрерывный красный	Уровень заряда батареи <20%
	Мигающий красный	Уровень заряда батареи <10%
	Белый	В режиме стимуляции / сцеживания
	Постоянный оранжевый	В режиме нагрева
	Мигающий оранжевый	Ошибка нагрева Соберите воронку и моторный блок, чтобы убедиться, что нагревательные штифты правильно установлены.
	Индикаторы от 1 до 7: белый / оранжевый	Уровень всасывания: от 1 до 7 Уровень нагрева: от 1 до 3
	Индикатор L / R белый	Левая / правая сторона сопряжены в приложении


Переливание молока

1. Поставьте молокоотсос на паузу или выключите его. Наклонитесь вперед при извлечении насоса, чтобы предотвратить утечку.

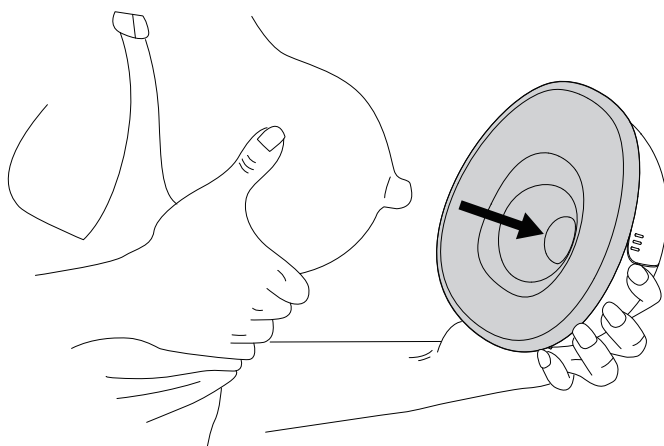


2. Извлеките моторный блок из контейнера. См. шаг 1 «разборка».


⚠ Избегайте разборки любых частей (включая диафрагму), кроме центральной части насоса, перед переливанием молока, чтобы предотвратить утечку.

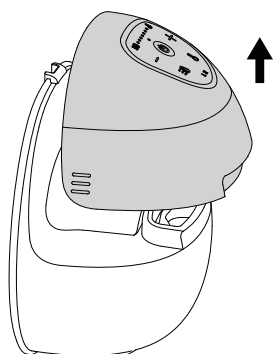

3. Оставьте контейнер на столе, готовый к переносу.

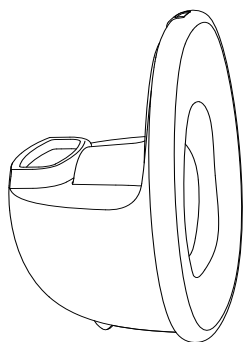

4. Наклоните контейнер воронкой вверх, чтобы налить молоко. Когда носик для наливания направлен вниз, наклоните сильнее, чтобы полностью опустошить. Наконец, снимите диафрагму, если это необходимо, чтобы собрать застрявшее под ней молоко.

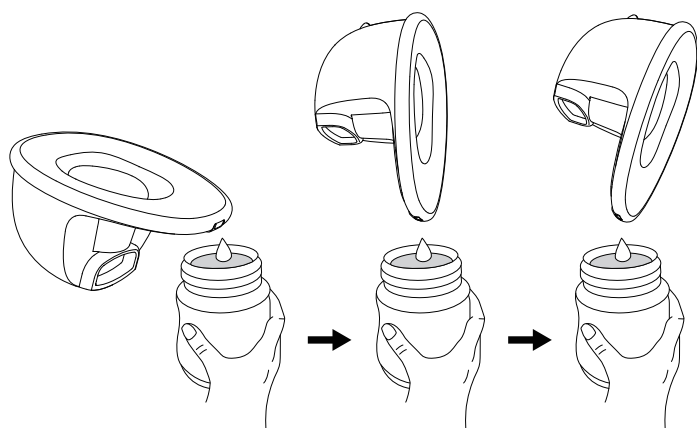

Local info

Скачайте и установите приложение eufy Baby, затем войдите в систему или создайте учетную запись. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы добавить это устройство и завершить настройку.

Чтобы улучшить опыт использования продукции eufy, существующее приложение eufy Baby будет заменено приложением eufy в 2025 году.



Производитель

Manufacturer: Shenzhen TPH Technology Co., Ltd.

Адрес: Комната 203, 2-й этаж, здание 29, Технологический парк Лянчуан.
No. 21 Bulan Road, Xialilang Community, Nanwan Street, Longgang District,
Шэньчжэнь, Китай 518000

Обслуживание клиентов



12-месячная ограниченная гарантия на насосный узел
3-месячная ограниченная гарантия на моющиеся части

(США/Канада) +1 (800) 988 7973

(UK) +44 (0) 1604 936200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(Китай) +86 400 0550 036

(Япония) 03 4455 7823

(AU) +61 3 8331 4800

(Египет) +20 8000000826

(ОАЭ) +971 8000320817

(Кувейт) +965 22069086

(КСА) +966 8008500030



support@eufy.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial