


Мазмұны

Кеуде сүтсағышы жалпы шолу	1
Аксессуарлар	2
Киілетін кеуде сорғышы S2 Pro үшін	2
Киілетін кеуде сорғышы S2 үшін	3
1 Зарядтау	3
2 Бөлшектеу	4
3 Тазалау	7
4 Құрастыру	8
5 Кию	12
6 Қолдану	13
Түймелер арқылы басқару	14
Жарық және дисплей нұсқаулығы	15
7 Сүтті құйып алу	16
8 Мобильді қолданба	19
9 Жуылатын бөлшектерді ауыстыру және сатып алу	20
1. Контейнер негізгі блокқа мықтап бекітілмей ме?	20
2. Сүтсағыштың күші жоқ па немесе өте әлсіз бе?	21
3. Сүтті құйғаннан кейін біраз сүт қалып қоя ма?	22
4. Сүттің ағып кетуінің қалай алдын алуға болады?	22
5. Ауырсынуды сезінесіз бе?	22
6. S2 құрылғысын тоңазытқышта сақтау тәсілдер	22
7. Сүт сорғышының негізгі блогы зарядталмай ма немесе қосылмай ма?	22
8. Зарядтау қорабын зарядтау мүмкін емес пе немесе сүтсауғышты зарядтау мүмкін емес пе?	23
9. Қолданба құрылғыны таба алмай немесе қоса алмай жатыр ма?	23
10. Микробағдарламаны қалай жаңартуға болады?	23


Омырау сауғышына жалпы шолу

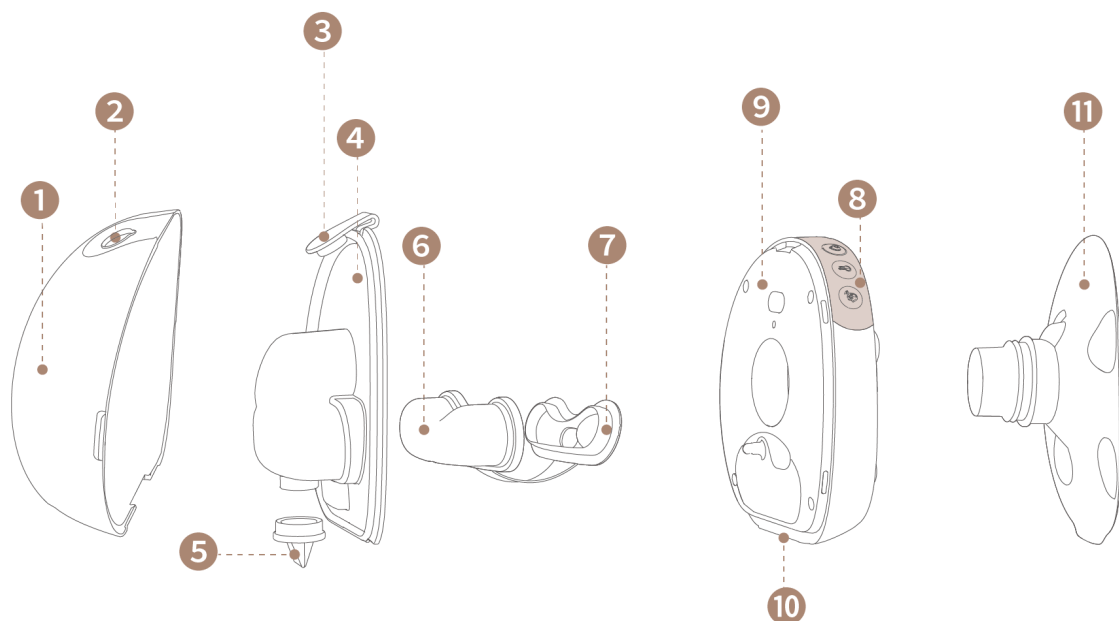

1. Сүт контейнері
2. Сүтті құю тесігі
3. Контейнер қақпағы
4. Контейнердің артқы жағы
5. Үйректұмсық клапаны
6. Диафрагма
7. Диафрагма қақпағы
8. Басқару панелі
9. Сауғыштың негізгі блогы
10. Зарядтау түйреуіштері
11. Фланец (24 мм)


Аксессуарлар

S2 Pro киілетін омырау сауғышы үшін

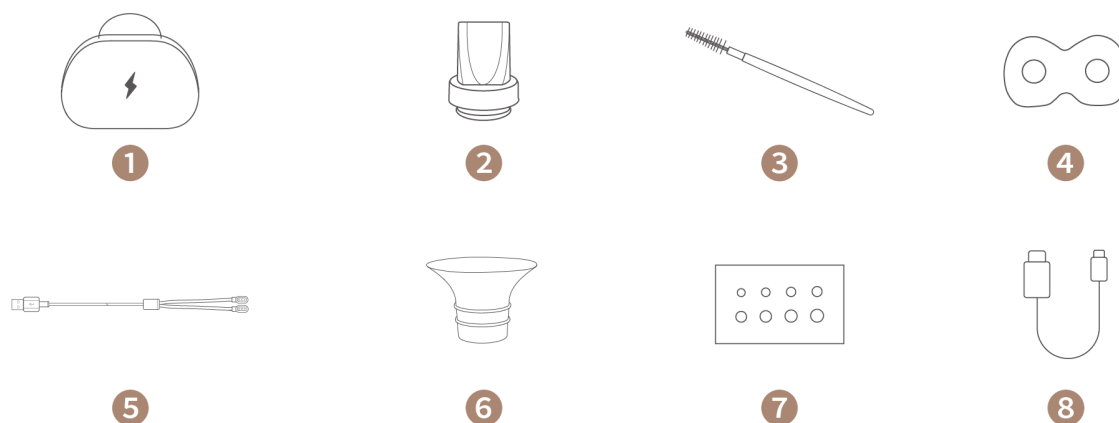

1. Зарядтау корпусы
2. Қосымша үйректұмсық клапандары
3. Клапан тазалайтын щетка
4. Дақ өткізбейтін төсеніш
5. Магнитті зарядтау кабелі
6. Арнайы өлшемді вкладыштар (15/17/19/21 мм)
7. Емшек ұшын өлшеу сызғышы
8. USB-C зарядтау кабелі

S2 киілетін омырау сауғышы үшін

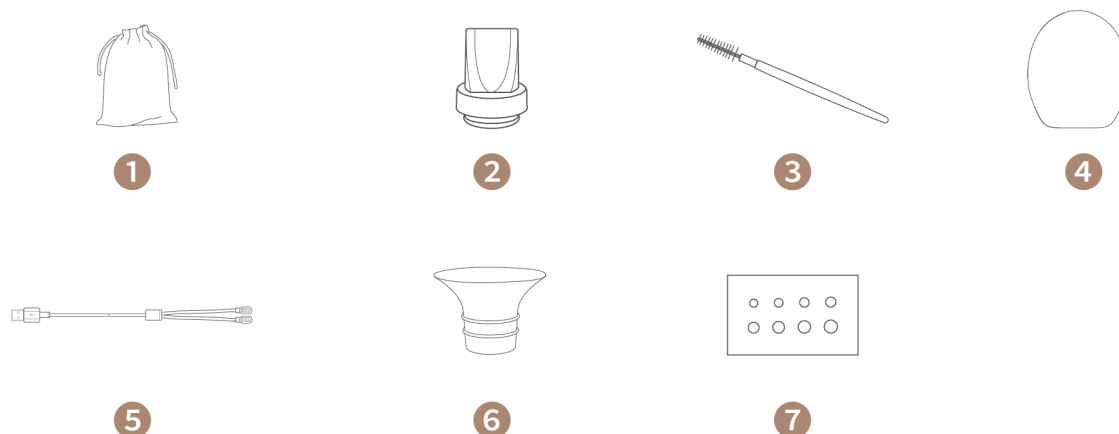


1. Сақтау сөмкесі
2. Қосымша үйректұмсық клапандары
3. Үйрек тұмсығы клапанын тазалау щеткасы
4. Шаңнан қорғайтын қақпақ
5. Магниттік зарядтау кабелі
6. Өлшемді енгізулер (15/17/19/21 мм)
7. Емшек ұшын өлшеу сызғышы


1 Зарядтау

Алғаш қолданар алдында негізгі блокты толық зарядтаңыз; ол зарядталып жатқанда жұмыс істемейді.

- **1-нұсқа:** «2-і 1-де» магнитті зарядтау кабелі

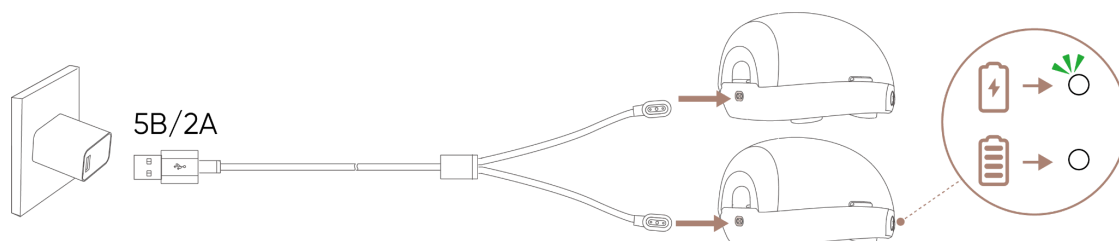

- **2-нұсқа:**Зарядтау қапшығы (S2 Pro үшін)

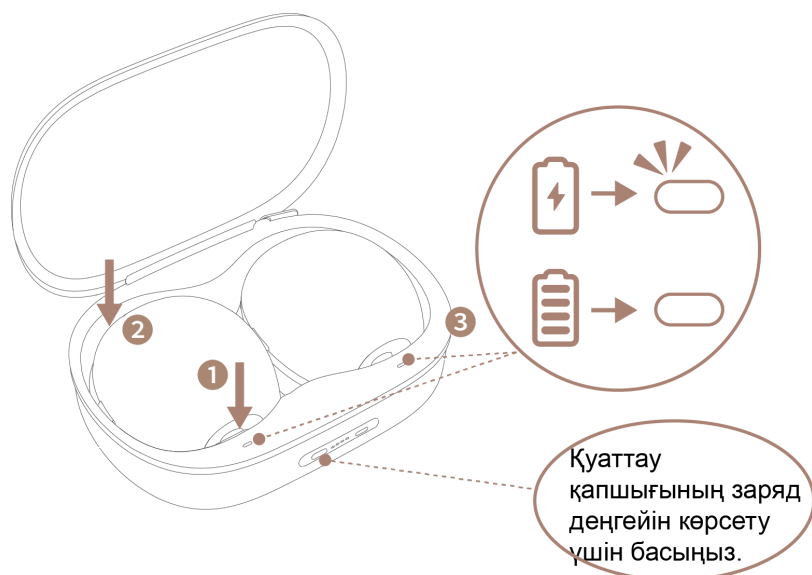


1. Сауғыш блогының зарядтау контактілерін кейс ішіндегі портқа сырт еткен дыбыс шыққанша сәйкестендіріп орнатыңыз.
2. Блоктарды ұяшыққа толық отырғызу үшін сәл босатып, орнына орнықтырыңыз.
3. Индикатордың ақ түспен жыпылықтап тұрғанына көз жеткізіңіз — бұл сауғыштардың дұрыс зарядталып жатқанын білдіреді.


💡 Зарядтау кейсін жууға болмайды. Зарядтау кейсінің ішіндегі алынбалы силикон төсенішті жууға болады, ол сүттің корпусқа төгілуіне жол бермейді.

2 Бөлшектеу


- 1.Сүт контейнерін сауғыш блогынан ажырату үшін оның бүйірлік тұтқасынан тартыңыз.

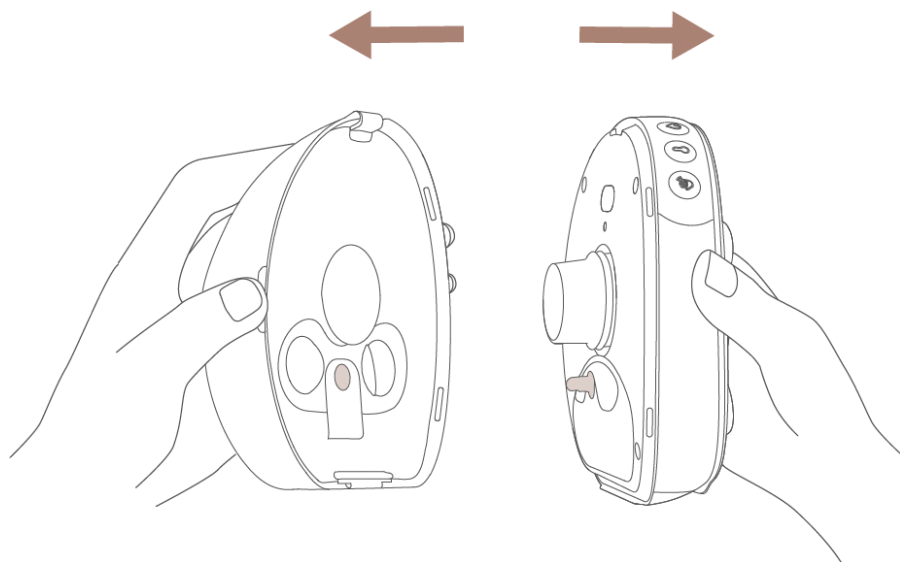


2. Сорғының көпірінен фланецті босату үшін басыңыз.

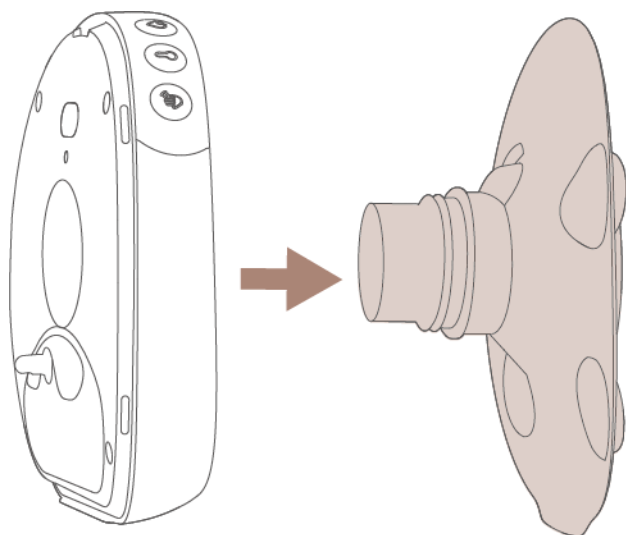


3. Диафрагманы тартып шығарыңыз.

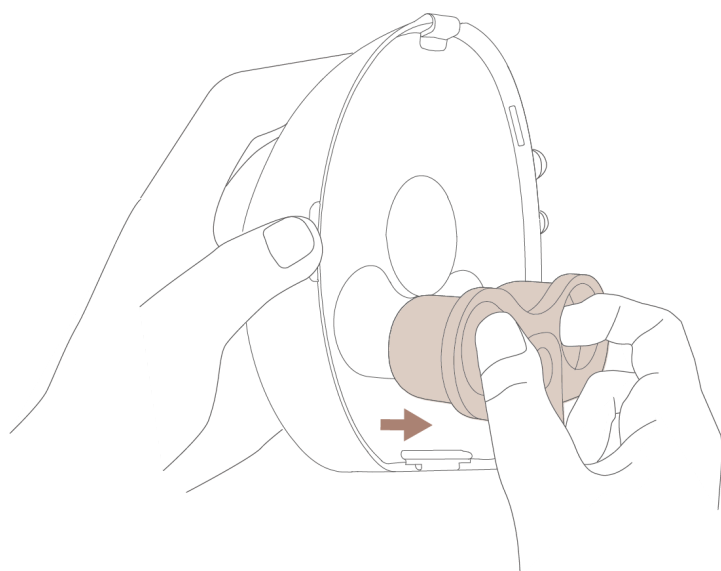


💡 Ұзын тырнақтары бар аналар үшін — диафрагманы шығару үшін осы жерді көтеріңіз.

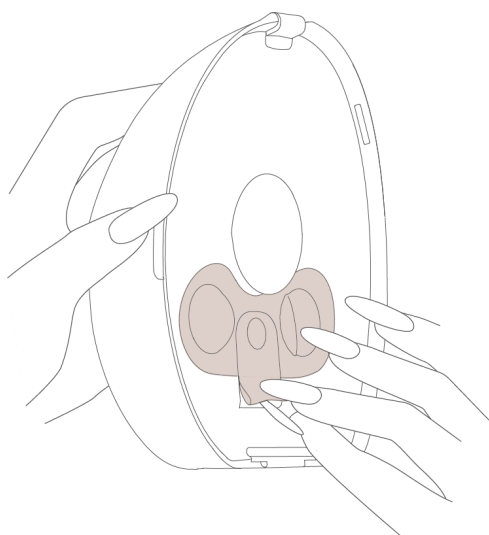

4. Контейнер қақпағын ашып, оны шығарып алу үшін астыңғы жағынан тартыңыз.

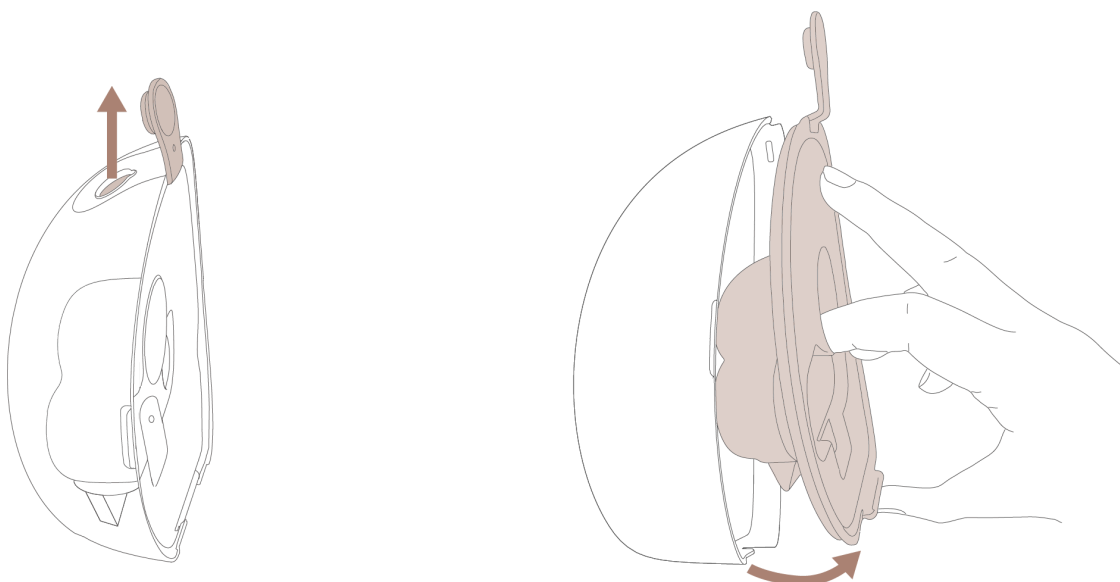

5. Үйрек тұмсығының клапанын алыңыз.

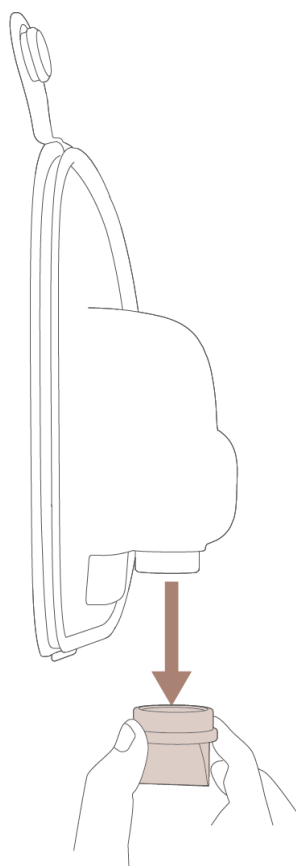

3 Тазалау


Зарарсыздандыру үшін микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.



Сауғыш блогы мен зарядтау кейсінен басқа барлық бөлшектерді төмендегідей жууға және зарарсыздандыруға (стерильдеуге) болады:

! Сорғының тығынын жууға **БОЛМАЙДЫ**. Әрбір сорғы сеансынан кейін сорғының тығынын әрқашан құрғақ және таза ұстаңыз. Егер сүт сорғының тығынына төгіліп кетсе, дұрыс зарядталуын қамтамасыз ету үшін оны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Ыдыс жуғыш машина

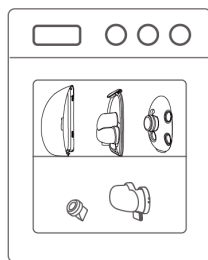


Пісіруге арналған кәстрөл

Деформацияны болдырмау үшін үздіксіз араластырыңыз.




Балалар бөтелкелерін зарарсыздандырғыш

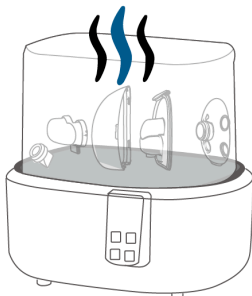

Алғаш қолданар алдында: Барлық жуылатын бөлшектер ыдыс түбіне жабысып, еріп кетпеуі үшін оларды үнемі араластыра отырып, 5 минут бойы қайнатып зарарсыздандырыңыз.


Күнделікті тазалау: Барлық жуылатын бөлшектерді жылы, сабынды сумен жуып-шайып, ашық ауада кептіріңіз.

- 💡 • Зақымданып қалмауы үшін клапанды тек жинақта бар арнайы қылшақпен тазалаңыз.
- Сызылып кетпеуі үшін қалған жуылатын бөлшектерді силикон щеткамен немесе губкамен тазалаңыз.

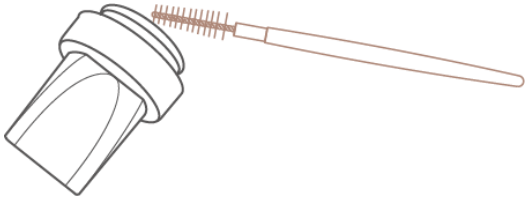


4 Құрастыру

1. Үйрек тұмсығының клапанын контейнердің ішіндегі кішкентай тесікке бекітіңіз. Құлап қалмас үшін оны сілкіп тастаңыз.- Клапанды контейнердің ішіндегі кішігірім тесікке кигізіп бекітіңіз. Берік бекітілгеніне және түсіп қалмайтынына көз жеткізу үшін оны сәл тартып тексеріңіз.

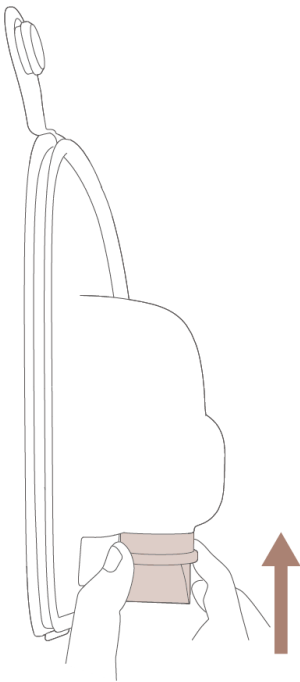


2. Контейнерді қайта жинаңыз.

- ❶ Қақпақты жоғарғы ұяшыққа сәйкестендіріп, төменгі тілшесін контейнердің ұяшығына кіргізіңіз.

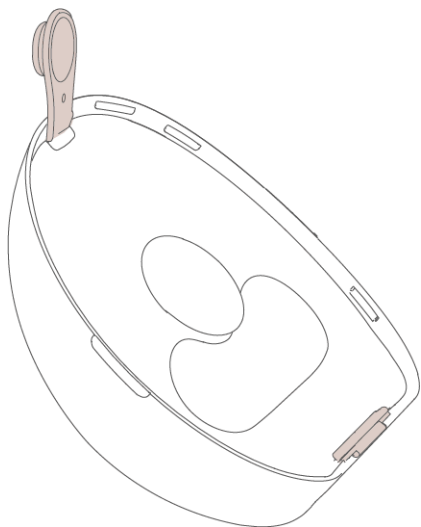


- ❷ Ыдыстың жоғарғы бөлігін алдымен екі қолыңызбен, содан кейін төменгі бөлігін шерткен дыбыс шыққанша мықтап басыңыз. Сорудың төмендеуі мен ағып кетудің алдын алу үшін барлық 4 туралау белгісінің ыдыстың артқы жағында орналасқанына көз жеткізіңіз.

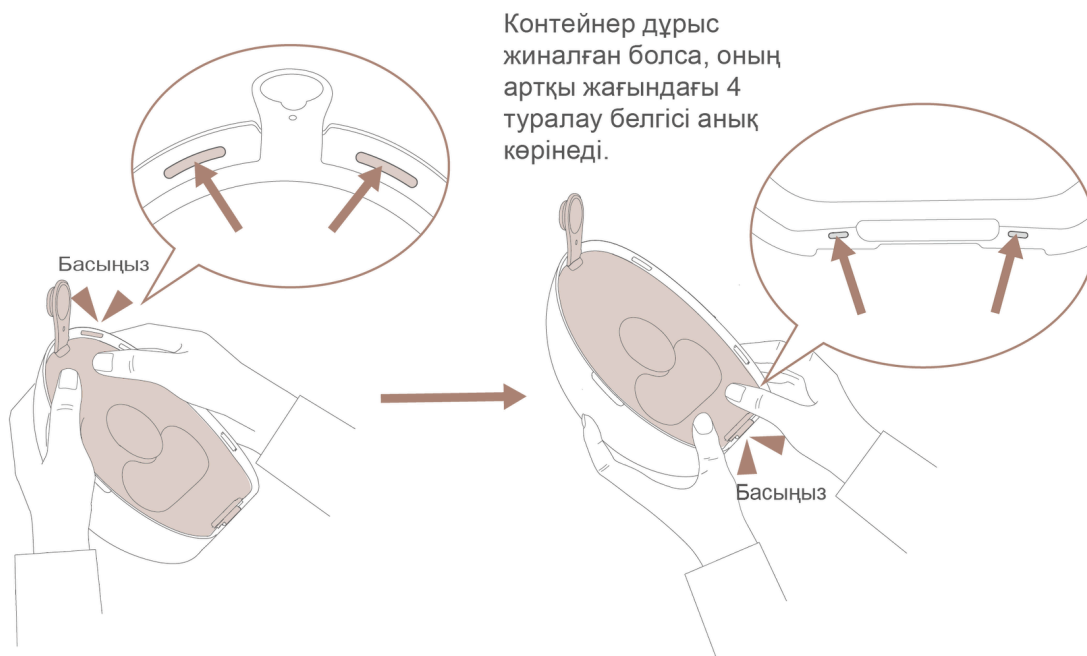


💡 Алаңдамаңыз! Сүт ыдысы берік PPSU пластиктен жасалған. Басылған кезде сынбайды.

③ Контейнер қақпағын шүмектің ішіне мықтап басыңыз.

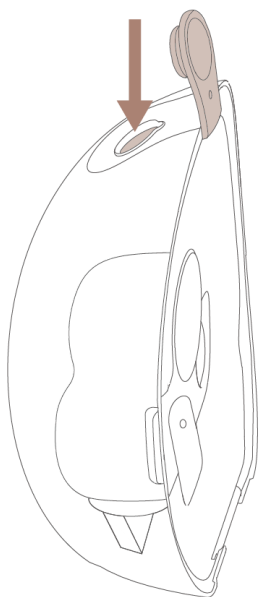


3. Дифрагманы контейнердің артқы бөлігіндегі арнайы ойыққа отырғызыңыз. Дифрагма жиектерінің ойық бойымен, әсіресе жоғарғы иілісі бойынша толықтай саңылаусыз орныққанына көз жеткізіңіз.

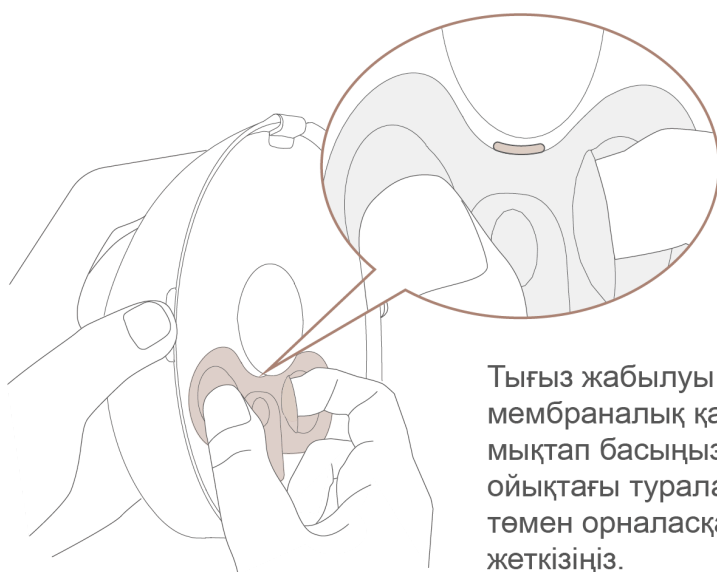

Тығыз жабылуы үшін мембраналық қақпақты мықтап басыңыз және оның ойықтағы туралау белгісінен төмен орналасқанына көз жеткізіңіз.


💡 Жинамас бұрын дифрагманың толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Ылғал сорғының центріне зақым келтіруі мүмкін.

4. Сорғының көпіріндегі ілгекті диафрагмадағы тесікпен туралаңыз және жиналған контейнерді көпірге шерткенше басыңыз.

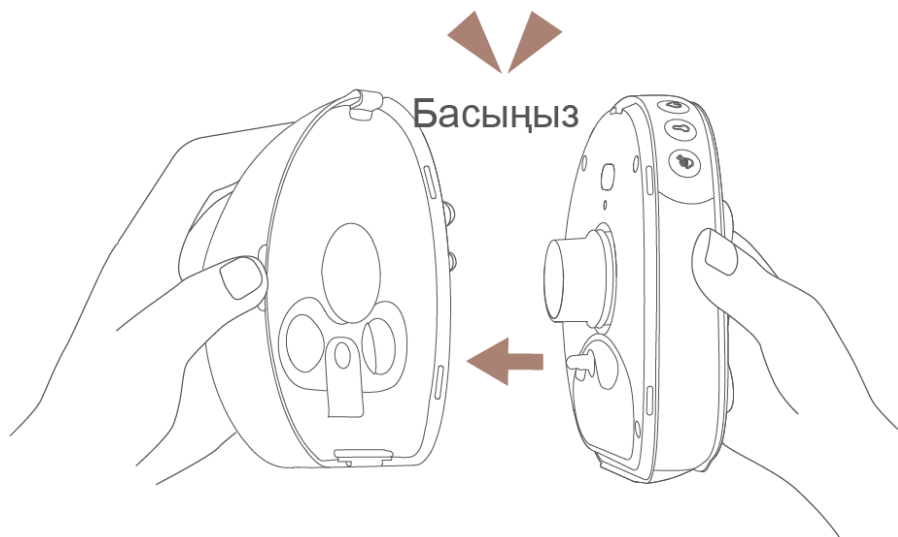


 **Маңызды:** Контейнерді хабқа басқаннан кейін, оның мықтап бекітілгенін тексеру үшін оны ақырын тартыңыз. Егер бекітілмеген болса, оларды қайта жинау үшін жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз.

5. Фланецті сорғыға басыңыз.

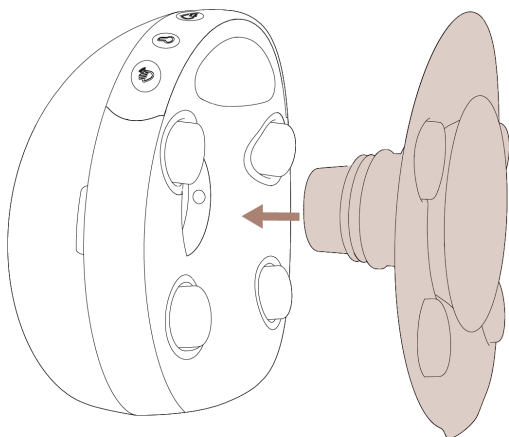


6. Үрпі өлшемін анықтау картасын пайдаланып, өзіңізге тиісті вкладышты таңдаңыз да, оны фланец воронкасына орнатыңыз.

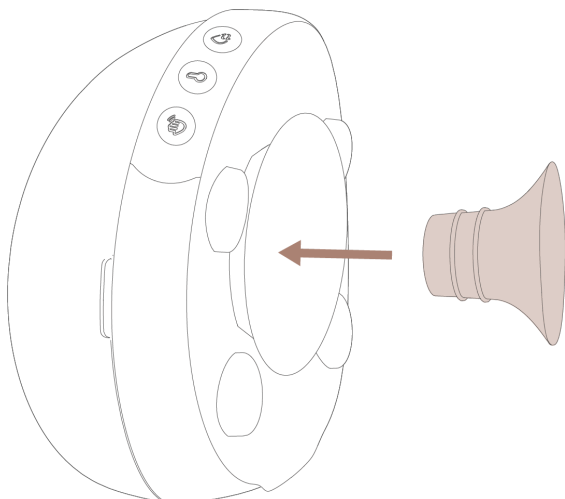


 **Өте маңызды:** Дұрыс өлшемді қосымшаны таңдау ыңғайлылық пен нәтиже үшін өте маңызды. Алғаш қолданар алдында қоса берілген емізік өлшеу картасын пайдаланыңыз. Егер сіз нәтиженің төмендеуін немесе ыңғайсыздықты сезінсеңіз, басқа өлшемді қосымшаны қолданып көріңіз.

5 Кию

1. Кеуде ұшыңыз фланецті туннельдің ортасында орналасқанына көз жеткізу үшін алға қарай сәл еңкейіңіз. Емшек сорғыш емшекке мықтап тиюі керек.

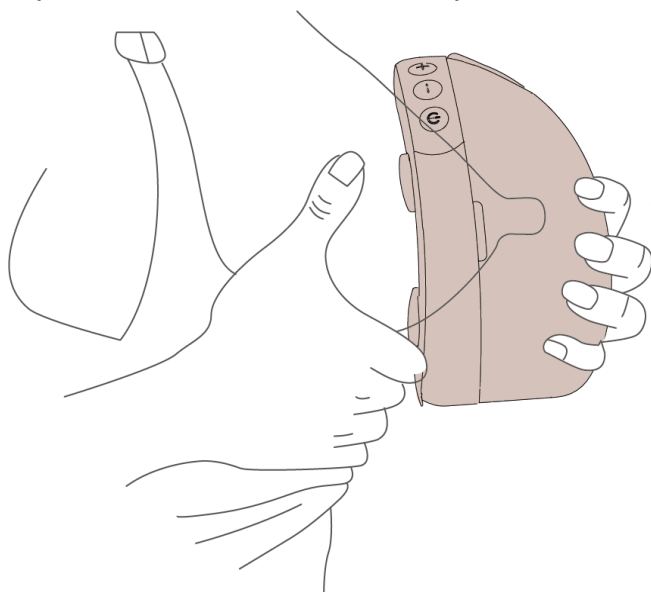

2 Кеуделеріңіз бен емшек емізу аймағының арасына тығыз тығыздық жасау үшін, жабыны бар толық жабатын емізу бюстгальтерін пайдаланыңыз.

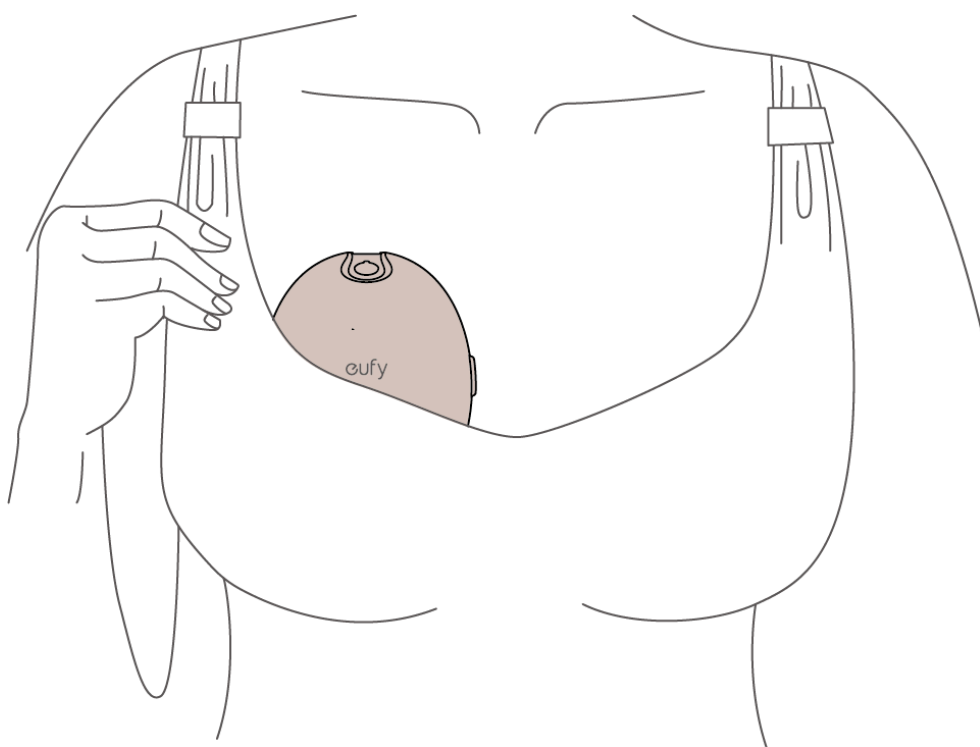

💡 Массаж нүктелері теріде уақытша із қалдыруы мүмкін. Бұл — жеңіл әсерге болатын қалыпты реакция және ол құрылғыны қолданғаннан кейін көп ұзамай өздігінен кетеді.

6 Қолданылуда



Түймелерді басқару элементтері

Белгіше		Әрекет	Функция
	Қуат түймесі	2 секунд басып тұрыңыз	Кеуде сауу қосу/өшіру- сауу Сүт сүтсауғыш құралы 10 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшеді.
		Баспасөз	Кідірту / Жалғастыру
	Режим түймесі	Баспасөз	Қажетті режимді таңдау үшін басыңыз. Келесі режимдерге ауысу үшін қайталап басыңыз: Ынталандыру, Сауу, Демалу және Аралас режим. Ынталандыру режимінде 7 деңгей, ал Сауу режимінде 10 деңгей бар.
		Екі рет жылдам басыңыз	Емізік туннелінің шамын қосу/өшіру

	Массаж түймесі	Баспасөз	Массаж режимін қосыңыз/өшіріңіз. Массаж режимінде 3 деңгей бар.
	Қыздыру түймесі	Баспасөз	Жылытуды қосу/өшіру • Әдепкі қыздыру уақыты - 15 минут. • Қолданбада қыздыру ұзақтығын өзгертуге болады.
	Деңгейді жоғарылату/төмендету түймелері	Баспасөз	• Сауу/жылыту/массаж деңгейін арттыру/төмендету.- сауу

Жарық және дисплей нұсқаулығы

Жарық		Сипаттама	Мәртебесі
	Батарея	Сары түсте жыпылықтау	Зарядтау процесі жүріп жатыр
		Тұрақты сары	Батарея деңгейі $\geq 30\%$
		Тұрақты қызғылт сары	Батарея деңгейі $< 30\%$
		Жыпылықтаған қызғылт сары	Батарея деңгейі $< 5\%$
	Ынталандыру режимі		


Тұрақты сары

Ынталандыру / Экспрессия / Массаж / Жылыту режимінде


	Өрнек режимі		
	Массаж режимі	Тұрақты сары	Тиісті функция ынталандыру / массаж / қыздыру деңгейлерін реттеу үшін таңдалады.
	Қыздыру режимі		
	Деңгей	Тұрақты сары	Таңдалған режимнің ағымдағы деңгейін көрсетеді (сары түспен жыпылықтайтын).
	Жұмыс уақыты	Тұрақты сары	Сауу уақыты
	Жұптау режимі	Сол / Оң жақ индикатор кезектесіп жыпылықтайды	Қолданбада сол / оң жақ жұптастыру
		Солға / Оңға сары индикатор	Қолданбада сол / оң жақ жұптастырылған

7 Тасымалдау Сүт

1. Сүтсауғышты кідіртіңіз немесе өшіріңіз. Ағып кетудің алдын алу үшін сорғыны шығарған кезде алға еңкейіңіз.- Сүтсауғышты

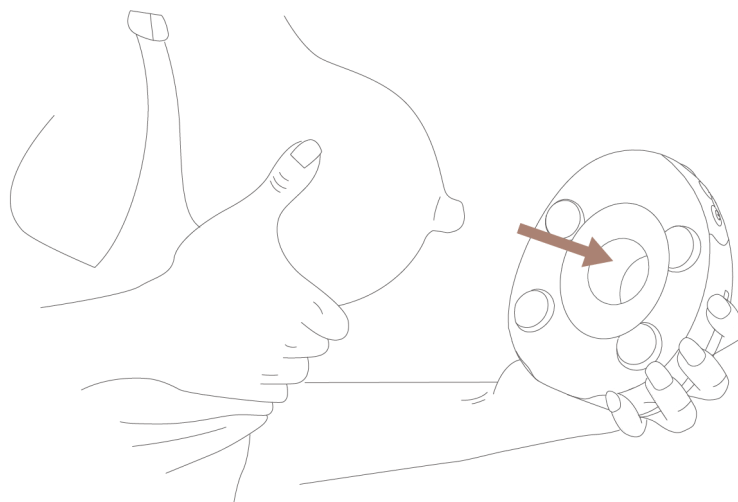


2. Сауғыш блогынан контейнерді шешіңіз.

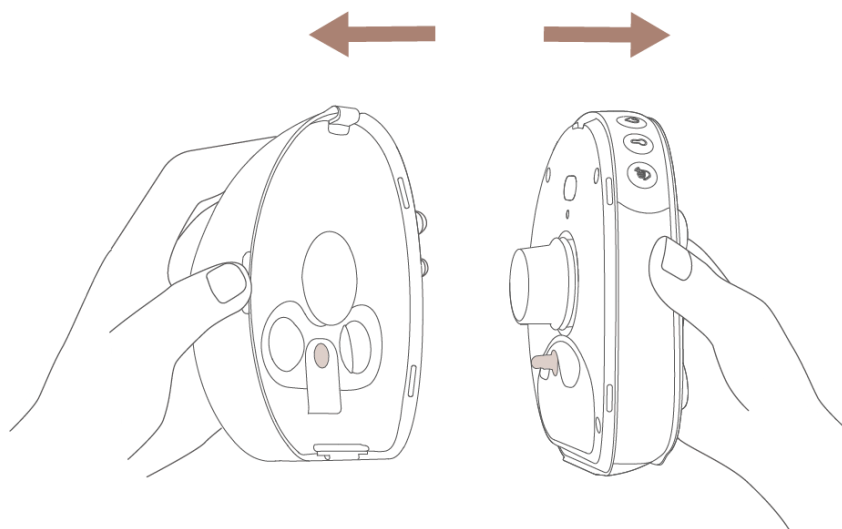


💡 Сүтті төгіп алмас бұрын, оның ішіндегі бөлшектерді алып тастамаңыз, себебі ол ағып кетпеуі керек.

3. Контейнер қақпағын ашыңыз.

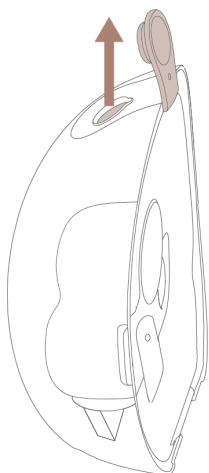


4. Сүтті құйыңыз.


❶ Құю шүмегі төмен қаратылып, ыдысты еңкейтіңіз. Қажет болса, астына жиналып қалған сүтті жинау үшін диафрагманы алып тастаңыз.

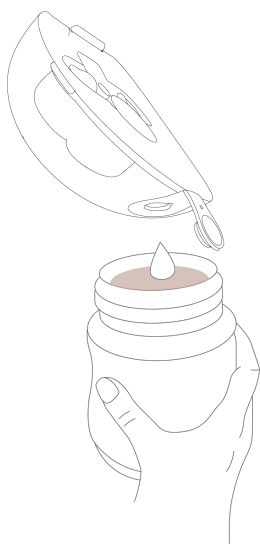

❷ Құйғаннан кейін диафрагма камерасында аз мөлшерде сүт қалуы мүмкін. Барлық сүтті жинау үшін диафрагманы алып тастаңыз және тұрып қалған сүттің қайта ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін ыдысты үстелге 10 секундқа тік қойыңыз.

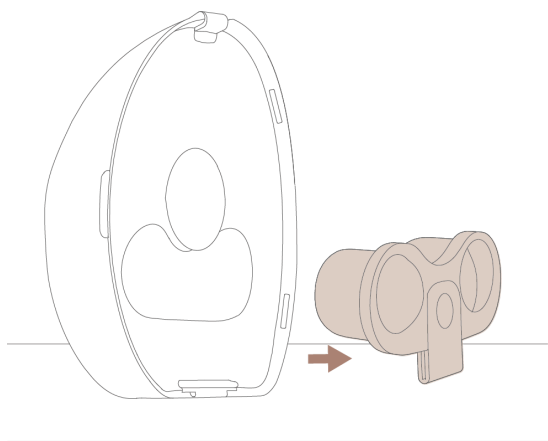

③ Жиналған сүтті төгіп тастаңыз.

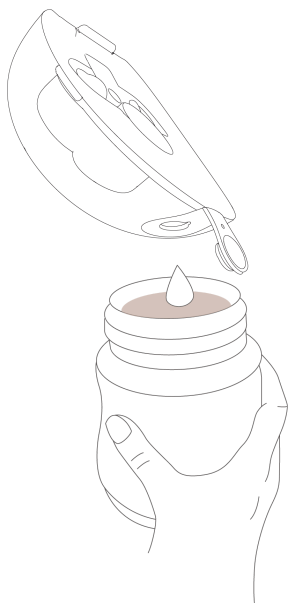

8 Мобильді қолданба

Сауғышты толықтай өзіңізге ыңғайлап баптау үшін оны eufy қолданбасымен бірге пайдаланыңыз. Сауу параметрлерін реттеңіз, деректеріңізді бақылап отырыңыз және сеанстарды оңай басқарыңыз.

1. Мұнда басыңыз немесе **eufy (Baby)** қолданбасының соңғы нұсқасын жүктеп алу үшін App Store немесе Google Play дүкеніне кіріп, аккаунт (тіркелгі) жасаңыз



💡 Егер сіз қазіргі уақытта eufy Baby қолданбасын пайдаланып жүрсеңіз, барлық құрылғыларыңызды әрі қарай қолдану және жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін **eufy** қолданбасына ауысуыңызды өтінеміз.

2. «Құрылғы қосу» > «Нәресте» > «Сүт сауғыш» > «Киілетін сүт сауғыш S2» бөлімін түртіңіз және құрылғыны қосу (жұптастыру) үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

3. Бағдарламалық жасақтаманың ең соңғы нұсқасының бар екеніне көз жеткізу үшін микробағдарлама жаңартуларын тексеріңіз:

- ❶ Басты экранда Параметрлер бетіне кіру үшін «Нәресте»  >  «Параметрлер» бөлімін түртіңіз.
- ❷ Сүт сауғышты таңдап, «Құрылғы туралы» > «Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды тексеру» бөлімін түртіңіз.
- ❸ Бір сүт сауғышты жаңарту аяқталғаннан кейін, екінші сүт сауғышты таңдап, осы әрекетті қайталаңыз.

9 Жуылатын бөлшектерді ауыстыру және сатып алу

Жууға болатын бөлшектердің болжамды қызмет ету мерзімі — 1–3 ай. Ал нақты пайдалану мерзімі оларды қолдану және дезинфекциялау жиілігіне байланысты өзгереді.

Егер сауу қуаты мен өнімділіктің төмендегенін байқасаңыз (әсіресе ішкі клапан тозғанда) немесе келесі балаңызды саууға жоспарлап, бөлшектерді тым ұзақ сақтап қойған болсаңыз, оларды жаңасына ауыстырыңыз.


Сүт сауғышыңызға қосымша жууға болатын бөлшектер қажет пе? Қажетті бөлшектерді тауып, тапсырыс беру үшін eufy.com сайтына кіріңіз.

10 Ақаулықтарды жою бойынша ең жақсы 10 кеңес

1. Контейнер негізгі блокқа мықтап бекітілмей ме?

1-қадам: контейнерді қайтадан жинаңыз.

Алдымен ыдыстың жоғарғы бөлігін екі қолыңызбен, содан кейін төменгі бөлігін мықтап басыңыз. Сауғышты төмендеуі мен ағып кетудің алдын алу үшін барлық 4 туралау белгілерінің ыдыстың артқы жағының үстінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Барлығы 4 туралау белгісі бар: құю шүмегінің сол және оң жағында 2 және төменгі жағында 2.

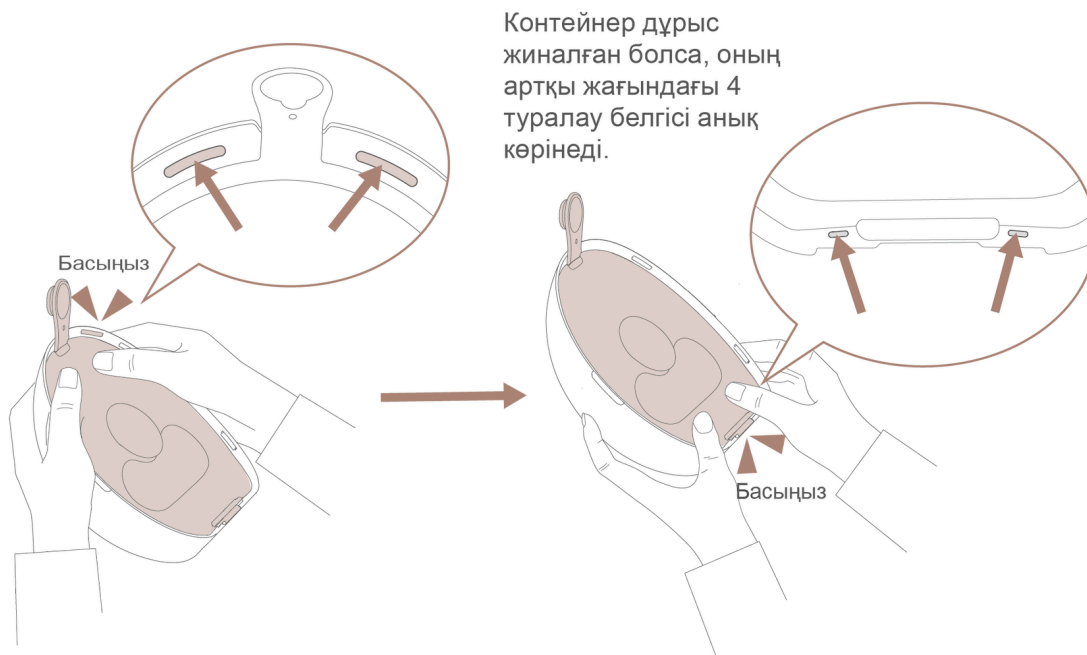

2-қадам: диафрагманы қайта жинаңыз.

Диафрагманы контейнердің артқы жағындағы пішінді ойыққа салыңыз. Диафрагма жиегінің ойықтың жиегі бойымен, әсіресе жоғарғы қисық бойымен толық орналасқанына көз жеткізіңіз. Мықты тығыздағыш жасау үшін диафрагма қақпағын мықтап басыңыз және оның ойықтағы туралау белгісінен төмен орналасқанына көз жеткізіңіз.

3-қадам: контейнерді негізгі блокқа қайта бекітіңіз.

Сорғының көпіріндегі ілгекті диафрагмадағы тесікпен туралаңыз, содан кейін жиналған контейнерді көпірге шерту дыбысын естіп, сезгенше мықтап басыңыз.

2. Сүтсағыштың күші жоқ па немесе өте әлсіз бе?

- Үйрек тұмсығы клапаны мен диафрагмасын кез келген зақымданулардың — жарықтардың, сынықтардың, тесіктердің немесе жыртылулардың бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдану анықталған жағдайда, пайдалануды дереу тоқтатып, зақымдалған бөлшекті ауыстырыңыз.
- 4 негізгі компоненттің (үйрек тұмсығы клапаны, диафрагма, контейнер және фланец туннелі) дұрыс жиналғанын және толық тығыздалғанын тексеріңіз. Дұрыс емес жиналудың мүмкін себептері:
 - Үйрек тұмсығы толығымен орнына қойылмаған.
 - Контейнердің артқы жағы барлық 4 белгілерінің астына толық орнатылмаған.
 - Диафрагма жиегі ойықтың жиегі бойымен толық орналаспаған.
 - Диафрагма қақпағы мықтап басылмаған және ойықтағы туралау белгісінен төмен орналаспаған.
 - Контейнер негізгі блокқа толығымен басылмаған.
 - Фланец толық ішке қарай басылмаған және мықтап басылған.
 - Дәлдігін реттеңіз: емізік фланецті туннельдің ортасында орналасқанына және сорғы кеудеге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
 - Жақсырақ сәйкес келу үшін басқа өлшемдегі ілмекті қолданып көріңіз.



Денеңіздің жаңа сорғыға жауап беруі үшін уақыт қажет — егер бастапқыда өнімділік төмен болса, көңіліңіз түспесін.

3. Құйғаннан кейін қалған сүт?

- Диафрагмада тұрып қалған сүт: диафрагманы алып тастаңыз және тұрып қалған сүттің қайта ағып кетуі үшін ыдысты үстелге 10 секундқа тік қойыңыз, содан кейін құйыңыз.
- Ыдыста қалған сүт: қалған сүттің ағып кетуіне көмектесу үшін ыдысты бөтелкеге қарай бірнеше рет жылдам жылжытыңыз.

4. Ағып кетудің алдын қалай алуға болады?

- Контейнердің артқы жағы мықтап итеріліп, барлық 4 белгісінің астына толық орнатылғанына көз жеткізіңіз — екеуі құю шүмегінің сол және оң жағында, ал екеуі астыңғы жағында.
- Кеуделер мен ернеу арасында тығыз тығыздық жасау үшін толық жабатын емізу бюстгалтерін киіңіз.
- Сорғыту кезінде артқа еңкеймеңіз немесе алға шамадан тыс еңкеймеңіз.
- Сүтті құймас бұрын ыдысты бөлшектемеңіз.
- Сүтті құйған кезде фланецті туннельді жоғары қаратып ұстаңыз.

5. Ауырсынуды сезінесіз бе?

Кеуде ұшыңызға дұрыс өлшем салғышты таңдағаныңызға көз жеткізіңіз. Берілген кеуде ұшын өлшеу картасын және өлшем нұсқаулығын қараңыз. Қажет болса, ең ыңғайлы және тиімді өлшемді табу үшін өлшемді үлкейтіп немесе кішірейтіп көріңіз.- Кеуде

Ниппе фланец туннелінің ортасында болатындай етіп тозу қалпын реттеңіз.

Сүтсауғыш, бірақ жайлы сезінгенше біртіндеп арттырыңыз.

Ыңғайлылық пен релаксацияны арттыру үшін жылыту және массаж мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.

Спрейді сорып көріңіз.

6. S2 құрылғысын тоңазытқышта сақтау тәсілдер

Контейнерді Саууы көпіршігінен ажыратыңыз. Фланецті туннельді біртұтас біріктірілген блок жасау үшін контейнер туннеліне салыңыз, содан кейін тоңазытқышта сақтаңыз.



Сауғыштың мотор блогын (электронды бөлігін) тоңазытқышқа салмаңыз.

7. Сүтсауғыш орталығы зарядталмайды немесе қосылмайды ма?

- Сүтсауғыш блогы қуат түймесін басып, оны қалпына келтіру үшін 12 секунд ұстап тұрыңыз.
- Зарядтау қапшығын* пайдалансаңыз, зарядтау түйреуіштерімен дұрыс жанасуын қамтамасыз ету үшін сүт сорғыштарын реттеңіз.
- Зарядтау қорабындағы қуат дисплей түймесін 2 секунд басып тұрып, қалпына келтіріңіз
- 5 В/2 А немесе одан жоғары қуат адаптерін пайдаланыңыз.
- Берілген магнитті зарядтау кабелін пайдаланып тікелей зарядтаңыз.

8. Зарядтау қорабын* зарядтау мүмкін емес пе немесе сүт сүтсауғышты зарядтау мүмкін емес пе?

Зарядтау қорабындағы қуат дисплей түймесін 2 секунд басып тұрып, қалпына келтіріңіз.

*Тек S2 Pro үшін қолжетімді.

9. Қолданба құрылғыны таба алмай немесе қоса алмай жатыр ма?

1-қадам: қолданба дүкенінен eufy қолданбасының соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

2-қадам: құрылғы жұптастыру режимінде екенін көрсететін сол және оң жақ индикатор шамдары кезектесіп жыпылықтағанша + және – түймелерін 2 секунд бойы бір уақытта басыңыз.

3-қадам: жұптауды аяқтау үшін қолданба ішіндегі нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбаға тек бір сорғы қосыла ма?

eufy қолданбасын жауып, қайта ашыңыз. Қосылмаған сорғы жұптастыру режимінде екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін сол құрылғы үшін жұптастыру процесін қайта орындаңыз.

10. Микробағдарламаны қалай жаңартуға болады?

1-қадам: Параметрлер экранына кіру үшін Басты экранда «Нәресте» >  > 
«Параметрлер» бөлімін түртіңіз

2-қадам: Сүт сауғышты таңдап, «Құрылғы туралы» > «Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды тексеру» бөлімін түртіңіз

3-қадам: бір сүтсауғышты жаңартуды аяқтағаннан кейін, басқа сүтсауғышты таңдап, қайталаңыз **2-қадам**.